

ILCONSIGLIO SNPA

- VISTO** che, ai sensi dell'art.13 della Legge 132/2016 ed al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, è istituito il Consiglio del Sistema Nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 15 del DM 123/2010 ed al fine di promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, ha operato presso ISPRA il Consiglio Federale presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA;
- CONSIDERATO** che, ai fini di cui sopra, il Consiglio Federale ha formulato e attuato programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, ha adottato atti di indirizzo e raccomandazioni, sollecitato e proposto soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del proprio Regolamento di funzionamento, il Consiglio Federale ha approvato i prodotti del Sistema mediante delibere e raccomandazioni;
- CONSIDERATO** che, all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, è emersa la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia delle attività di diffusione delle informazioni ambientali;
- VISTA** l'approvazione del Piano triennale delle attività interagenziali 2014-2016 nella seduta del Consiglio Federale del 30 giugno 2014, di cui fa parte l'Area 1 "*Formazione del dato*" coordinata da ISPRA e da ARPA Piemonte, comprendente l'attività del GdL5 "*Ricognizione dei metodi analitici che utilizzano reagenti ozono alteranti e/o cancerogeni*" coordinato da ISPRA;
- RITENUTO** necessario nonché opportuno portare a compimento le attività del programma triennale 2014-2016 del Consiglio Federale fino a tutto il 2017, nelle more della definizione del nuovo Programma

Triennale da predisporre ai sensi dell'art. 10 della L. 132/16 "individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale";

VISTO

il documento "*Rapporto delle attività del GdL 5 Area 1 Formazione del dato (SNPA, PT 2014-2016) per la possibile sostituzione dei metodi analitici che utilizzano reagenti ozonolesivi e/o cancerogeni nei laboratori ARPA/APPA, valutando le alternative maggiormente compatibili dal punto di vista ambientale e della salute umana*", allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante, approvato dal Comitato Tecnico Permanente per via telematica;

RITENUTO

di adottare il documento come proposto dal predetto Gruppo di lavoro e approvato dal Comitato Tecnico Permanente per via telematica;

VISTO


l'art. 8 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio, la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

DELIBERA

1. Di approvare il documento "*Valutazione delle alternative maggiormente compatibili dal punto di vista ambientale e della salute umana ai fini della sostituzione delle sostanze ozono lesive e/o cancerogene in uso nei laboratori analitici per le procedure di prove e misura* ", che è parte integrante della presente delibera.
1. La presente delibera con i relativi allegati, ai sensi dell'art. 8 del predetto Regolamento di funzionamento è pubblicata sul sito internet di ISPRA e di ciascuna Agenzia.

Roma, 14/11/17

Il Presidente
Dott. Stefano Laporta

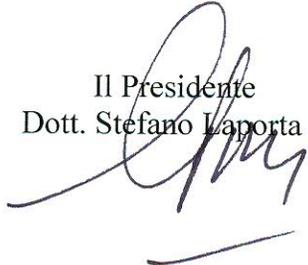

**VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE
MAGGIORMENTE COMPATIBILI DAL PUNTO DI
VISTA AMBIENTALE E DELLA SALUTE UMANA
AI FINI DELLA SOSTITUZIONE DELLE
SOSTANZE OZONO LESIVE E/O
CANCEROGENE IN USO NEI LABORATORI
ANALITICI PER LE PROCEDURE DI PROVE E
MISURA**

Informazioni legali

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), le Agenzie Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (APPA) e le persone che agiscono per loro conto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo rapporto.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma
www.isprambiente.gov.it

ISPRA, Rapporti **/20**
ISBN *****

Riproduzione autorizzata citando la fonte

Elaborazione grafica

ISPRA

Grafica di copertina: *****
Foto di copertina: *****

Se on line (solo questo):

Coordinamento editoriale:

Daria Mazzella

ISPRA – Settore Editoria

Amministrazione:

Olimpia Girolamo

ISPRA – Settore Editoria

Distribuzione:

Michelina Porcarelli

ISPRA – Settore Editoria

(inserire data)

Times New Roman 11 pt, grassetto

Autori

Elisa Calabretta (ISPRA)

Riccardo Costa Laia (ARPA Piemonte)

Cristina Zonato (ARPA Piemonte)

Carla Gramellini (ARPA Emilia Romagna)

Eugenia Peirone (ARPA Umbria)

Guido Spinelli (ARPA Toscana)

Antonio Limberti (ARPA Toscana)

Antonella Angelosante (MATTM- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

INDICE

1.	INTRODUZIONE	5
1.1	Il Sistema Nazionale per la Protezione dell' Ambiente (SNPA)	5
1.2	Obiettivi del GdL Area 1- Prodotto 5	6
2.	GRUPPO DI LAVORO PRODOTTO N. 5.....	7
2.1	Quadro normativo	7
2.1.1	<i>Ozono lesivi e cancerogeni</i>	13
2.1.2	<i>Ozono lesivi: dal Protocollo di Montreal alla normativa nazionale</i>	15
2.2	Materiali e metodi	18
2.2.1	<i>Ricognizione dell' utilizzo di sostanze pericolose (H350, H351 e H420) presso i laboratori ARPA/APPA: Questionario</i>	18
2.2.2	<i>Lavoro di omogeneizzazione e verifica del database in riferimento al quadro normativo vigente</i>	19
2.2.3	<i>Valutazione di sostanze o metodi alternativi per eliminare o rendere maggiormente compatibile dal punto di vista ambientale l' uso di composti H350, H351 e/o H420</i>	21
3.	RISULTATI.....	23
3.1	Analisi del database	23
3.1.1	<i>Solventi</i>	24
3.1.2	<i>Reagenti</i>	25
3.1.3	<i>Soluzioni di riferimento/standard certificati</i>	25
3.2	Approfondimenti di procedure di misura che prevedono l' utilizzo di sostanze pericolose .	29
3.2.1	<i>Procedura di misurazione degli idrocarburi nelle matrici solide e acquose</i>	29
3.2.2	<i>Procedura di misurazione della Richiesta Chimica di Ossigeno (COD)</i>	33
3.2.3	<i>Questione formaldeide</i>	35
3.2.4	<i>Tensioattivi anionici</i>	39
3.3	Riduzione del rischio con l' utilizzo di corretti dispositivi collettivi.....	42
3.3.1	<i>La Normativa</i>	42
3.3.2	<i>Verifica di efficienza di una cappa chimica</i>	43
4.	ALLEGATI.....	45
4.1	Allegato A- POD del GdL Area 1 Prodotto 5	45
4.2	Allegato B- Database	48
4.3	Allegato C- Esempio di procedura di conferma metrologica di Materiali di Riferimento liquidi	49
4.4	Allegato D- Sostanze di nicchia.....	51
4.4.1	<i>Fucsina Basica</i>	51
4.4.2	<i>Arsenito di Sodio</i>	53
4.4.3	<i>Idrossilammia Cloridrato</i>	55
4.4.4	<i>Cloramfenicolo</i>	57
4.4.5	<i>Fenolftaleina</i>	58
4.4.6	<i>Furfurolo</i>	59
4.4.7	<i>Cromato di Sodio</i>	61
4.4.8	<i>Cloruro di Berillio</i>	63
4.4.9	<i>1,2-dicloroetano</i>	64
4.4.10	<i>Benzene</i>	66
4.4.11	<i>Formazina</i>	68
4.4.12	<i>Terre di diatomee</i>	70
4.5	Allegato E- Progetto formalina free.....	71
4.6	Allegato F- Schema metodi approfonditi per la determinazione dei tensioattivi.....	73

1. INTRODUZIONE

1.1 Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA)

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) è un sistema a rete costituito dal Sistema delle Agenzie Ambientali (ARPA/APPA) e da ISPRA. È un esempio di sistema federativo consolidato, che coniuga conoscenza diretta del territorio e dei problemi ambientali locali con le politiche nazionali di prevenzione e protezione dell'ambiente, così da diventare punto di riferimento, tanto istituzionale quanto tecnico-scientifico, per l'intero Paese.

I due Programmi Triennale (PT) dell'SNPA, cioè del triennio 2010-2012 e quello attuale 2014-2016, sono stati definiti con il fine di garantire una crescita organica ed armonizzata del sistema agenziale italiano rispondendo alle esigenze di omogeneizzazione determinate dalla rapida evoluzione di normative ed esigenze in campo ambientale. Il PT 2014-2016 che prosegue le finalità di quello precedente ha inteso anche risolvere le criticità emerse durante la fase di attuazione del primo Programma (vedi lo scarso coinvolgimento e/o partecipazione del MATTM e la mancata diffusione di tutti i prodotti tra gli operatori del Sistema stesso)

In particolare il secondo PT 2014-2016 è stato articolato in macro aree definite in base alla tipologia e finalità attese dei prodotti elaborati, ognuna di tali macroaree è stata poi suddivisa in aree tematiche, tecniche ed operative, secondo lo schema seguente (Tabella 1.1):

MACROAREA	OBIETTIVI	AREE TEMATICHE
MACROAREA A	<i>"Regolamentazione e uniformazione"</i> (attività orientate alla regolamentazione ed uniformazione delle modalità operative del sistema)	<i>Area 1) Formazione del dato</i>
		<i>Area 2) Monitoraggi</i>
		<i>Area 3) Controlli</i>
		<i>Area 4) Valutazioni</i>
MACROAREA B	<i>"Reporting"</i> (realizzazione e coordinamento dei prodotti sistematicamente impiegati per la diffusione delle informazioni relative allo stato dell'ambiente)	<i>Area 5) Strumenti di reporting (standard metodologici, sistemi di indicatori condivisi, linee guida)</i>
		<i>Area 6) Produzione di report (produzione e progettazione)</i>
MACROAREA C	<i>"Sviluppo, consolidamento del sistema, innovazione"</i> (azioni di sistema che possano migliorare la qualità dei servizi erogati dal sistema agenziale e consolidare l'identità del SNPA)	<i>Area 7) Attività integrate di tipo tecnico</i>
		<i>Area 8) Attività integrate di tipo strategico</i>

Tabella 1.1 – Schema di articolazione del Piano Triennale 2014-2016 dell'SNPA

Le macro aree individuate hanno l'obiettivo unico di ordinare concettualmente i gruppi di lavoro chiamati ad operare.

La Macroarea A "Regolamentazione ed uniformazione" in linea e continuità con l'obiettivo prevalente del primo Piano Triennale ha come scopo quello di rendere sempre più omogenea l'attività del SNPA e cogenti e le modalità operative condivise nel suo ambito.

Nello specifico, per l'Area 1 "Formazione del dato", è stata individuata la necessità per il SNPA:

- di operare al fine di armonizzare i metodi analitici e le rilevazioni in campo per l'applicazione della direttiva 2000/60/CE [1];
- approfondire i metodi biologici dedicati alla valutazione degli impatti specifici e le misurazioni in campo di parametri su matrici acquose, nell'ottica di standardizzare le

metodiche e definirne il perimetro di applicazione, allo scopo di ottimizzare le risorse umane ed economiche e rendere più semplice e veloci possibili le attività;

- lavorare all'armonizzazione dei metodi analitici per l'applicazione della direttiva 2008/50/CE [2], in quanto le norme impongono nuove procedure nell'ambito del monitoraggio della qualità dell'aria ambiente, così come individuate dal D.Lgs. n. 155/2010 [3]. SNPA - PT 2014-2016 – approvato nella riunione del Consiglio Federale del 30/6/2014;
- approfondire la possibile sostituzione dei metodi analitici che utilizzano reagenti ozonolesivi e/o cancerogeni, valutando le alternative maggiormente compatibili dal punto di vista ambientale (GdL Prodotto 5).

Il Gruppo di Lavoro Prodotto 5 “Ricognizione dei metodi analitici che utilizzano reagenti ozono alteranti e/o cancerogeni” risponde appunto all'esigenza di valutare procedure di misura nelle quali vengano utilizzate sostanze più compatibili per il rispetto dell'ambiente e della salute umana.

1.2 Obiettivi del GdL Area 1- Prodotto 5

Il GdL Area 1- Prodotto 5 “Ricognizione dei metodi analitici che utilizzano reagenti ozono alteranti e/o cancerogeni”, si è posto l'obiettivo di effettuare una ricognizione dei metodi analitici in uso nel Sistema Agenziale che prevedessero l'uso di sostanze cancerogene e ozono lesive, con l'individuazione di possibili metodiche alternative, rispetto a quelle già utilizzate, nelle quali l'utilizzo di tali sostanze, classificate rispettivamente H350 o H351 e H420 secondo il Regolamento CE 1272/2008 e sue modifiche [4], è eliminato o ridotto in misura notevole.

Il P.O.D. (v. Allegato A), cioè il Piano Operativo di Dettaglio, per le attività tecnico scientifiche di sistema del GdL Prodotto 5- Area 1 ha stabilito le principali fasi del progetto, le tempistiche ed il prodotto atteso.

Le fasi del progetto sono state:

1. individuazione dei reagenti ozono alteranti e/o cancerogeni utilizzati nei metodi di misura in uso presso i laboratori ARPA/APPA;
2. verifica dello stato dell'arte, confronto a livello nazionale ed eventuale ricerca bibliografica;
3. individuazione e proposta di metodiche alternative non utilizzanti reagenti ozono alteranti e/o cancerogeni;
4. stesura rapporto.

Il prodotto atteso è appunto la stesura di un rapporto a resoconto delle attività svolte e degli obiettivi effettivamente raggiunti in termini anche di linee guida per gli operatori dei laboratori nell'acquisizione di sostanze pericolose e nella scelta di metodi dal punto di vista della protezione della salute umana e dell'ambiente più compatibili. I destinatari di tale prodotto sono il sistema SNPA, il MATTM e i laboratori privati.

Nella tabella che segue (Tabella 1.2) sono riportati i Componenti ed il Coordinatore del Gruppo di Lavoro.

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO	Carla Gramellini	cgramellini@arpae.it
	Antonio Limberti	ARPA Toscana (fino a Dicembre 2015)
	Guido Spinelli	guido.spinelli@arpat.toscana.it (da Gennaio 2016)
	Eugenia Peirone	e.peirone@arpa.umbria.it
	Cristina Zonato	cristina.zonato@arpa.piemonte.it
	Riccardo Costa Laia	riccardo.costalaia@arpa.piemonte.it
COORDINATORE	Elisa Calabretta	elisa.calabretta@isprambiente.it

Tabella 1.2 – Componenti e Coordinatore del GdL

2. GRUPPO DI LAVORO PRODOTTO N. 5

2.1 Quadro normativo

Il Gruppo di Lavoro ha stabilito nel POD delle proprie attività di fare riferimento principalmente alla normativa riportata in tabella seguente (Tabella n. 2.1), ma sulla base delle problematiche incontrate durante il lavoro si è fatto riferimento anche al REACH e sue modifiche [5], dall'acronimo "Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals") soprattutto relativamente alla struttura di una scheda di sicurezza.

NORMA	Titolo
REGOLAMENTO CE 1272/2008 del 16 Dicembre 2008	relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che, adottando i criteri del GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), sostituisce le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.
Regolamento (CE) N.1005/2009	Regolamento (CE) N.1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Regolamento Commissione Ue 291/2011	Regolamento sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idrofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio
DECRETO LEGISLATIVO 13 Settembre 2013, n. 108	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Tabella 2.1 – *Normativa di riferimento*

Il **Regolamento REACH**, costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici, prevede:

- la valutazione dei test proposti dalle imprese per le sostanze prodotte o importate nella U.E. in quantità superiori a 100 tonnellate per anno
- la valutazione da parte degli Stati membri di alcune sostanze considerate prioritarie
- la predisposizione da parte dell'industria di una "relazione sulla sicurezza chimica" per ciascuna sostanza prodotta o importata in quantità superiori a 10 tonnellate per anno
- l'autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze "estremamente preoccupanti", come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) e gli "interferenti endocrini"
- l'adozione di restrizioni di portata generale per alcune categorie di sostanze, allo scopo di tutelare la salute umana e proteggere l'ambiente
- l'abrogazione di numerose norme in vigore allo scopo di semplificare il quadro normativo in materia di sostanze chimiche
- l'accesso del pubblico alle informazioni sulle proprietà tossicologiche e ambientali delle sostanze chimiche
- un'attività di informazione e assistenza tecnica alle imprese (help-desk nazionali)
- l'effettuazione di attività di controllo e vigilanza da parte degli Stati membri per garantire il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento.

Conformemente a quanto stabilito dal REACH tutte le sostanze chimiche prodotte e distribuite in Europa in quantità superiore a 1 Tonnellata/Anno sono soggette a registrazione, comprese quelle cancerogene o lesive per lo strato di ozono, dando l'onere della valutazione dei rischi delle sostanze chimiche alle ditte produttrici o distributrici, incombenza che precedentemente ricadeva sulle autorità nazionali.

L'articolo 75 del Regolamento ha istituito l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA). L'Agenzia svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal REACH e

organizza una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti dall'industria attraverso la registrazione delle sostanze. In Italia, il Ministero della Salute assicura, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed altre amministrazioni centrali la partecipazione di rappresentanti ed esperti nazionali alle attività dell'Agenzia e della Commissione Europea.

I dossier di registrazione inviati all'ECHA riguardano appunto la valutazione e le indicazioni relative alle restrizioni ed autorizzazioni per le sostanze che presentino livelli di rischio inaccettabile con l'obiettivo di sostituire quelle particolarmente pericolose.

Ai sensi dell'articolo 76(1)(f) del medesimo regolamento è stato inoltre creato il Forum ECHA per lo scambio di informazioni sull'applicazione, tale Forum coordina una rete di autorità degli Stati membri preposte all'applicazione del REACH.

Tra i compiti del Forum dell'ECHA, elencati nell'articolo 77(4) del Regolamento sono da evidenziare il coordinamento di progetti di applicazione armonizzati e la definizione di strategie e di buone pratiche in materia di applicazione.

Ogni singolo Stato membro adotta misure nazionali nel rispetto delle indicazioni e dei criteri forniti dal Forum dell'ECHA.

A seguito di quanto stabilito dall'Accordo Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 ottobre 2009 il Gruppo tecnico di esperti del coordinamento interregionale della prevenzione per l'attuazione del regolamento REACH ed il rappresentante nazionale al Forum dell'ECHA hanno proposto al Comitato Tecnico di Coordinamento per l'adozione da parte dell'Autorità Competente REACH, il "Piano nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n.1272/2008 (CLP) - Anno 2016", relativo alle attività di controllo ufficiale nel rispetto della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).

L'Allegato II del Regolamento REACH è costituito dalla "Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza", tale allegato definisce le prescrizioni relative alla scheda di dati di sicurezza fornita per una sostanza o un preparato a norma dell'articolo 31 del Regolamento.

Le **schede di sicurezza** (SDS) rappresentano un metodo efficace per fornire informazioni su sostanze o miscele. Esse, infatti, costituiscono un importante elemento di comunicazione del pericolo ed un adeguato meccanismo di trasferimento delle informazioni sulla sicurezza delle sostanze.

Le SDS devono consentire all'utilizzatore finale di adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione inerenti la salute umana, la sicurezza dei luoghi di lavoro, e la tutela dell'ambiente. In particolare la scheda di sicurezza deve permettere ai datori di lavoro di determinare se, all'interno del luogo di lavoro, siano presenti agenti chimici pericolosi e di effettuare la relativa valutazione del rischio derivante dal loro utilizzo.

Le schede sono composte da 16 Sezioni, ognuna delle quali è riferita ad uno specifico campo di interesse relativo alla sostanza o miscela in esame.

- **Sezione 1** "Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa" oltre all'identificazione del prodotto, contiene una breve descrizione dell'uso a cui è destinata la sostanza e un elenco, non esaustivo, degli utilizzi sconsigliati. All'interno di questa sezione è identificato il fornitore e sono specificati i numeri di telefono in caso di emergenza.
- **Sezione 2** "Identificazione dei pericoli" descrive i pericoli connessi alla sostanza in esame e fornisce le avvertenze appropriate in relazione ai suddetti pericoli. In particolare, in questa sezione viene indicata la classificazione della sostanza /miscela secondo quanto previsto dal CLP (Regolamento CE 1272/2008), le indicazioni di pericolo e le frasi R, qualora le stesse non fossero riportate per esteso sarà possibile fare riferimento alla Sezione 16.
- **Sezione 3** "Composizione/informazione sugli ingredienti" descrive l'identità chimica degli ingredienti della sostanza o miscela, comprese le impurezze e gli stabilizzanti. Per le miscele è indicata la concentrazione delle sostanze presenti in percentuale di peso o volume. Inoltre nelle miscele vengono indicate le sostanze che presentano pericoli per la salute o per l'ambiente, i valori soglia ed i relativi limiti d'esposizione sul luogo di lavoro per le sostanze pericolose, le sostanze persistenti, le sostanze che presentano bioaccumulabili e tossiche e le sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione, se la loro concentrazione è pari o superiore a 0.1%.
- **Sezione 4** "Misure di primo soccorso" descrive le manovre di primo soccorso che devono essere prestate in caso di un evento avverso, specificando la via di esposizione e la relativa procedura da seguire. In particolare fornisce indicazioni sulla necessità di consultare il medico, sui possibili effetti ritardati successivi all'esposizione, sull'opportunità di spostare l'individuo dal luogo di

esposizione all'aria aperte, sull'opportunità di togliere gli indumenti contaminati e sulla procedura da seguire per il trattamento degli stessi e sull'opportunità, per chi presta soccorso, di indossare particolari DPI. Sono fornite indicazioni sintetiche sui principali sintomi ed effetti derivanti dall'esposizione, informazioni circa la necessità di consultare un medico o relative a particolari trattamenti da effettuare in seguito all'esposizione (compresi test clinici o monitoraggi medici per gli effetti ritardati).

- **Sezione 5** “Misure antincendio” in questa sezione sono elencate le prescrizioni per combattere gli incendi causati dalla sostanza o miscela in esame o che si sono sviluppati in prossimità della stessa. Sono fornite indicazioni sugli idonei mezzi di estinzione, sulle situazioni in cui un mezzo di estinzione può risultare non idoneo e su quali di questi sistemi siano inefficaci relativamente alla sostanza/miscela in esame. Sono inoltre dichiarati i pericoli connessi alla sostanza/miscela derivanti dalla sua combustione, come ad es. i prodotti di combustione pericolosi della stessa. Sono fornite le raccomandazioni su eventuali misure di protezione necessarie durante l'estinzione dell'incendio.
- **Sezione 6** “Misure in caso di rilascio accidentale” sono descritte le azioni da compiere in caso di fuoriuscita, dispersione o rilascio, per prevenire o ridurre gli effetti avversi per le persone, i beni e l'ambiente. Le prescrizioni sono suddivise in due categorie: per chi non interviene direttamente e per chi interviene direttamente nell'emergenza. Sono inoltre fornite raccomandazioni sulle eventuali precauzioni ambientali da rispettare e i metodi ed i materiali idonei al contenimento e alla bonifica.
- **Sezione 7** “Manipolazione e immagazzinamento” sono fornite raccomandazioni sulle pratiche di manipolazione sicure. In particolare sono descritte le raccomandazioni che consentono di manipolare la sostanza/ miscela in modo sicuro, per prevenire la manipolazioni di sostanze/miscele incompatibili, per ridurre il rilascio della sostanza/miscela nell'ambiente, e sull'igiene personale da adottare. Sono espone inoltre raccomandazioni sullo stoccaggio relativamente alle atmosfere esplosive, condizioni di corrosione, pericoli di infiammabilità, condizioni di evaporazione, potenziali fonti di accensione, limiti quantitativi di stoccaggio, progettazione e ventilazione dei locali. Viene specificato come mitigare o contenere gli effetti delle condizioni ambientali ove la sostanza/miscela è stoccata o manipolata.
- **Sezione 8** “Controllo dell'esposizione/ protezione individuale ” elenca i valori limite di esposizione professionale e le relative misure di gestione del rischio. Sono inoltre fornite informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate. Sono inoltre evidenziate le misure di protezione individuale, quali i DPI specifici per protezione degli occhi/volto, della pelle, delle vie respiratorie, i pericoli termici, ove necessari, e le informazioni relative ai controlli dell'esposizione ambientale alla sostanza.
- **Sezione 9** “Proprietà fisiche e chimiche ” questa sezione riporta le principali proprietà fisiche e chimiche della sostanza in esame quali ad es. aspetto, odore, soglia olfattiva, pH, punto di fusione.
- **Sezione 10** “Stabilità e reattività ” sono indicate la reattività chimica ed i pericoli connessi alla sostanza/miscela, se essa è instabile in condizioni normali o alle condizioni di stoccaggio ed utilizzo, se sono possibili reazioni pericolose o sono note condizioni di utilizzo da evitare o materiali incompatibili con essa e se sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.
- **Sezione 11** “Informazioni sugli effetti tossici ” in questa sezione sono riportati i principali effetti tossici correlati alle sostanze o alle miscele. Per le sostanze devono essere descritte: la tossicità acuta, la corrosione/irritazione cutanea, le lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi, la sensibilizzazione respiratoria o cutanea, la mutagenicità delle cellule germinali, la cancerogenicità, la tossicità per la riproduzione, la tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola/ ripetuta, il pericolo in caso di aspirazione. Per le miscele devono essere descritte: la tossicità acuta, la corrosione, l'irritazione, la sensibilizzazione, la tossicità a dose ripetuta, la cancerogenicità, la mutagenicità, la tossicità riproduttiva. Sono fornite informazioni sulle vie probabili di esposizione e sugli effetti per ciascuna via di esposizione. Sono descritti i potenziali effetti avversi per la salute, suddivisi per via di esposizione, e i relativi sintomi, indicando gli eventuali effetti ritardati o immediati relativi sia all'esposizione a breve che a lungo termine. Sono inoltre evidenziati gli effetti acuti e cronici connessi all'esposizione umana.
- **Sezione 12** “Informazioni ecologiche ” sono contenute indicazioni per valutare l'impatto ambientale della sostanza in esame qualora fosse rilasciata nell'ambiente. Sono evidenziate informazioni sul bioaccumulo, sulla persistenza, sulla degradabilità e sui prodotti pericolosi che si possono formare dalla degradazione della sostanza, è inoltre descritto il potenziale della

sostanza definito come mobilità nel suolo che consente alla sostanza/miscela in esame di migrare nel suddetto elemento.

- Sezione 13 “Considerazioni sullo smaltimento ” contiene informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti al fine di ridurre il più possibile il rischio di danno ambientale, in particolare sono specificati i metodi di trattamento dei rifiuti da utilizzare per lo smaltimento della sostanza/miscela stessa e dei suoi imballaggi.
- Sezione 14 “Informazioni sul trasporto ” contiene informazioni di base per il trasporto e la spedizione delle sostanze su strada, ferrovia, vie navigabili o aeree. Nello specifico sono indicati: numero ONU, nome di spedizione dell’ONU, classi di pericolo connesso al trasporto, gruppo di imballaggio, pericoli per l’ambiente, precauzioni speciali per gli utilizzatori, trasposto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC.
- Sezione 15 “Informazioni sulla regolamentazione” reca le altre informazioni sulla regolamentazione della sostanza/miscela che non sono già state descritte negli altri punti della scheda di sicurezza ed in particolare norme e legislazione a livello europeo su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza/miscela e la valutazione della sicurezza chimica.
- Sezione 16 “Altre informazioni ” sono descritte le informazioni per la compilazione della scheda di sicurezza ed altre informazioni non presenti nei punti compresi tra l’1 e il 15. In questa sezione sono fornite indicazioni relative alla revisione della scheda di sicurezza con una dettagliata descrizione di dove sono state apportate le modifiche rispetto alla scheda precedente. Sono inoltre presenti all’interno di questa sezione le spiegazioni relative ad abbreviazioni o acronimi, i riferimenti bibliografici, l’elenco delle frasi R e i consigli di prudenza (frasi S).

La scheda di sicurezza quindi come documento di accompagnamento di una sostanza chimica o miscela risulta di elevata importanza perché definisce i reali pericoli che l’operatore può subire (salute umana) o provocare all’ambiente. Questo significa che all’approvvigionamento di una sostanza chimica o miscela deve corrispondere una piena consapevolezza ed informazione da parte dell’utilizzatore su quello che si appresta ad utilizzare con una lettura attenta ed approfondita di questo documento. A questo proposito si evidenzia che, nel caso in cui la miscelazione comporti la formazione, a seguito di reazione chimica, di sostanze diverse da quelle di partenza, la SDS deve riportare le informazioni relative ai prodotti finali, ai sensi del Reg. CLP art. 6 par. 1 che, a proposito dell’identificazione dei pericoli fisici, per la salute o per l’ambiente che una miscela può comportare, riporta *“Le informazioni si riferiscono alla miscela nelle forme o negli stati fisici in cui è immessa sul mercato e, se del caso, in cui si può ragionevolmente prevedere che sarà utilizzata.”*

Si fa presente inoltre che l’utilizzatore ha l’obbligo di segnalare al proprio fornitore eventuali non conformità delle SDS, con particolare riferimento alle informazioni sui pericoli (come evidenziato dal link che segue <https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/downstream-users/about-downstream-users/downstream-user-roles-and-obligations>). Infatti poiché il REACH ed il CLP sono applicati solo agli stati membri dell’Unione Europea è possibile che uno stato extra-EU abbia regole diverse nella compilazione della scheda di sicurezza. In questo caso **l’importatore/fornitore** ha l’obbligo e la responsabilità di verificare che la documentazione del produttore sia conforme al REACH e al CLP; in caso contrario la deve uniformare alle regole europee. Nel caso in cui il fornitore non si assuma le proprie responsabilità o non dia evidenza di aver preso in carico la segnalazione proponendo una risoluzione adeguata (redazione di una SDS propria con tutti gli oneri conseguenti di eventuale registrazione/notifica; ovvero cambio del produttore, o altra azione che garantisca una corretta informazione sulle SDS dei prodotti al momento venduti), è obbligo dell’utilizzatore segnalare (ovvero denunciare) la violazione (che può ricadere nel REACH o CLP) all’Autorità competente, rappresentata dai Dipartimenti di Sanità Pubblica della propria ASL. Esiste infatti una rete di Referenti Reach e CLP (scaricabile al seguente link: <http://www.reach.gov.it/elenco-delle-autorit%C3%A0-competenti-regionali-lattuazione-dei-regolamenti-reach-e-clp>) alla quale ciascun/a operatore/figura di un’ARPA/APPA può rivolgersi per semplici richieste di informazioni o per effettuare delle segnalazioni denunce.

Per una corretta gestione degli obblighi previsti è necessario che l’utilizzatore, in presenza di una scheda di sicurezza non conforme alla normativa vigente, segnali il problema in primis al proprio RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione), fermo restando comunque che la segnalazione al referente Reach e CLP è a carico del Dirigente/Datore di Lavoro).

Qualora l’utilizzatore non effettui la segnalazione, lui stesso è soggetto a sanzione (come da link che segue: <http://www.amblav.it/download/Sanzioni-CLP-REACH-SDS-DLgs-186-133.pdf>). Nel caso specifico in cui l’errore comporti l’omissione della classe di pericolo "cancerogeno", si rientra oltretutto negli obblighi dei datori di lavoro ai sensi del DL. 81/2008, con conseguenti sanzioni anche economiche, se poi l’errore sulla scheda di sicurezza riguarda una sostanza presente nell’elenco delle

sostanze estremamente preoccupanti (Annex XIV) cioè soggetta ad autorizzazione si rientra in obblighi giuridici per le aziende che fabbricano, importano o utilizzano queste sostanze come tali, in preparati o in articoli. (<https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list>).

Il Regolamento CLP dall'acronimo "Classification, Labelling and Packaging" garantisce che i rischi presentati dalle sostanze chimiche siano chiaramente comunicati ai lavoratori e ai consumatori nell'Unione Europea attraverso la classificazione e l'etichettatura delle stesse.

I fornitori sono tenuti a etichettare una sostanza o miscela ai sensi del regolamento CLP prima di immetterla sul mercato quando:

1. una sostanza è classificata come pericolosa;
2. una miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose al di sopra di una determinata soglia.

In particolare il Regolamento definisce nel dettaglio per le sostanze chimiche e le miscele il contenuto dell'etichetta e l'organizzazione dei vari elementi di etichettatura secondo il sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU). L'etichetta include:

- nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore;
- quantità nominale di una sostanza o miscela contenuta nell'imballaggio messo a disposizione del pubblico, salvo che tale quantità sia specificata altrove sull'imballaggio;
- identificatori del prodotto;
- pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza e informazioni supplementari previste da altre normative.

Una sostanza o miscela con questi pittogrammi può indicare uno o più dei seguenti effetti nocivi:	
	<ul style="list-style-type: none"> • È cancerogena • Nuoce alla fertilità e al feto • Causa mutazioni • È un sensibilizzante delle vie respiratorie e può causare allergia, asma o difficoltà respiratorie se inalato • È tossica per determinati organi • Comporta pericoli da aspirazione: può essere dannosa o anche letale se ingerita o introdotta all'interno delle vie respiratorie
	In questo caso si ha a che fare con una sostanza chimica che ha una tossicità acuta a contatto con la pelle, se inalata o ingerita, e che può anche essere letale.
	Ogni volta che si usa una sostanza chimica con questo pittogramma, bisogna fare attenzione perché la sostanza è corrosiva e può causare gravi ustioni alla pelle e danni agli occhi. Il simbolo può indicare anche un'azione corrosiva sui metalli.
	Questo pittogramma indica una sostanza con una o più delle seguenti proprietà: <ul style="list-style-type: none"> • È nociva • Causa sensibilizzazione cutanea e irritazioni a pelle e occhi • Irrita le vie respiratorie • Ha effetti narcotici, provoca sonnolenza o vertigini • È pericolosa per l'ozono
	Questo pittogramma segnala una sostanza pericolosa per l'ambiente e tossica per gli organismi acquatici.

Tabella 2.2 – Esempi di pittogrammi

Alcune situazioni rendono necessaria l'armonizzazione della classificazione di una sostanza a livello europeo per garantire un'adeguata gestione dei rischi, tra queste le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione.

Da evidenziare che per le modifiche introdotte dal CLP per le etichettature delle sostanze e miscele non si usano più le frasi di rischio, né i consigli di prudenza, ma sono inserite le indicazioni di pericolo con codici di pericolo specifici per ciascuna classificazione come riportate nelle tabelle dell'allegato I, parti da 2 a 5 del Regolamento (serie di cifre precedute dalla lettera H) e i consigli di prudenza pertinenti formulati conformemente all'allegato IV, parte 2 (serie di cifre precedute dalla lettera P, per la Prevenzione o Reazione o Conservazione o Smaltimento definiti nell'Allegato IV). Si ricorda che le frasi di rischio erano rappresentate da una serie di cifre precedute dalla lettera R che indica la natura dei rischi particolari di cui all'allegato III della direttiva 67/548/CEE [6] e che i consigli di prudenza erano rappresentati da una serie di cifre precedute dalla lettera S che indica le precauzioni di sicurezza raccomandate ai sensi dell'allegato IV della stessa direttiva.

Inoltre nel CLP sono stati introdotti nuovi pittogrammi a forma di rombo che indicano la natura dei pericoli associati all'uso di una sostanza o miscela pericolosa. Sulle etichette i pittogrammi sono accompagnati, oltre che dalle indicazioni di pericolo e consigli di prudenza già menzionati da avvertenze e informazioni sul prodotto e sul fornitore. La tabella seguente (Tabella 2.2) riporta alcuni dei nuovi pittogrammi.

La Tabella 2.3 riporta i codici di indicazione di pericolo (Frase H), pericoli per la salute. La Tabella 2.4 invece riassume i codici di indicazione di pericolo per l'ambiente.

Codici di indicazione di pericolo (Frase H) Pericoli per la salute	
H300	Letale se ingerito
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310	Letale a contatto con la pelle.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H312	Nocivo per contatto con la pelle
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica della pelle
H318	Provoca gravi lesioni oculari
H319	Provoca grave irritazione oculare
H330	Letale se inalato
H331	Tossico se inalato
H332	Nocivo se inalato
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini
H340	Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche .
H350	Può provocare il cancro .
H351	Sospettato di provocare il cancro .
H360	Può nuocere alla fertilità o al feto.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto .

H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H370	Provoca danni agli organi .
H371	Può provocare danni agli organi .
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Tabella 2.3– Codici di indicazione di pericolo (Frase H), pericoli per la salute

Codici di indicazione di pericolo (Frase H) Pericoli per l'ambiente	
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H401	Tossico per gli organismi acquatici.
H402	Nocivo per gli organismi acquatici
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H420	Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera.

Tabella 2.4 – Codici di indicazione di pericolo (Frase H), pericoli per l'ambiente

2.1.1 Ozono lesivi e cancerogeni

Nello specifico e conformemente a quanto stabilito dal Regolamento CE 1272/2008 si riportano di seguito le definizioni per sostanze cancerogene e sostanze pericolose per lo strato d'ozono (sostanze ozono lesive):

*È **cancerogena** una sostanza o una miscela di sostanze che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza...Ai fini della classificazione come cancerogene, le sostanze sono suddivise in due categorie secondo la forza probante dei dati e in base ad altre considerazioni. In alcuni casi è prevista una classificazione specifica in funzione della via di esposizione, qualora sia possibile comprovare in modo conclusivo che altre vie di esposizione non presentano il rischio.*

*Per **sostanza pericolosa per lo strato di ozono** s'intende una sostanza che, in base ai dati disponibili relativi alle sue proprietà e al suo destino e comportamento ambientali previsti o osservati, può presentare un pericolo per la struttura e/o la funzione dello strato di ozono della stratosfera. Rientrano in questa definizione le sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.*

In particolare per le sostanze cancerogene esistono due diverse categorie cioè, la categoria 1 e la categoria 2, come schematizzato nella tabella seguente (Tabella 2.5), per maggiori dettagli fare riferimento alla Tabella 3.6.1 dell'Allegato 1 del CLP.

Categorie di pericolo per le sostanze cancerogene

Categorie	Criteri
CATEGORIA 1:	Sostanze cancerogene per l'uomo accertate o presunte.
Categoria 1A:	Categoria 1A può avvenire ove ne siano noti effetti cancerogeni per l'uomo sulla base di studi sull'uomo,
Categoria 1B:	Categoria 1B per le sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l'uomo, prevalentemente sulla base di studi su animali.
CATEGORIA 2:	Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l'uomo

Tabella 2.5 – *Categorie di pericolo per le sostanze cancerogene*

La Tabella 2.6 riassume gli elementi dell'etichetta per la cancerogenicità mentre la Tabella 2.7 sintetizza gli elementi dell'etichetta per le sostanze ozono lesive.

Classificazione	Categoria 1 (Categorie 1A, 1B)	Categoria 2
Pittogrammi GHS		
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H350: Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	H351: Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
Consiglio di prudenza Prevenzione	P201 P202 P280	P201 P202 P280
Consiglio di prudenza Reazione	P308 + P313	P308 + P313
Consiglio di prudenza Conservazione	P405	P405
Consiglio di prudenza Smaltimento	P501	P501

Tabella 2.6 – *Elementi dell'etichetta per le sostanze cancerogene*

Ai fini della classificazione delle sostanze cancerogene è utile considerare anche la Lista dello IARC (List of Classifications – IARC Monograph <http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/>), che definisce 5 categorie (gruppi) di cancerogenicità, la cui corrispondenza con quelle del CLP è indicata nel “Documento di supporto alla Banca Dati ISS-INAIL” (marzo 2015) http://www.iss.it/binary/ampp/cont/Doc_supporto_banca_dati_ISS_INAIL_Marzo_2015_FINAL_PR.pdf

Pericoloso per lo strato di ozono-Elementi dell'etichetta	
Pittogrammi GHS	
Avvertenza	Attenzione
Indicazione di pericolo	H420: Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera
Consiglio di prudenza Prevenzione	P502

Tabella 2.7 – Elementi dell'etichetta per le sostanze ozono lesive

2.1.2 Ozono lesivi: dal Protocollo di Montreal alla normativa nazionale

Nel 1987, dopo che la comunità scientifica riconobbe la correlazione tra assottigliamento dello strato di ozono nella stratosfera (strato dell'atmosfera compreso tra 12 e 50 Km di altitudine) e clorofluorocarburi, nacque il "Protocollo di Montreal" in attuazione della Convenzione di Vienna (1985).

Il Protocollo di Montreal, unico trattato internazionale universalmente ratificato, stabilisce gli obiettivi e le misure per la riduzione delle produzioni e degli usi delle sostanze pericolose per la fascia di ozono stratosferico. Esso stabilisce infatti i termini di scadenza entro cui le Parti firmatarie si impegnano a contenere i livelli di produzione e di consumo delle sostanze ozono lesive (Clorofluorocarburi, Tetracloruro di carbonio, 1,1,1 tricloroetano, Halons, Idroclorofluorocarburi, Bromuro di metile), disciplina gli scambi commerciali, la comunicazione dei dati di monitoraggio, l'attività di ricerca, lo scambio di informazioni e l'assistenza tecnica con i Paesi in via di sviluppo (PVS).

In attuazione del Protocollo di Montreal, la Comunità Europea ha adottato, nel giugno del 1994, il Regolamento CEE 3093/94 [7] poi abrogato dal successivo Regolamento (CE) n. 2037/2000 per il controllo delle sostanze dannose per la fascia di ozono [8] prevedendo progressive tappe di riduzione fino alla definitiva cessazione delle produzioni e dei consumi delle sostanze ozono lesive (ODS), anticipando i termini previsti dal Protocollo di Montreal. Dal gennaio 2010 è in vigore il nuovo Regolamento (CE) n. 1005/2009 [9] sulle sostanze che riducono lo strato di ozono che abroga i precedenti regolamenti. Tale Regolamento è stato successivamente modificato dal Regolamento (UE) n. 744/2010 relativo agli usi critici di halon [10], dal Regolamento (UE) n. 291/2011 sugli usi essenziali delle sostanze controllate, diverse dagli idroclorofluorocarburi, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [11] e dal Regolamento (UE) n. 537/2011 sul meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi [12].

Il Regolamento (CE) n. 1005/2009 [9] si applica alle sostanze controllate, alle sostanze nuove e ai prodotti e alle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze. L'elenco di tutte le

“sostanze controllate“ e delle “sostanze nuove” è disponibile negli allegati I e II del Regolamento stesso. I “prodotti e le apparecchiature che dipendono da sostanze controllate” sono definiti come “*tutti i prodotti e le apparecchiature che non funzionano senza sostanze controllate, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione, il trattamento, il recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di sostanze controllate*”.

Il Regolamento stabilisce le norme in materia di:

- produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle ODS;
- di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, all’esportazione, all’immissione sul mercato e all’uso di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.

Il Regolamento prevede, tra le altre cose, alcune deroghe per la produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione sul sito della Commissione europea e rilascio di licenza, nel caso delle importazioni e della produzione. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2010 i contenitori contenenti ODS riportano un’etichetta sulla quale è indicato chiaramente che le sostanze in questione possono essere utilizzate solo per gli usi di laboratorio e a fini di analisi.

Per “uso a fini di analisi” si intende qualsiasi uso delle ODS volto all’identificazione di composti o alla determinazione delle proporzioni dei componenti in una miscela, ad esempio l’uso delle ODS come materiale di riferimento. Per “uso di laboratorio” si intende qualsiasi uso delle ODS in un laboratorio ma che sia diverso dall’uso a fini di analisi, ad esempio qualora le ODS vengano utilizzate come materia prima o in uno studio tossicologico ed infine, per “uso come materia prima in laboratorio” si intende l’utilizzo di ODS in laboratorio in un processo di trasformazione chimica mediante il quale la composizione d’origine della sostanza controllata è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili.

Al fine di determinare gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali la produzione e l’importazione di ODS possono essere consentite all’interno dell’Unione Europea, le rispettive quantità, il periodo di validità della deroga e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali, il 15 aprile 2011 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 291/2011 “*sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono*” [11].

L’utilizzo delle ODS ai fini sopra descritti è consentito soltanto se tale utilizzo è essenziale, cioè nei casi in cui non esiste un’alternativa tecnicamente ed economicamente praticabile o in cui l’alternativa risulta meno accettabile sia dal punto di vista ambientale che sanitario.

Non esiste un elenco esaustivo degli usi consentiti delle ODS, tuttavia, il Regolamento (UE) n. 291/2011 [11] prova a fornire un elenco di ciò che può essere considerato essenziale o meno (vedi **box** seguente).

I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

- a) l’uso di sostanze controllate come riferimento o standard
 - per calibrare apparecchiature che utilizzano sostanze controllate,
 - per monitorare livelli di emissione di sostanze controllate,
 - per determinare livelli residui di sostanze controllate in prodotti, vegetali e derrate;
- b) l’uso di sostanze controllate in studi tossicologici di laboratorio;
- c) usi di laboratorio, nei quali la sostanza controllata viene trasformata mediante una reazione chimica come le sostanze controllate utilizzate come materia prima;
- d) l’uso del bromuro di metile all’interno di un laboratorio per compararne l’efficacia rispetto alle sue alternative;
- e) l’uso di tetracloruro di carbonio come solvente per reazioni di bromurazione comprendenti N-bromosuccineimide;
- f) l’uso di tetracloruro di carbonio come agente trasferitore di catena in reazioni di polimerizzazione a radicale libero;

-
- g) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale non è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.

I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi non sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

- h) impiego nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria utilizzate nei laboratori, comprese le apparecchiature di laboratorio refrigerate come le ultracentrifughe;
- a) pulizia, rielaborazione, riparazione o ricostruzione di componenti o insiemi elettronici;
- b) conservazione di pubblicazioni e archivi;
- c) sterilizzazione di materiali in laboratorio;
- d) l'utilizzo negli istituti di istruzione primaria e secondaria;
- i) come componenti di kit per esperimenti di chimica a disposizione del grande pubblico e non destinati ad essere utilizzati in istituti di istruzione superiore;
- g) per fini di pulizia e essiccazione, inclusa la rimozione di grasso da articoli di vetro e altri prodotti;
- h) per determinare la presenza di idrocarburi, oli e grassi nell'acqua, nel terreno, nell'aria o nei rifiuti;
- i) prove riguardanti il catrame utilizzato in materiali per la pavimentazione di strade;
- j) rilevamento di impronte digitali a fini legali;
- k) prove riguardanti il materiale organico presente nel carbone;
- l) come solvente per determinare l'indice di cianocobalamina (vitamina B12) e bromo;
- j) in metodi che utilizzano la solubilità selettiva nella sostanza controllata, inclusa la determinazione di cascarosidi, estratti tiroidei e la formazione di picrati;
- k) per preconcentrare analiti in metodi cromatografici (ad esempio cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC), gas cromatografia (GC), cromatografia per assorbimento), spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS), spettrometria al plasma accoppiato induttivamente (ICP), analisi a fluorescenza a raggi X;
- n) per determinare l'indice di iodio in grassi e oli;
- l) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.

Il carattere essenziale o meno dell'uso deve essere valutato nell'analisi dei rischi generale che occorre effettuare prima di utilizzare sostanze pericolose (ad es. ai sensi della direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici sul luogo di lavoro [13]).

Tutte le ODS sono classificate come sostanze pericolose ai sensi della legislazione sulle sostanze chimiche. Esse non soltanto sono pericolose per l'ambiente, alcune comportano dei rischi anche per la salute umana. Poiché per la maggior parte degli usi sono disponibili delle alternative meno pericolose, in genere non è necessario ricorrere alle ODS.

Il fatto che una ODS sia prescritta da una norma tecnica o da uno standard di riferimento (ISO, EN, ASTM), non rende il suo utilizzo essenziale. Se l'utilizzo è considerato non essenziale in base a quanto affermato in precedenza, esso rimarrà vietato nonostante sia prescritto da una norma tecnica, infatti tali norme non hanno valore legale e non possono prevalere su un Regolamento.

Oltre alle restrizioni sull'utilizzo, le ODS per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi devono soddisfare determinate specifiche di purezza descritte nell'allegato V del Regolamento (CE) n. 1005/2009 (Tabella 2.8).

Sostanza	Requisito minimo di purezza
1,1,1-tricloroetano	99,0%
Tetracloruro di carbonio	99,5%
CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-113, CFC-114	99,5%
Altre ODS aventi un punto di ebollizione >20°C	99,5%
Altre ODS aventi un punto di ebollizione <20°C	99,0%

Tabella 2.8 – Specifiche di purezza per le ODS per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1005/2009, le imprese che intendono avvalersi dell'esenzione per gli usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi devono registrarsi nel "labODS registry" (http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods/index_en.htm) istituito e gestito dalla Commissione Europea.

Il contesto normativo europeo di riferimento sugli usi essenziali di laboratorio per le ODS, direttamente applicabile in tutti i suoi elementi in ogni Stato Membro dell'Unione Europea, è integrato dalle normativa nazionale ed in particolare dal Decreto Legislativo 13 settembre 2013, n. 108 e s.m.i. recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Il D. Lgs. n. 108/2013 [14], entrato in vigore il 12 ottobre 2013, individua infatti le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di:

- Produzione, immissione sul mercato, uso, importazione ed esportazione di sostanze controllate e sostanze nuove (articoli 3 e 15);
- immissione sul mercato di sostanze controllate in contenitori non riutilizzabili (articolo 4);
- immissione sul mercato, importazione ed esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate (articolo 5);
- produzione, immissione sul mercato e uso come materia prima o come agenti di fabbricazione di sostanze controllate (articoli 6 e 7);
- usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate (articolo 8);
- produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi ed immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi (articolo 9);
- trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale (articolo 10);
- immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate (articolo 11);
- scambi con Stati che non sono Parti del protocollo e con i territori non coperti dal protocollo (articolo 12);
- recupero e distruzione delle sostanze controllate usate (articolo 13);
- fughe ed emissioni di sostanze controllate (articolo 14);
- comunicazione dei dati (articolo 16).

2.2 Materiali e metodi

2.2.1 Ricognizione dell'utilizzo di sostanze pericolose (H350, H351 e H420) presso i laboratori ARPA/APPA: Questionario

L'attività svolta dal GdL è stata finalizzata ad effettuare valutazioni che portassero all'abbattimento dei rischi all'interno dei laboratori del Sistema Agenziale dove sono utilizzate sostanze pericolose per l'uomo e l'ambiente.

E' stato quindi deciso di formulare un questionario con la richiesta "**Nel laboratorio sono utilizzate sostanze cancerogene (H350, H351) e/o sostanze ozono lesive (ODS Ozone Depleting Substances H420)?**" per cui a risposta affermativa si chiedeva di compilare un file excel "Database GDL5".

Tale database ha permesso di fotografare la realtà dei laboratori ARPA/APPA rispetto all'utilizzo di metodi che comportano l'uso di sostanze cancerogene e/o ozono alteranti e alle eventuali metodiche alternative non basate sull'uso di sostanze chimiche classificate H350, H351 e H420 (vedi Tabella 3.1

dell'ALLEGATO VI del CLP Regolamento CE n.1272/2008 e Allegato I "Sostanze controllate" del Regolamento CE n.1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/9/2009).

Nota la tabella 3.1 dell'Allegato VI del CLP è in continuo aggiornamento e non è esaustivo di tutte le sostanze pericolose, perchè prevede solo quelle per cui la classificazione è armonizzata; pertanto il GdL nel successivo lavoro di verifica del database, ha consultato il sito dell'ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, <http://echa.europa.eu/it/web/guest/home>) ed il sito dello IARC (http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php).

Il questionario è stato inviato alla Rete dei Referenti per eventuali modifiche e/o implementazioni, e successivamente dal Coordinatore del GDL5, nella versione finale, alla Rete dei Referenti e per conoscenza ai Direttori Tecnici delle ARPA/APPa che non sono rappresentati nella Rete dei Referenti.

Le informazioni richieste nel Questionario sono le seguenti:

- a) **ARPA/APPa** di appartenenza,
- b) il **nome del referente** del laboratorio ed il numero di telefono,
- c) **nome della sostanza**, nel caso di una miscela/preparato è stato richiesto di inviare il certificato e la Scheda di Sicurezza,
- d) **n. CAS della sostanza**, nel caso di una miscela/preparato il n. CAS di ogni singola sostanza componente veniva evidenziato dal certificato richiesto (nel lavoro successivo di verifica del database per una stessa miscela/preparato sono state inserite più righe in un numero pari al numero di sostanze componenti cancerogene e/o ozono lesive),
- e) **classificazione secondo il Regolamento CE n.1272/2008**, è stato predisposto nel database un elenco a discesa che permetteva di selezionare l'indicazione di pericolo *H350- H351- H420*,
- f) **tipo di utilizzo** è stato predisposto nel database un elenco a discesa che permetteva di selezionare tra le voci: reagente- soluzione di riferimento/standard (sol di rif/ std)- solvente,
- g) **metodo** se Metodo Interno e/o Metodo Ufficiale a cui si fa riferimento (Normativa Tecnica, EPA, ASTM etc),
- h) **tecnica** la tecnica o le tecniche del metodo nella/e quale/i viene utilizzata la sostanza cancerogena e/o ODS,
- i) **matrice** è stato predisposto nel database un elenco a discesa che permetteva di selezionare tra le voci: *acque naturali, acque potabili, acque reflue, rifiuti, suolo, sedimenti, aria emissioni, aria immissioni, materiali, alimenti e altro*. Se la selezione era *altro* veniva richiesto di descrivere la tipologia di matrice nella colonna **Matrice (altro)**,
- j) **sostanza alternativa** è stato predisposto nel database un elenco a discesa che permetteva di selezionare tra le voci SI e NO, se SI veniva richiesto di indicare il **n. CAS della sostanza alternativa** nella colonna corrispondente, dando una breve descrizione di tale sostanza nella colonna **Descrizione sostanza alternativa** (ad esempio nome e risultati delle sperimentazioni di sostituzione) se NO veniva richiesto di indicare le motivazioni per cui non si utilizzavano sostanze alternative,
- k) qualsiasi eventuale osservazione da parte del laboratorio da inserire nella colonna **NOTE**.

2.2.2 Lavoro di omogeneizzazione e verifica del database in riferimento al quadro normativo vigente

Il Questionario (Database GDL5) compilato dalle ARPA/APPa è stato verificato e implementato da ogni singolo componente del gruppo, mediante una suddivisione delle righe a disposizione, che sono state modificate in base alle regole stabilite e condivise all'interno del GdL. Le diverse Agenzie sono state anche ricontattate in modo da contenere omogeneamente tutte le informazioni necessarie e richieste. Il database omogeneizzato e verificato è riportato nell'Allegato B del presente Rapporto.

Si è verificata la cancerogenicità e la pericolosità rispetto allo strato di ozono delle sostanze/miscele o preparati valutando le concentrazioni delle singole sostanze, sulla base di quanto stabilito nel Regolamento CE 1272/2008 versione consolidata di giugno 2015 nell'Allegato 1 nella Tabella 3.6.2 per le sostanze cancerogene e nella Tabella 5.1 per le sostanze ozono lesive e nell'Allegato VI nella Tabella 3.1.

La Tabella 2.9 del presente rapporto, riporta i limiti di concentrazione generici di componenti di una miscela classificati come cancerogene e che determinano la classificazione della miscela come stabilito nel Regolamento CLP nella Tabella 3.6.2 dell'Allegato I.

Componente classificato come:	Limiti di concentrazione generici che determinano la classificazione della miscela come:		
	Cancerogeno di categoria 1		Cancerogeno di categoria 2
	Categoria 1A	Categoria 1B	
Cancerogeno di categoria 1 A	≥ 0,1 %	-	-
Cancerogeno di categoria 1 B	-	≥ 0,1 %	-
Cancerogeno di categoria 2	-	-	≥ 1,0 % [Nota1]

Nota:

I limiti di concentrazione riportati nella tabella si riferiscono sia ai solidi e ai liquidi (unità peso/peso) sia ai gas (unità volume/volume).

Nota 1:

Se una sostanza cancerogena di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela deve essere disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.

Tabella 2.9 – Limiti di concentrazione generici di componenti di una miscela classificati come cancerogene e che determinano la classificazione della miscela

La Tabella 2.10 del presente rapporto, riporta i limiti di concentrazione generici per le sostanze (di una miscela) classificate come pericolose per lo strato di ozono (Categoria 1), che determinano la classificazione della miscela come pericolosa per lo strato di ozono (Categoria 1) come stabilito nel Regolamento CLP nella Tabella 5.1 dell'Allegato I.

Classificazione della sostanza	Classificazione della miscela
Pericolosa per lo strato di ozono (Categoria 1)	C ≥ 0,1 %

Tabella 2.10 – Limiti di concentrazione generici per le sostanze (di una miscela) classificate come pericolose per lo strato di ozono (Categoria 1), che determinano la classificazione della miscela come pericolosa per lo strato di ozono (Categoria 1)

La Tabella 3.1 dell'Allegato VI del CLP, dal titolo "Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose", contiene per ogni singola sostanza armonizzata, dove valgono, i limiti di concentrazione specifici per la classificazione di pericolosità; ad esempio il benzo(a)pirene ed il dibenzo(a,h)antracene hanno un limite di concentrazione specifico per C ≥ 0,01 % inferiore a quello generico riportato nella Tabella 2.10.

Per le sostanze indicate nel Database come cancerogene e/o ozono lesive per le quali non esiste ancora una classificazione ed etichettatura armonizzate perché non incluse nella Tabella 3.1 Allegato VI del CLP è stata fatta una verifica sul sito dell'ECHA e/o nella normativa degli ozoni lesivi. In questi casi è stata considerata la classificazione avente il numero di notifiche del produttore più elevato e nel caso di discordanza fra le indicazioni di cancerogenicità, quella più cautelativa, cioè quella dal carattere di cancerogenicità di Categoria 1(H350).

Qualora anche la consultazione della banca dati ECHA non avesse fornito tutte le informazioni necessarie, per la classificazione di pericolosità della sostanza si è fatto ricorso ad altra

documentazione integrativa tra cui, ad esempio, le schede di sicurezza disponibili del fornitore, se disponibili o altre (a parità di sostanza/prodotto) di produttori/fornitori comunitari più diffusi reperibili sui rispettivi siti web oppure ancora, le informazioni di sicurezza delle sostanze chimiche presenti nella banca dati gestita dall'Istituto Superiore di Sanità (Banca Dati di modelli di Schede dati di Sicurezza di sostanze chimiche - BDSDS), accessibile al seguente indirizzo web: <http://modellids.iss.it/>.

Per tali sostanze è stata inserita la classificazione presente sulla SDS disponibile, secondo l'autoclassificazione del fornitore/distributore sottolineando nella colonna note del database che la classificazione è legata alla scheda di sicurezza.

2.2.3 *Valutazione di sostanze o metodi alternativi per eliminare o rendere maggiormente compatibile dal punto di vista ambientale l'uso di composti H350, H351 e/o H420*

La valutazione di possibili alternative alle sostanze H350, H351 e/o H420 in termini di sostanze o metodi è partita dall'**analisi del database** compilato dalle diverse ARPA/APPA e da ISPRA. Tale lavoro si è basato sui seguenti criteri scelta:

- maggiore utilizzo nei laboratori ARPA/APPA,
- maggiore carattere di pericolosità,
- particolari esigenze dei laboratori dell'SNPA,
- fattibilità.

Di seguito sono riportate le decisioni del Gruppo di Lavoro:

- per quanto riguarda l'utilizzo delle soluzioni di riferimento e standard cancerogene o pericolose per lo strato di ozono è stato deciso di non proporre o valutare alcuna sostanza alternativa perché tale azione non risulta fattibile, saranno dati invece dei suggerimenti nella scelta di acquisto e nella gestione delle soluzioni di riferimento (fare riferimento al paragrafo 3.1.3 e all'Allegato C).
- per il diclorometano, H351, risultato un solvente e/o reagente ampiamente in uso nei laboratori del sistema Agenziale, la valutazione di una alternativa nei diversi metodi rappresentati nel database (per la maggior parte procedure di misura accreditate) richiede la costituzione di un Gruppo di Lavoro apposito, un'attività di approfondimento successiva a quella effettuata dal gdL 5, perché deve essere analizzato in modo puntuale un numero elevato di metodi diversi e individuate quindi un numero considerevole quindi di soluzioni.
- per quanto riguarda l'utilizzo di sostanze H420 per la misura del parametro idrocarburi o oli e grassi in matrice acquosa o suolo mediante tecnica FTIR (come evidenziato nel database) l'alternativa è stata già definita mediante l'utilizzo di un metodo basato su gascromatografia con rivelatore FID/MS pertanto non saranno fatti ulteriori approfondimenti (fare riferimento al paragrafo 3.2.1)
- sono state prese in considerazione o evidenziate o approfondite le possibile alternative maggiormente compatibili dal punto di vista ambientale ed anche della salute dell'operatore per il dicromato di potassio (APAT- IRSA/CNR 5130- Determinazione della Richiesta Chimica di Ossigeno [15]) in campioni di acque di scarico ad alto contenuto di cloruri, per la formaldeide (fissativo di campioni biologici), per il cloroformio H420 e H351 (APAT-IRSA/CNR 5170 [16] per la determinazione dei tensioattivi anionici in matrice acquosa), tenendo conto delle esperienze analitiche esistenti nei laboratori dell'SNPA o di altri Enti di Ricerca (fare riferimento rispettivamente ai paragrafi 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6)

Nota Il GdL ha deciso, sulla base della disponibilità data dall'ex Servizio di Metrologia Ambientale di ISPRA, di richiedere all'Istituto l'organizzazione di uno Studio Collaborativo (fare riferimento al paragrafo 3.2.4) per la misura dei tensioattivi anionici in matrice reale, i.e. effluente da impianto di depurazione o scarico industriale allo scopo di valutare le prestazioni del metodo in kit, che garantisce un minore impatto ambientale e sull'uomo rispetto al metodo ufficiale per i minori quantitativi di reagenti in gioco e la manipolazione in sistemi chiusi..

Sono state inoltre individuate all'interno del database alcune sostanze ad elevato carattere di pericolosità, utilizzate in quantità esigue da un numero molto basso di laboratori, tali sostanze sono state denominate "**sostanze di nicchia**" (Allegato D). La Tabella 2.11 riporta l'elenco delle "sostanze di nicchia" approfondite.

Per ciascuna sostanza di nicchia è stata infatti predisposta una tabella che ne riassume la classificazione ed etichettatura secondo il Regolamento Europeo CE 1272/2008 se possibile o secondo quanto già deciso dai componenti del GdL nella procedura di verifica della classificazione delle sostanze ancora prive di una etichettatura e classificazione armonizzata. Nelle brevi relazioni di approfondimento di queste sostanze sono stati evidenziati i metodi in cui ne è previsto l'utilizzo e le

eventuali possibilità di sostituzione (nello stesso metodo o con metodi alternativi), con sostanze che non siano cancerogene e/o ozono lesive.

Infine il GdL ha ritenuto di evidenziare come il rischio legato all'utilizzo di sostanze pericolose, al momento non sostituibili, debba comunque essere tenuto sotto controllo con il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e collettivo (DPI e DPC) che devono essere obbligatoriamente disponibili e utilizzati nei laboratori

SOSTANZE DI NICCHIA	
1	Fucsina basica
2	Arsenito di Sodio
3	Idrossilammina cloridrato
4	Cloramfenicolo
5	Fenolftaleina
6	Furfurolo
7	Cromato di sodio
8	Cloruro di Berillio
9	1,2-dicloroetano
10	Benzene
11	Formazina
12	Terra di diatomee

Tabella 2.11 – *Elenco sostanze di nicchia*

3. RISULTATI

3.1 Analisi del database

Dall'analisi del database, dopo eliminazione di tutte le sostanze sicuramente da non ritenere pericolose per imputazione della corretta classificazione o per utilizzo a concentrazioni inferiori ai rispettivi limiti, risultano 667 registrazioni relative a sostanze/miscele pericolose per le classi H350/H351/H420, così suddivise per tipo di utilizzo (Tabella 3.1):

UTILIZZI DELLE SOSTANZE PERICOLOSE (H350-H351-H420)	
SOLVENTI 86	48 Diclorometano (H351)
	22 Cloroformio (H351)
	7 Tetracloroetilene (H351)
	3 1,2 Dicloroetano (H350)
	3 Etere di petrolio (H350)
	3 Freon (H420)
REAGENTI 134	44 Dicromato di potassio (H350)
	12 Cloroformio (H351)*
	11 Formaldeide (H350)
	6 Diclorometano (H351) *
	9 Fenolftaleina (H350, lim. 1%)
	3 Terra di diatomee (H350)
	ALTRI (vedi "sostanze di nicchia")
SOLUZIONI RIF/STD 447	VOC Aromatici
	VOC Clorurati - Alogenati
	IPA
	Pesticidi
	Ammine aromatiche
	Metalli
	Formazina (vedi "sost. di nicchia")

Tabella 3.1 – Numero di registrazione delle sostanze pericolose suddiviso per tipologia di utilizzo (solvente, reagente etc)

L'informazione del tipo di utilizzo delle sostanze/miscele utilizzate è indicativo delle concentrazioni coinvolte e delle possibilità eventualmente di ridurle per scendere al di sotto dei limiti di pericolosità; di norma :

- un “solvente” comporta concentrazioni > 50% ; una sostanza H350/H420/H351 presente come solvente conferisce sempre la sua classe di pericolo alla miscela; l’unica possibilità di eliminare la pericolosità della miscela è la sostituzione con un solvente che non presenti quelle indicazioni di pericolo (fare riferimento al paragrafo 3.1.1)
- un “reagente” comporta concentrazioni molto variabili, ma in genere dell’ordine dei g/L ; è molto probabile che una sostanza H350/H420 presente come reagente conferisca pericolosità alla miscela (> 1 g/L) ; mentre è meno probabile che una sostanza H351 presente come reagente conferisca pericolosità (>10 g/L); nel primo caso è praticamente impossibile eliminare la pericolosità abbassando la concentrazione; nel secondo caso potrebbe invece essere possibile, mantenendo lo stesso effetto per cui il reattivo viene usato. Laddove non sia possibile è necessario comunque pensare a sostanze alternative non pericolose se esistenti (fare riferimento al paragrafo 3.1.2)
- una “soluzione di riferimento/standard certificato” comporta in genere concentrazioni variabili dai pochi ppb a 10.000 ppm (max 1%); le più alte concentrazioni si riferiscono alle soluzioni madri (più stabili) che vengono poi diluite alle varie concentrazioni di utilizzo; in certi casi si parte addirittura da materiali standard puri (99,99...%) che vengono opportunamente pesati e diluiti in laboratorio. Partendo dal presupposto che non è possibile sostituire o eliminare le sostanze che costituiscono standard di riferimento (in quanto rappresentano le sostanze da determinare), l’unica possibilità di eliminare la pericolosità di tali miscele è rappresentata dall’utilizzo di standard con concentrazioni inferiori ai rispettivi limiti di pericolosità (1000 ppm per H350/H420 e 10000 ppm per H351), qualora sia accettabile dal punto di vista sia tecnico che economico. Esistono tuttavia dei limiti specifici per alcune sostanze, quali ad esempio la fenolftaleina classificata H350 che ha un limite di concentrazione specifico pari a $c \geq 1\%$, il dibenzo(a,h)antracene e il benzo(a)pirene, entrambi H350, con limite specifico $c \geq 0.01\%$. Risulta quindi fondamentale consultare sempre la tabella 3.1 dell’Allegato VI del CLP, nella sua versione aggiornata disponibile sul sito del Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell’ISS. (fare riferimento al paragrafo 3.1.3)

3.1.1 Solventi

L’utilizzo di solventi pericolosi risulta così ripartito (vedi Allegato B- database):

48 Diclorometano (H351)

è nettamente il solvente pericoloso più utilizzato, in quanto previsto dalla maggioranza dei metodi ufficiali esistenti (EPA, ISO, UNI, APAT CNR IRSA, ISS...) per la determinazione dei composti organici semivolatili e non-volatili in tutte le matrici (acqua, aria, suoli, rifiuti, sedimenti...) ed in particolare per la fase di estrazione con tecniche diverse (SPE, LLE, SFE, PFE, GPC, Ultrasuoni...), prima dell’analisi strumentale (in genere GC-MS, HRGC-HRMS, HPLC, LC-MS...).

Per un elenco pressochè esaustivo dei possibili analiti semi-volatili che prevedono l’uso del diclorometano si rimanda a metodo EPA 8270D [17]; in pratica si tratta di tutti i composti definibili come “microinquinanti organici”, fra cui ricordiamo solo i più noti (Pesticidi, IPA, PCB, Fenoli, Ammine, Clorobenzene, Ammine, Alogenati...) a cui si aggiungono metodi specifici per Diossine (PCDD, PCDF), PCB (singoli congeneri), PBDE, Alchilfenoli ecc....

Il Metodo EPA 3500C [18] (Organic extraction and sample preparation) fornisce un elenco di tutti i metodi EPA specifici per ogni tecnica di estrazione; ciascuno di questi a sua volta fornisce l’indicazione dei possibili solventi o miscele utilizzabili in funzione della tipologia di matrice e il diclorometano risulta quello adatto alla maggior parte delle situazioni (puro o in miscela con altri solventi) e questo fatto rende ragione del suo diffuso utilizzo.

La sua sostituzione con altri solventi idonei a seconda dell’utilizzo previsto (analita, matrice, tecnica di estrazione) è sicuramente possibile e auspicabile, ma al momento risulta poco percorribile in tempi brevi, in considerazione del fatto che la buona performance di queste metodiche, così complesse e critiche, che si avvalgono di strumentazioni molto sofisticate e sensibili, dipende fortemente dalla grande esperienza degli analisti e dalla applicazione di un **consolidato** sistema di assicurazione della qualità a cui concorrono una **robusta validazione**, una forte **standardizzazione** delle procedure adottate e una costante verifica del **mantenimento delle prestazioni** nel tempo. La sostituzione del solvente di estrazione comporterebbe la ricerca e sperimentazione di possibili alternative, con la conseguente necessità di rivalidare tutti i metodi a dimostrazione del mantenimento delle stesse performance garantite fino ad ora (come previsto da EPA 3500 C, cap. 11.1 e come richiesto dall’ente di accreditamento).

Al di là della difficoltà e del tempo necessario per un'attività del genere, che di norma non risulta compatibile con la normale attività dei laboratori di analisi, non si ritiene opportuno che ciascun laboratorio debba intraprendere una simile ricerca di propria iniziativa: a parte il dispendio di tempo si arriverebbe probabilmente alla moltiplicazione di metodi analitici, peraltro di valenza non ufficiale.

E' molto importante quindi, anche alla luce della maggiore consapevolezza raggiunta grazie alle attività del presente GdL, che si apra un tavolo di lavoro e di confronto all'interno dell'SNPA sulla necessità di sostituire il diclorometano nelle diverse procedure di misure con solventi maggiormente compatibili dal punto di vista ambientale e anche della salute dell'operatore. In generale è auspicabile che le organizzazioni deputate alla emissioni di metodi normati/ufficiali o comunque deputate alla armonizzazione dei metodi a vari livelli (comunitario, nazionale...) si rendano promotori e capofila di tale attività.

Il diclorometano risulta utilizzato anche nella determinazione dei Tensioattivi non ionici, con metodo in cuvetta (Kit) viste le piccole quantità in gioco è, in questo caso, considerato come reagente.

22 Cloroformio (H351) -

l'utilizzo più diffuso è previsto per la determinazione dei Tensioattivi anionici sia con metodo ufficiale APAT-IRSA/CNR 5170 che con metodo in cuvetta (Kit); a parità di prestazioni, si ritiene preferibile il secondo in quanto i quantitativi in gioco sono molto limitati e l'utilizzo previsto in sistemi chiusi previene possibili contatti da parte dell'operatore, e allo scopo di favorire il passaggio al metodo in Kit è prevista l'organizzazione di uno Studio Collaborativo da parte di ISPRA (fare riferimento ai paragrafo 3.2.5 e 3.2.6)

7 Tetracloroetilene, 3 Etere di petrolio e 3 Freon

Il loro utilizzo è ancora risultato per l'analisi degli "idrocarburi totali", anche se in via di sostituzione; si rimanda al paragrafo 3.2.1

3 1,2 Dicloroetilene

il suo utilizzo è previsto nell'analisi dei tensioattivi non ionici da specifici metodi normati; da segnalare che il metodo APAT-IRSA/CNR 5180 [19] prevede l'uso di Acetato di etile.

3.1.2 Reagenti

Come riportato in Tabella 3.1, delle **134** registrazioni presenti sul Database, la sostanza più diffusa risulta il **dicromato di potassio** (44) : il suo utilizzo è previsto nella maggioranza delle segnalazioni per l'analisi del **COD**, sia secondo metodo normato APAT-IRSA/CNR 5130 [19] che con metodo in cuvetta (KIT) (si rimanda al paragrafo 3.2.2 per la trattazione) .

Seguono il **cloroformio** (12) (nei Kit per tensioattivi anionici e cationici), la **formaldeide** (11) (utilizzata come fissativo in metodi biologici e come conservante per l'analisi dei tensioattivi, si rimanda al paragrafo 3.2.3), il **diclorometano** (6) (nei Kit per tensioattivi non ionici).

Per quanto riguarda le altre sostanze si rimanda a specifici approfondimenti (Sostanze di nicchia Allegato D).

3.1.3 Soluzioni di riferimento/standard certificati

In questa tipologia di prodotti rientrano tutte le sostanze pure o in soluzione, singole o in miscela che costituiscono gli standard di riferimento per tutti gli analiti che presentano classificazione di pericolosità H350-H351-H420, che siano presenti in concentrazioni superiori ai rispettivi limiti; in particolare le **447** registrazioni si riferiscono a standard di riferimento per l'analisi di "microinquinanti organici" e "metalli pesanti" (vedi Tabella 3.1).

Si possono presentare i seguenti casi:

- a. **singola sostanza** allo stato solido (polveri) o in soluzione concentrata, che per successiva diluizione viene portata alle concentrazioni di utilizzo, sia come singola che in miscela con altre – in generale gli standard utilizzati presenteranno sempre la pericolosità della sostanza stessa;
- b. **miscela di sostanze** appartenenti alla stessa famiglia/tipologia, in soluzione concentrata, che per successiva diluizione viene portata alle concentrazioni di utilizzo - la miscela sarà pericolosa se almeno uno dei componenti supera il proprio limite di pericolosità e assumerà la classificazione del più pericoloso presente;

-
- c. **sostanza singola o miscela di sostanze** appartenenti alla stessa famiglia/tipologia, pronta all'uso (che non prevede quindi alcuna operazione di diluizione o miscelazione) – nella maggioranza dei casi lo standard utilizzato non sarà pericoloso, in quanto l'intervallo di misura della maggioranza degli inquinanti organici e inorganici è nettamente inferiore a 1000 ppm.
- d. **soluzioni in solvente pericoloso** (es. diclorometano), per cui la miscela risulta avere la stessa pericolosità del solvente, anche se le concentrazioni dei principi attivi sono inferiori ai rispettivi limiti.
- e. **soluzioni di riferimento/standard di metalli** singole o multielemento (per AAS, ICP-OES, ICP-MS) - è necessario considerare che, di norma, ciascun componente non è presente come elemento puro, ma come composto solubile in genere in ambiente acido (sale, ossido, idrossido, acido...), del quale può costituire il catione o l'anione (es: $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ - BeNO_3 - As_2O_3 - H_3AsO_4 ecc.); **pertanto la classificazione della miscela di metalli dipende dalle indicazioni di pericolo e relativa concentrazione proprie delle sostanze presenti e non dei singoli metalli elementari.** Nella maggior parte dei casi, essendo le soluzioni standard stabilizzate in HNO_3 (in genere dal 2 al 5%), i metalli sono presenti come nitrati; si evidenzia il caso particolare dell'arsenico che normalmente è presente come ossido (As_2O_3) o come acido arsenico (H_3AsO_4) in base alla reazione $\text{As}_2\text{O}_3 + 2\text{HNO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_3\text{AsO}_4 + \text{N}_2\text{O}_3$. Ai fini della corretta classificazione di queste miscele è quindi necessario conoscere esattamente le sostanze presenti e la loro effettiva concentrazione poiché in molti casi le indicazioni di pericolosità del metallo puro o della voce generica a volte presente nel CLP (es. Arsenico e suoi composti) sono diverse da quelle del reale composto presente, così come la concentrazione dichiarata del singolo metallo (valore di riferimento) non è quella del composto. A questo proposito si evidenzia la differenza fra il Certificato e la SDS della Soluzione di riferimento: il primo riporta l'elenco dei metalli presenti, la loro concentrazione (allo stato elementare) e i CAS riferiti all'elemento (M) indipendentemente dai composti che li contengono; la seconda deve riportare invece la classificazione della Miscela (sez.2) in funzione dei singoli composti (sostanze) pericolosi presenti (sez.3) e relativa concentrazione stechiometrica. In Tabella 3.2 si riporta l'elenco dei metalli che presentano pericolosità H350 come tali e/o come composti normalmente presenti nelle soluzioni di riferimento; l'elenco non è esaustivo ma evidenzia quali errori si possono commettere considerando il metallo puro (M) anziché la sostanza (S): nel caso di Co e As non si attribuirebbe cancerogenità, mentre i rispettivi composti risultano H350; nel caso di Ni si attribuirebbe H351 anziché H350; nel caso di Cd e Be si attribuirebbe ugualmente H350, ma si sottostimerebbe la concentrazione rispettivamente di 2,3 volte (500 ppm di Cd corrispondono a 1150 ppm di nitrato, quindi H350) e di 14,9 volte (100 ppm di Be corrispondono a 1490 ppm di nitrato, quindi H350). Bisogna inoltre tener presente che per alcuni composti di metalli pesanti la classificazione armonizzata (CLP) o notificata (ECHA) presenta limiti specifici inferiori a quelli generici della classe H350: in particolare per $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$, CdCl_2 , $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ e CoCl_2 , tutti H350, il limite è di 0,01% (100 ppm), come riportato in Tabella 3.2.
- f. **miscele di idrocarburi**, come noto sono classificate cancerogene solo se contengono specifici markers in quantità superiori ai limiti specifici o generici (Parere ISS – Protocollo n.32074 del 23/06/2009), come definito da CLP, All.VI-Parte 1 (cap.1.1.3.1 - note J-K-L-M-P). Presso i laboratori delle agenzie risultano per lo più utilizzate miscele sintetiche di idrocarburi lineari (es. C10-C40) che non risultano quindi classificate cancerogene (a meno che non presentino un solvente H350/H351, es. diclorometano); solo in alcuni casi risultano utilizzate miscele naturali come Gasoline (CAS 8006-61-9) o Diesel Fuel/Diesel Oil (CAS 68476-34-6), specificatamente classificate da CLP rispettivamente H350 e H351.

Metallo puro	n. CAS/ Classificazione	Comp. Generico da CLP	Sostanza	n. CAS Classificazione	Limiti specifici	Rapporto $C_{Sostanza}/C_{Metallo}$
Cd	7440-43-9 H350 (CLP)	presente no H350	Cd(NO ₃) ₂	10325-94-7 H350 (ECHA)	0,01% (ECHA)	2,28
			CdCl ₂	10108-64-2 H350 (CLP)	0,01% (CLP)	1,63
Be	7440-41-7 H350i (CLP)	presente H350i	Be(NO ₃) ₂	13597-99-4 H350i (ECHA)	-	14,8
			BeO	1304-56-9 H350i (CLP)	-	2,78
			BeCl ₂	7787-47-5 H350i (ECHA)	-	8,8
As	7440-38-2 no H350/H351 (CLP)	presente no H350	As ₂ O ₃	1327-53-3 H350 (CLP)	-	1,30
			H ₃ AsO ₄	7778-39-4 H350 (CLP)	-	1,90
Ni	7440-02-0 H351 (CLP)	non presente	Ni(NO ₃) ₂	13138-45-9 H350i (CLP)	-	4,96
Co	7440-48-4 no H350/H351 (CLP)	non presente	CoCl ₂ * 6H ₂ O	7791-13-1 H350i (ECHA)	0,01% (ECHA)	4,04
			Co(NO ₃) ₂	10141-05-6 H350i (CLP)	0,01% (CLP)	3,10

Tabella 3.2 – Esempi di metalli che presentano pericolosità H350 come tali e/o come composti normalmente presenti nelle soluzioni di riferimento

Nel data base è stata fatta la scelta di non considerare tutte le soluzioni/miscele che già presentavano livelli di concentrazione inferiori ai rispettivi limiti degli analiti presenti e quindi sono riportate solo le soluzioni/miscele che risultano pericolose per concentrazione di almeno uno dei componenti o per il solvente e quelle per cui non è stato possibile risalire alla effettiva composizione e relativa classificazione.

Relativamente alle soluzioni di riferimento di metalli sono riportate le miscele che risultano pericolose per concentrazione di almeno uno dei componenti (chiaramente identificati) e quelle contenenti As >500 ppm, Ni > 200ppm, Be>50 ppm ,Cd>40ppm, Co>20ppm, (nel caso di composti non chiaramente identificati).

Nel caso delle mix standard nel database sono state ripetute tante righe per quanti sono i principi attivi che conferiscono pericolosità.

Ad esempio:

1. Mix PAH: In questo caso tutti i principi attivi (H350) superano il limite di 1000 ppm e quindi la soluzione è H350; essendo però presente diclorometano come solvente (H351) sarebbe in ogni caso pericolosa (H351) anche se tutti i principi attivi fossero sotto i 1000 ppm.

Descrizione	n.CAS	Classificazione
110092-08-4PAK PAH Solution, 2000 mg/L, 1 ml O2Si (Benzo(k)fluorantene)	207-08-9	H350
110092-08-4PAK PAH Solution, 2000 mg/L, 1 ml O2Si (Benzo(a)antracene)	56-55-3	H350
110092-08-4PAK PAH Solution, 2000 mg/L, 1 ml O2Si (Benzo(a)pirene)	50-32-8	H350
110092-08-4PAK PAH Solution, 2000 mg/L, 1 ml O2Si (Crisene)	218-01-9	H350
110092-08-4PAK PAH Solution, 2000 mg/L, 1 ml O2Si (Benzo(b)fluorantene)	205-99-2	H350
110092-08-4PAK PAH Solution, 2000 mg/L, 1 ml O2Si (Dibenzo(a,h)antracene)	53-70-3	H350
110092-08-4PAK PAH Solution, 2000 mg/L, 1 ml O2Si (Diclorometano)	75-09-2	H351
110092-08-4PAK PAH Solution, 2000 mg/L, 1 ml O2Si (Benzene)	71-43-2	H350

2. Mix PAH: in questo caso solo i due principi attivi benzo(a)pirene e dibenzo(a,h)antracene conferiscono pericolosità alla miscela (H350) in quanto hanno limite specifico di 100 ppm; ancora però la presenza di diclorometano come solvente renderebbe comunque pericolosa la miscela (H351).

Descrizione	n.CAS	Classificazione
Miscela IPA 100ppm (Benzo(a)pirene)	50-32-8	H350
Miscela IPA 100ppm (Benzo(a)antracene)	53-70-3	H350
Miscela IPA 100ppm (Diclorometano)	75-09-2	H351

3. Mix 24 metalli: in questo caso la presenza di Be e Ni conferisce pericolosità (H350) alla miscela, indipendentemente dagli altri componenti

Descrizione	n.CAS	Classificazione
Multistandard 24 elementi ICP Nitrato di Berillio da 0.1% a 0.25 %	135-97-99-4	H350
Multistandard 24 elementi ICP Nitrato di Nickel da 0.01% a 0.25 %	13138-45-9	H350

Come detto nelle premesse, non è possibile evitare l'uso di queste sostanze, utilizzate sia come soluzioni di taratura che come soluzioni di riferimento nelle procedure di assicurazione e controllo di qualità del dato (in genere necessarie ad ogni batch analitico).

L'unica possibilità di abbassare il rischio ad esse correlato consiste nell'utilizzo di soluzioni già pronte o comunque in concentrazioni inferiori ai limiti di pericolosità; le soluzioni di riferimento multi o mono componenti/e "custom", acquistate già pronte ad una concentrazione in massa inferiore rispetto al limite di pericolosità della/e sostanza/e contenute nella soluzione e indicato nel CLP, permettono all'operatore di non dover manipolare le sostanze pericolose cancerogene; in ogni caso sono da preferire le soluzioni (anche se a concentrazioni superiori al limite di pericolosità) rispetto alle sostanze pure allo stato solido, per evitare la manipolazione delle polveri (ancorché sotto cappa e con adeguati DPI).

Nel caso di utilizzo delle soluzioni diluite già pronte, queste devono essere, dopo la prima apertura e per l'intero tempo di utilizzo, verificate e gestite al fine di garantire che la loro stabilità sia mantenuta entro i limiti definiti in base agli obiettivi di qualità del laboratorio; questo è possibile effettuando la loro conferma metrologica. Nell'Allegato C del presente Rapporto viene riportato un estratto della procedura di gestione dei materiali di riferimento del Servizio di Metrologia Ambientale di ISPRA. Questa scelta però non risulta sempre percorribile, sia per motivi **tecnici** (combinazioni di analiti alle concentrazioni previste da un determinato metodo non sono sempre reperibili sul mercato, inoltre le soluzioni più concentrate sono più stabili e garantiscono tempi di conservazione maggiori) che

economici (è molto più dispendioso acquistare soluzioni o miscele pronte all'uso a tutte le concentrazioni necessarie piuttosto che acquistare un'unica soluzione madre da diluire opportunamente).

Sicuramente il primo passo consiste nel sostituire tutti i solventi delle miscele che risultano H350-H351-H420.

3.2 Approfondimenti di procedure di misura che prevedono l'utilizzo di sostanze pericolose

3.2.1 Procedura di misurazione degli idrocarburi nelle matrici solide e acquose

La normativa ambientale nazionale prevede la misura degli idrocarburi come indice della contaminazione delle diverse matrici ambientali derivante dall'utilizzo di prodotti petroliferi o loro derivati. Nella sottostante Tabella 3.3 sono riassunte le richieste normative per quanto riguarda la determinazione degli idrocarburi nelle diverse matrici ambientali.

Come risulta evidente la stessa normativa non definisce in modo univoco il parametro idrocarburi e molte volte i valori limite sono espressi in modo diversificato.

Infatti il termine "idrocarburi totali" è assolutamente generico, potendo in teoria comprendere al suo interno tutti gli idrocarburi esistenti in natura, indipendentemente dal numero di atomi di carbonio, dalla tossicità e pericolosità degli stessi. Gli idrocarburi (lineari, ramificati, ciclici e aromatici) possono essere di origine petrolifera oppure biogenica, animale e/o vegetale, con pesi molecolari, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche differenti.

Matrice	Normativa	Parametro	Valore Limite
Acque sotterranee	D.Lgs 152/06 Parte IV Titolo V All. 5 Tab. 2	Idrocarburi totali espressi come n-esano	350 µg/L
Acque reflue	D.Lgs 152/06 Parte III All. 5 Tab. 3	Grassi e olii animali/vegetali	20 mg/L acque superficiali 40 mg/L rete fognaria
		Idrocarburi totali	5 mg/L acque superficiali 10 mg/L rete fognaria
Acque reflue	Dm Ambiente 12/06/2003 n. 185 All. 8	Grassi e oli animali/vegetali	10 mg/L (all'uscita dell'impianto di recupero)
		Oli minerali	0.05 mg/L (all'uscita dell'impianto di recupero)
Acque	D.Lgs 152/06 Parte III All. 5 Tab. 5	Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti	"Sostanza per la quale non può essere adottato un limite meno restrittivo di quello indicato in tabella 3 (D.Lgs 152/06 Parte III, All. 5) per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria"***
Acque Superficiali (destinate alla produzione di acqua potabile)	D.lgs 152/06 Parte III All. 2 Tab. 1/A	Idrocarburi disciolti o emulsionati (dopo estrazione mediante etere di petrolio)	0,05 mg/L (I*) A1**
			0,2 mg/L (I*) A2**
			0,5 mg/L (G*) A3**
			1 mg/L (I*) A3**

Acque superficiali	Dm Ambiente 8/11/2010 n.260, All. 1, Tab.3 (Modifica Norme tecniche Dlgs 152/2006 Parte II)	Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	350µg/L
Suolo e sottosuolo	D.Lgs 152/06 Parte IV Titolo V All. 5 Tab. 1	Idrocarburi leggeri C≤12	10 mg/kg ss siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale
			250 mg/kg ss siti ad uso industriale e commerciale
		Idrocarburi pesanti C>12	50 mg/kg ss siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale
			750 mg/kg ss siti ad uso industriale e commerciale
Rifiuti inerti	Dm Ambiente 27/09/2010	Olio minerale (da C10 a C40)	500 mg/kg discarica

LEGENDA

* I = valore imperativo; G = valore guida

** A1, A2, A3 Categoria delle acque

*** Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi con una portata complessiva giornaliera inferiore a 50m³, per il parametro indicato, le regioni e le province autonome nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti della tabella 3, o quelli stabiliti dalla regione, l'ente gestore può stabilire, per il parametro indicato, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato dalla tabella 3.

Tabella 3.3 – Concentrazioni limite del parametro idrocarburi nelle matrici ambientali (da ISPRA Manuale Linea Guida 75/2011)

Nelle matrici ambientali essi si trovano in genere in rapporti differenti tra loro a secondo dell'origine. Le caratteristiche di questo parametro rendono, di fatto, impossibile la determinazione analitica di tutti gli idrocarburi presenti in un campione ambientale.

Trattandosi di una "famiglia" di composti, il parametro "idrocarburi totali" viene definito unicamente dal metodo utilizzato, in quanto procedure operative diverse possono fornire risultati non confrontabili con inevitabili riflessi a livello di contenziosi legali.

Nel 2010 è stato istituito da ISPRA un Gruppo di Lavoro (GdL) ISPRA, ARPA/APPA, ISS, CNR-IRSA, il "GdL Idrocarburi", finalizzato all'armonizzazione dei metodi analitici utilizzati per la determinazione degli idrocarburi su matrici ambientali. Nel 2011 è stato pubblicato, con riferimento ai suoli sottoposti a bonifica, il documento "Procedura per l'analisi degli idrocarburi con C>12" (ISPRA Manuale e Linee Guida 75/2011 [17]) e nel 2015 è stato pubblicato, con riferimento alle matrici acquose, la "Procedura di misurazione per la determinazione degli idrocarburi totali nelle acque" (Delibera Consiglio Federale DOC N.46/14-CF) (ISPRA Manuale e Linee Guida 123/2015 [18]), con l'obiettivo di adottare un unico metodo di prova per la determinazione degli idrocarburi totali in acque naturali ed acque reflue.

Il lavoro del Gruppo di Lavoro per la matrice acquosa (acque naturali e acque reflue) ha portato alla definizione di un metodo che, qualora non sia richiesta la determinazione contestuale di "oli e grassi animali/vegetali", consente la quantificazione degli "idrocarburi totali" come somma della concentrazioni in massa di due frazioni, esprimibili anche come n-esano:

- frazione volatile, relativa a idrocarburi con tempi di ritenzione compresi tra 2-metilpentano (C₆H₁₄) e n-decano (C₁₀H₂₂), inclusi gli estremi,
- frazione estraibile relativa a idrocarburi con tempi di ritenzione compresi tra n-decano (C₁₀H₂₂) e n-tetracontano (C₄₀H₈₂), esclusi gli estremi.

Conseguentemente, per “idrocarburi totali” si è intesa la somma delle concentrazioni in massa di due classi di composti:

- gli idrocarburi, determinati mediante spazio di testa (EPA 5021 A [19]) e analisi in gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), compresi tra il 2-metilpentano (C₆H₁₄) e il n-decano (C₁₀H₂₂) inclusi (frazione volatile), sottratti il MTBE, l’ETBE, il TAME e il DIPE in quanto eteri;
- i composti che, dopo i processi di estrazione e purificazione riportati nel metodo UNI EN ISO 9377- 2:2002 [20], sono rivelati mediante GC-FID, su colonna capillare non polare con tempi di ritenzione compresi tra quelli del n-decano (C₁₀H₂₂) e del n-tetracontano (C₄₀H₈₂) (frazione estraibile).

La procedura di misurazione così sviluppata è applicabile per acque sotterranee, superficiali, acque reflue e acque da impianti di trattamento degli scarichi fognari e permette la determinazione degli idrocarburi totali

in concentrazioni maggiori, sia per la frazione volatile che per quella estraibile, di 0,05 mg/L. Per le acque reflue è presa in considerazione la sola frazione estraibile. Sono incluse altresì le acque superficiali destinate ad uso potabile il cui contenuto in idrocarburi emulsionati o disciolti è determinato con riferimento alla sola frazione estraibile degli idrocarburi.

La procedura non consente la determinazione del contenuto di “oli e grassi animali/vegetali”, per cui, nel caso di verifica del rispetto dei limiti di emissione degli scarichi in acque superficiali e in fognatura e qualora sia richiesta la contestuale determinazione dei parametri “oli e grassi animali/vegetali” e di “idrocarburi totali”, operativamente si può procedere alla:

- determinazione di “oli e grassi animali/vegetali”, in accordo al metodo ASTM D7066-04 (2011) [21], alternativo all’APAT-IRSA/CNR 5160B [22] o in accordo al metodo APAT-IRSA/CNR 5160A [23].
- determinazione degli “idrocarburi totali” tramite GC-FID, in accordo alla procedura messa a punto dal Gruppo di Lavoro.

La procedura di misurazione degli idrocarburi totali nelle acque, definita nel Manuale e Linee Guida ISPRA 123/2015, è stata sottoposta tra il 2013 e il 2014 ad un processo di convalida tramite studio collaborativo (ISPRA-SC008).

Entrambi i lavori del GdL, quindi, sono stati impostati con l’obiettivo di individuare, in accordo a norme internazionalmente accettate, metodi basati su misure in Gas Cromatografia e previa estrazione con solventi adeguati sotto tutti i profili (analitico, ambientale e della sicurezza), in alternativa ai metodi precedentemente previsti. L’intervento in tal senso è quindi legato anche al combinato disposto del Regolamento (UE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e del Regolamento CE n 291/2011 sugli usi essenziali di sostanze controllate, diverse dagli idroclorofluorocarburi per fini di laboratorio e di analisi nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009.

Infatti tra i metodi precedentemente utilizzati sia dai laboratori pubblici che privati, relativamente ai suoli, ISS nel suo parere (Prot. N. 37936 del 5 agosto 2003) fornì indicazioni in merito a due metodi analitici, che tuttavia presentavano una problematica rispetto alla procedura di estrazione con 1,1,2-Tricloro-1,2,2-Trifluoroetano (Freon-113), sostanza classificata “Tossica per l’ambiente” e pertanto di difficile reperimento sul mercato.

Anche per la matrice acquosa i “Metodi analitici per le acque”, Manuali e linee guide N°29/2003 Vol.2, ad eccezione che per il metodo 5160 A (determinazione gravimetrica), prevedono la misura dei parametri idrocarburici mediante spettrofotometria infrarossa IR (metodo 5160B) previa estrazione degli idrocarburi con solventi quali Freon 113, dannoso per lo strato di ozono, o del tetracloruro di carbonio (CCl₄), cancerogeno di categoria 2 (H351), eco tossico (H412) nonché dannoso per lo strato di ozono (H420 ex EUH059) od ancora in alternativa il tetracloroetilene cancerogeno di categoria 2 (H351) e tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411).

In conclusione i lavori portati a termine dal Gruppo di Lavoro istituito da ISPRA offrono delle valide alternative per il parametro idrocarburi, ma per il parametro grassi ed oli animali e vegetali per le acque si fa ancora riferimento ai metodi APAT-IRSA/CNR.

Il D. Lgs. 152/2006 (Parte III, Allegato 5, Tabella 3) indica i limiti di emissione degli scarichi in acque superficiali e in fognatura. La norma prevede la determinazione di “oli e grassi animali/vegetali”. L’attuale definizione del parametro di legge “oli e grassi animali/vegetali” comporta che esso sia determinato per differenza tra “sostanze oleose” e gli “idrocarburi totali” tramite tecnica gravimetrica (5160 metodo A) o tramite spettrofotometria infrarossa IR tra quanto estratto con Freon 113 e non adsorbiti su gel di silice/florisil (5160 metodo B).

Per ovviare all’utilizzo dei solventi sopra menzionati per la fase estrattiva precedente alla determinazione tramite IR, relativamente di recente e come indicato nel Manuale e Linee Guida ISPRA 123/2015, è stato pubblicato il metodo ufficiale ASTM D7066-04 (2011) alternativo al metodo

APAT-IRSA/CNR 5160B. Il metodo in spettrofotometria di assorbimento all'infrarosso (IR) utilizza, come solvente, un dimero/trimero del clorotrifluoretilene (S-316). Il metodo prevede la determinazione di "oli e grassi" e di "sostanze non polari", parametro quest'ultimo non coincidente con la dizione della norma italiana vigente ("idrocarburi totali"), anche se di fatto gli "idrocarburi" (o "oli minerali") costituiscono la componente non polare degli "oli e grassi totali" (e come tale separata dal passaggio su gel di silice/florisil).

Alcuni laboratori ARPA/APPA, in attesa di implementare le opportune dotazioni strumentali, utilizzano poi come altra alternativa per la determinazione degli oli e grassi animali/vegetali per le acque di scarico il metodo FT-IR secondo APAT CNR IRSA 5160 B, modificato per il solvente di estrazione, cioè usano il solvente S-316 (comunque trasparente nella zona di interesse) al posto del Freon. Questo metodo permette di mantenere la dicitura "idrocarburi totali" prevista da D. Lgs. 152/2006 [24] Parte III All.5 Tab. 3 e di determinare con un'unica estrazione sia gli Idrocarburi che gli Oli e grassi animali e vegetali. Però la misura degli "idrocarburi totali", mediante questo metodo, non risponde alle indicazioni del Consiglio Federale (Delibera Consiglio Federale DOC N.46/14-CF) e alla necessità che all'interno del Sistema Agenziale siano prodotti per tale parametro misure confrontabili mediante la scelta di un unico metodo condiviso tra i laboratori ARPA/APPA. Si tratta infatti, come sopra già evidenziato, di un parametro strettamente collegato alla procedura operativa applicata.

Il solvente estrattivo S-316, si presenta come un liquido con punto di ebollizione = 134°C e densità 1,7 g/cm³ ed è costituito da una miscela di tetracloroesafluorobutano (65-75%) e clorotrifluoroetilene trimero o tetramero (25-35%). Il composto non risulta tossico, cancerogeno (H350 /351) ed ecotossico (H400) né lesivo per lo strato di ozono (H420). Tuttavia presenta un costo estremamente elevato (da 700 a 1257 €/L): considerato che il metodo prevede l'utilizzo di 50 ml del solvente di estrazione, l'analisi di ciascun campione comporta la spesa variabile da 35 a 63 € solo per il solvente, escludendo la preparazione delle soluzioni di taratura (ca. 200 ml) che vanno preparate con cadenza giornaliera. Il solvente può essere tuttavia recuperato per distillazione.

Infine per quanto riguarda ancora il parametro "oli e grassi animali/vegetali" per le acque reflue il Gruppo di Lavoro istituito da ISPRA, ha proposto la sua sostituzione con il parametro TOC (UNI EN 1484:1999 [25]), un parametro ugualmente significativo ed indicativo della presenza di oli e grassi animali/vegetali per il quale conseguentemente andrebbe definito il limite di legge corrispondente. Tale proposta consentirebbe la maggiore esattezza del dato finale in quanto ottenuto tramite un'analisi strumentale diretta e non per sottrazione dei risultati derivanti da due misure, la minimizzazione dei problemi dovuti ad eventuali interferenze (ad esempio i tensioattivi e altri composti polari) derivanti da una fase preparativa non efficiente e

Sarebbe inoltre auspicabile, sempre per le acque reflue, la sostituzione del parametro "idrocarburi totali" con la voce specifica "Idrocarburi C10-C40 determinati con GC-FID", che permetterebbe di individuare in maniera univoca il metodo da utilizzare (ISPRA Manuale e Linee Guida 123/2015 ex UNI EN ISO 9773-2:2002).

Tali proposte dovrebbero trovare un'auspicabile risposta da parte del MATTM, attraverso una opportuna revisione della Tab.3 del D.lgs 152/2006 Parte III, Allegato 5 per acque reflue industriali.

3.2.2 Procedura di misurazione della Richiesta Chimica di Ossigeno (COD)

Il codice ambientale nazionale, cioè il Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 (Parte III All. 5), definisce i limiti di emissione degli scarichi idrici, in particolare stabilisce i limiti di emissione per il parametro COD come descritto nella tabella 3.4 e tabella 3.5. Il COD rappresenta una misura indiretta del tenore di sostanze organiche presenti in una matrice acquosa.

Potenzialità in impianto A.E. (abitanti equivalenti)	2000-10000		>10000	
	Concentrazione	% di riduzione	Concentrazione	% di riduzione
Parametri (media giornaliera) (1)				
COD mg/L (2)	≤ 125	75	≤ 125	75

(1) Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L

(2) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio

Tabella 3.4 – Limite di emissione del COD per gli impianti di acque reflue urbane

Acque reflue superficiali	Parametro	Valore limite di emissione (mg/L)	
	COD (come O ₂) (1)	≤160	scarico in acque superficiali
≤500		scarico rete fognaria (*)	
	COD (come O ₂)	≤100	recapito sul suolo

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'Autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla Nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose

(1) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 (Parte III All. 5) e, per le zone sensibili, anche quelli di tabella 2 (Parte III All. 5). Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L

Tabella 3.5 – Valori limite di emissione del COD nelle acque reflue superficiali

Il Manuale e Linea Guida APAT-IRSA/CNR N°29/2003 “Metodi analitici per le acque” riporta un metodo ufficiale per la determinazione della Richiesta Chimica di Ossigeno (COD): 5130 Richiesta Chimica di Ossigeno. Il manuale e Linea Guida APAT-IRSA/CNR N°29/2003 è una raccolta di metodi di riferimento per le misure di diversi parametri da monitorare nella matrice acquosa per i laboratori del Sistema Agenziale.

Il metodo 5130 è basato sull'ossidazione delle sostanze organiche ed inorganiche presenti nelle acque, mediante una soluzione di dicromato di potassio in presenza di acido solforico concentrato e di solfato di argento; l'eccesso di dicromato è titolato con solfato di ammonio e ferro. Il metodo, in funzione della concentrazione di COD (> 50 mg L⁻¹ e compresa tra 20 e 50 mg L⁻¹), nonché della presenza di cloruri (in concentrazioni Cl⁻ > 1000 mg L⁻¹ e rapporto in peso COD/Cl⁻ < 0,1), prevede diversi procedimenti.

I principali reattivi utilizzati nel metodo APAT-IRSA/CNR sono sintetizzati in tabella 3.6, tale tabella inoltre riporta alcuni codici di pericolo dei reattivi indicati secondo il Regolamento CE 1272/2008 del 16 Dicembre 2008 (CLP). In particolare come evidente il dicromato di potassio risulta cancerogeno di categoria 1B (H350, Può provocare il cancro) oltre ad essere H340 cioè può

provocare alterazioni genetiche), il solfato di mercurio (II) invece risulta H410 cioè *Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata*.

Reattivi	n. CAS	Classificazione CLP
Solfato di mercurio (II) HgSO ₄	7783-35-9	H410
Solfato d'argento Ag ₂ SO ₄	10294-26-6	H318
Dicromato di potassio	7778-50-9	H350, H340
Acido solforico H ₂ SO ₄	7664-93-9	H314, H290
Solfato di ammonio e ferro (II)	7783-85-9	non incluso nella Tab. 3.1 del CLP (Parte 3)
Idrogeno ftalato di potassio (KHF)	877-24-7	non incluso nella Tab. 3.1 del CLP (Parte 3)

Tabella 3.6 – Reattivi del metodo APAT IRSA CNR N°29/2003 5130

Nell'ambito delle attività istituzionali di ISPRA, finalizzate a garantire la confrontabilità dei dati di monitoraggio ambientale prodotti sul territorio nazionale dal Sistema delle Agenzie Regionali e Provinciali di Protezione dell'Ambiente (ARPA/APPA), tra il 2010 e il 2013 sono stati organizzati due studi collaborativi che hanno permesso di convalidare la procedura di misurazione della Richiesta Chimica di Ossigeno (COD) in matrice acquosa (acque naturali e di scarico: urbane ed industriali), mediante il metodo in cuvetta.

Il principio del metodo dei test in cuvetta si basa anch'esso su ossidazione del campione con dicromato di potassio in ambiente acido da acido solforico e successiva lettura spettrofotometrica, analogamente al metodo ISO 15705:2002 [26], ma presenta maggiore rapidità di esecuzione rispetto al metodo APAT-IRSA 5130 e soprattutto comporta l'utilizzo di minori quantità di reattivi cancerogeni e/o pericolosi per l'ambiente (già predosati in sistemi chiusi) risultando in questo modo di maggiore sostenibilità per la salute dell'operatore analista e per l'ambiente.

Il metodo mediante test in cuvetta validato è stato pubblicato in Manuali e linee guida 117/2014 [27] come "Procedura di misurazione per la determinazione della Richiesta Chimica di Ossigeno (COD) mediante test in cuvetta: Metodo 5135". Tale metodo viene ora quindi utilizzato, in alternativa al metodo APAT-IRSA/CNR 5130, come metodo ufficiale, nelle analisi di routine da molti laboratori per i campi di applicazione dei kit usati durante gli studi collaborativi (campioni acquosi fino a [Cl]⁻ = 2000ppm).

Il primo studio (ISPRA SC004), a cui hanno partecipato sia laboratori delle ARPA/APPA che laboratori privati, è stato condotto su un campione di acqua ultrapura con aggiunta di ftalato di potassio e acidificata con acido solforico. I risultati dello studio ISPRA SC004 e la discussione che ne è seguita con i laboratori partecipanti e con le ditte fornitrici e produttrici dei test in cuvetta hanno suggerito di procedere ad un secondo studio collaborativo (ISPRA SC005). Il secondo studio collaborativo è stato condotto su campioni reali a diversi livelli di concentrazione di COD, costituiti da acque reflue urbane e acque reflue industriali caratterizzate da un'intrinseca maggiore eterogeneità dovuta alla presenza di solidi sospesi.

Durante lo studio ISPRA SC004 i laboratori hanno eseguito le misure con i seguenti test in cuvetta:

- LCK414, LCK 514 e LCK 614 prodotti e forniti da HACH;
- Spectroquant 114540, 114895 e 114541, forniti da WVR International;
- Lovibond LR, MR e HR, forniti da Italscientifica.

Invece durante lo studio di convalida ISPRA SC005 i laboratori hanno condotto le prove con i seguenti test in cuvetta:

- LCK514 e LCK714 prodotto e fornito da HACH s.r.l.;
- Spectroquant 114541, 114960 fornito da WVR International PBI s.r.l..

Tutti i test in cuvetta utilizzati nei due Studi collaborativi ammettevano una interferenza massima per i Cloruri come descritto in tabella 3.7. Tale concentrazione in massa ammessa per i Cloruri risulta ben al di sotto di quella che caratterizza le acque di scarico di un impianto conciarario e dell'acqua del mare.

ARPA Toscana, all'interno delle attività del GdL 5, ha individuato kit Spectroquant e Hach che ammettono tenori di Cloruri molto elevati solo attualmente in commercio.

Infatti i kit Spectroquant cod. 1.17058.0001 e 1.17059.0001 sono utilizzabili per acque di mare con elevati contenuti di cloruri, quindi ammettono una tolleranza in % del sale NaCl fino al 3,5% , (circa 18.000 mg/L di Cl⁻) mentre i precedenti kit tolleravano fino a 0,4% in peso di NaCl ovvero circa 2000 mg/L di Cl⁻.

I kit Spectroquant Merck in oggetto hanno i seguenti codici e range di lavoro:

- a) 5-60 mg/L di COD cod. 1.17058.0001;
- b) 50-3000 mg/L di COD cod. 1.17059.0001.

La ditta Hach dispone invece dei seguenti kit:

1. LCK 914: 5 – 60 g/L di COD. Il metodo è valido per un contenuto di cloruri nel campione fino a 10000 mg/L.
2. LCK 1014: 100–2000 mg/L di COD. Il metodo è valido per un contenuto di cloruri nel campione (originale o diluito) fino a 4000 mg/L.

LCK 414, LCK 514, LCK 614 e LCK 714 (Hach)	Il metodo è valido per un contenuto di cloruri nel campione (originale o diluito) fino a 1500 mg/L.
Spectroquant 114540, 114895 e 114541	Limite di tolleranza sale NaCl in %: 0.4 %
Lovibond LR, MR e HR	E' possibile misurare campioni il cui contenuto di cloruro non superi 1000 mg/L.

Tabella 3.7 – Livello di Cloruri ammesso nei kit di ISPRA-SC004 e ISPRA-SC005

I nuovi kit in commercio individuati e l'organizzazione di un terzo Studio Collaborativo da parte del Servizio di Metrologia Ambientale di ISPRA per la misura di COD potrebbero permettere di estendere il campo di applicabilità del Metodo 5135 e consentire anche per le acque a maggiore contenuto di Cloruri l'applicazione di una procedura di misurazione di Richiesta Chimica di Ossigeno a maggiore sostenibilità per la salute dell'operatore di laboratorio e per l'ambiente.

3.2.3 *Questione formaldeide*

La formaldeide, comunemente denominata formalina, (CAS 50-00-0) è un composto mutageno e carcinogeno ed è stata classificata dal REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 con le seguenti indicazioni di pericolo:

H301 + H311 + H331	Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H350	Può provocare il cancro..
H370	Provoca danni agli organi

Il suo impiego è previsto da molteplici metodi quali il metodo APAT-CNR/ IRSA 5010 [28] dove viene impiegata come soluzione di riferimento per la determinazione delle aldeidi nelle acque naturali e di scarico, nel metodo APAT-CNR/ IRSA 5170 per la determinazione dei tensioattivi anionici, dove viene consigliato l'uso di formaldeide al 37% per stabilizzare i campioni, ed altri (UNICHIM 487 Determinazione della formaldeide nell'aria [29], ASTM E724-98 Test eco tossicologico [30], VDI

3862-6:2004 Gaseous emission measurement [31]). La sostituzione della formaldeide utilizzata come reagente con sostanze alternative nei metodi chimici menzionati è auspicabile.

Tuttavia uno dei suoi utilizzi principali ed ancora attuale è quello come fissativo per materiali ed organismi biologici come si è evidenziato nell'analisi del database che è stato compilato dai diversi laboratori del sistema agenziale e da ISPRA dietro richiesta del presente GdL e riportato in Allegato B.

La Direttiva 60/2000/CE ha introdotto per la protezione delle acque un approccio ecologico, integrato tra il monitoraggio chimico e biologico. Lo stato ecologico di un sistema acquatico è individuato dal rilevamento di determinati elementi biologici, definiti nella normativa vigente, utilizzati appunto quali elementi di qualità biologica.

Ad esempio gli elementi biologici richiesti per il monitoraggio delle acque dolci superficiali rappresentano i differenti livelli trofici dell'ecosistema: i produttori primari (fitobenthos, fitoplancton, macrofite) e i diversi livelli di consumatori (macroinvertebrati e fauna ittica); e a supporto delle analisi di queste comunità vengono studiati poi gli elementi chimico-fisici e idromorfologici.

La Tabella 3.8 sintetizza le condizioni di conservazione/i fissativi utilizzati nei protocolli di campionamento degli elementi biologici nei fiumi e nei laghi. Tali protocolli di campionamento costituiscono le metodiche di riferimento per il monitoraggio biologico delle acque superficiali interne e sono raccolti, insieme alle metodiche di riferimento per il campionamento degli elementi di qualità fisico-chimica nel Manuale Linea Guida 111/ 2014 [32].

Nelle acque di transizione gli elementi di qualità biologica individuati dalla stessa normativa sono: fitoplacton, macroalghe, angiosperme, macroinvertebrati bentonici e fauna ittica.

ISPRA in collaborazione con l'Università del Salento ha pubblicato nel Febbraio del 2009 il testo "Nuovi approcci metodologici per la classificazione dello stato di qualità degli ecosistemi acquatici di transizione" [33].

Le metodologie in esso approfondite riguardano gli elementi biologici fitoplacton e macroinvertebrati bentonici. La Tabella 3.9 riassume i fissativi possibili per i due tipi di organismi.

Infine per le acque marino-costiere la Direttiva 60/2000/CE stabilisce come elementi di qualità biologica il fitoplacton, le macroalghe e angiosperme ed i macroinvertebrati bentonici.

Sul sito ISPRA in particolare al link (<http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/anno-2009/pubblicazione-amb-mar>) è possibile scaricare le "Schede metodologiche per il campionamento e l'analisi degli Elementi di Qualità Biologica per le attività di monitoraggio dell'ambiente marino costiero, condotte ai sensi delle vigenti normative. Nella Tabella 3.10 sono indicati le condizioni di conservazione e/o i possibili fissativi utilizzabili per i diversi organismi.

N.	Metodica di riferimento	Condizioni di conservazione/ Fissativo
2010	Protocollo di campionamento e analisi dei macroinvertebrati bentonici dei corsi d'acqua guadabili	Alcool etilico 75-90% in quantità adeguata per la conservazione degli organismi
2020	Protocollo di campionamento e analisi delle diatomee bentoniche dei corsi d'acqua	Etanolo in modo tale da avere una concentrazione finale al 70% o Soluzione di Lugol o soluzione di formaldeide tamponata a pH=7 al 4% v/v
2030	Protocollo di campionamento e analisi delle macrofite dei corsi guadabili	Identificazione entro 2-3 gg dal campionamento: refrigerazione. Identificazione dopo 2-3 gg dalla raccolta: per le fanerogame, le pteridofite e le briofite si deve effettuare un procedimento di essiccazione, per le alghe e i piccoli organismi è necessaria la formalina al 3%. E' possibile l'utilizzo di fissativi diversi dalla formalina se garantiscono analoghe prestazioni della formaldeide nella conservazione a medio e lungo periodo.
2040	Protocollo di campionamento e analisi della fauna ittica dei sistemi lotici guadabili	Ghiaccio
3010	Protocollo di campionamento dei macroinvertebrati negli ambienti lacustri	Se il campione è esaminato non da vivo deve essere fissato sul posto con formalina al 10%. Se però il campione è esaminato entro pochi giorni dal prelievo si può ridurre la formalina. Nota Se lo smistamento dei campioni termina dopo pochi giorni rispetto al prelievo è possibile non fissare in formalina e conservare in frigo fino alla fine dell'attività di smistamento. L'alcool può sostituire la formaldeide soltanto quando il detrito non è abbondante. La conservazione dopo la fissazione con formaldeide può avvenire per lungo tempo in alcool all'80% o anche al 50%.
3020	Protocollo di campionamento di fitoplacton in ambiente lacustre	Soluzione di Lugol. I subcampioni destinati alle analisi vanno conservati lontano da luce solare diretta o da fonti di calore sia durante il trasporto, che in laboratorio. Il campione destinato all'analisi della clorofilla va tenuto in condizioni refrigerate e al buio sino all'analisi stessa, che deve essere effettuata entro le 24 h.
3030	Protocollo di campionamento della fauna ittica nei laghi italiani	Tutto il materiale delle reti deve essere conservato in cella frigorifera ad una temperatura di 3-4 °C circa, per uno-due giorni al massimo
3040	Protocollo di campionamento e di analisi di macrofite acquatiche in ambiente lacustre	Borsa frigorifera per la conservazione dei campioni
3050	Protocollo di campionamento e di analisi delle diatomee bentoniche dei laghi e degli invasi	stoccaggio in un luogo freddo e buio (frigorifero) fino a 24 ore prima della preparazione o aggiunta di conservante (conservazione a lungo termine) quale etanolo al 70% con un rapporto 3:1 o in alternativa la soluzione di Lugol. Nota I campioni possono essere anche congelati.

Tabella 3.8 – Condizioni di conservazione/i fissativi utilizzati nei protocolli di campionamento degli elementi biologici nei fiumi e nei laghi.

Metodologia	Fissativo
Fitoplacton	<ul style="list-style-type: none"> • soluzione di formaldeide costituita da formaldeide al 40% diluita al 20% con acqua distillata e tamponata preferibilmente con dolomite o con 100g/L di esametilentetramina a pH finale neutro o leggermente basico. • soluzione di iodio e potassio ioduro detta “soluzione di Lugol”.
Macroinvertebrati bentonici	<ul style="list-style-type: none"> • soluzione di etanolo al 70% L'alcool etilico è un buon agente conservante, particolarmente adatto alla preservazione di crostacei ed insetti, ma al contrario della formalina non fissa i tessuti. Il suo principale vantaggio è di possedere una bassa tossicità. • soluzione di formalina al 4% tamponata

Tabella 3.9 – Fissativi possibili per gli elementi biologici fitoplacton e macroinvertebrati negli ecosistemi acquatici di transizione

Scheda tecnica	Condizioni di conservazione/ Fissativo
Fitoplacton	<ul style="list-style-type: none"> • soluzione di formaldeide al 20% tamponata con esametilentetramina a pH basico 7.0-7.2. • “soluzione di Lugol”. L'aggiunta di Lugol non è consigliata per la lettura a epifluorescenza e al microscopio a scansione.
Macroalghe (Metodo Carlit)	Conservazione degli eventuali campioni prelevati mediante essiccazione
Posidonia Oceanica	-
Macrozoobenthos di fondi mobili	Il fissativo più utilizzato è una soluzione di formalina al 10% (per diluizione della formaldeide al 40%), neutralizzata (con carbonato di Calcio o Borace, Tetraborato di Sodio a saturazione) e acqua di mare. Nel caso il campione contenga notevoli quantità di sostanza organica tale percentuale andrà aumentata

Tabella 3.10 – Condizioni di conservazione e/o i possibili fissativi utilizzabili per gli elementi di qualità biologica il fitoplacton, le macroalghe e angiosperme ed i macroinvertebrati bentonici stabiliti nelle acque marino-costiere dalla Direttiva 60/2000/CE

Nelle metodiche di riferimento per le acque superficiali interne sono stati in generale sempre individuati dei fissativi alternativi alla formaldeide, invece nelle acque di transizione e marino costiere le metodologie di campionamento riportate ammettono ancora quasi sempre la formalina oltre ad un fissativo alternativo a base di alcool etilico. La formalina in questi casi risulta la tecnica di fissazione di elezione, per quanto riguarda l'efficienza di conservazione, i tempi di conservazione, le specie di organismi analizzati e le tecniche di analisi. Questo spiega quindi le motivazioni dell'ancora diffuso utilizzo della formaldeide, agente cancerogeno, nella fissazione dei materiali biologici.

Alla luce di quanto sopra il presente Gruppo di Lavoro ha cercato esperienze di laboratorio condotte o in essere all'interno del sistema ARPA/APPA e ISPRA volte alla sostituzione della formaldeide come fissativo degli organismi biologici con un'altra sostanza ugualmente efficace nella conservazione ma priva delle caratteristiche di alta cancerogenità proprie della formalina. Tale obiettivo è di grande

rilievo e già di grande interesse per il Centro Interagenziale Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro, formato dagli RSPP dell'SNPA.

Il problema dell'utilizzo di formaldeide è ben presente anche presso Laboratorio Benthos della sede ISPRA di Castel Romano, promotore già da tempo di un progetto "Formalina free", che prevede la sperimentazione di nuovi fissativi per campioni biologici in sostituzione alla formaldeide. In mancanza di finanziamento però tale progetto è rimasto una semplice proposta, pertanto il GdL si è attivato ed ha portato sul tavolo del CTP una richiesta di fondi del Progetto.

Nell'Allegato E viene riportata la scheda del Progetto aggiornata al 2016 e la procedura di manipolazione stilata dal Laboratorio Benthos di Castel Romano, volta a un utilizzo della formalina nella "massima sicurezza".

In ARPA Toscana è stata individuata una attività di sostituzione della formaldeide per la conservazione delle alghe. L'esperienza è presentata nel paragrafo 3.2.4

In ARPAE Emilia Romagna, alcuni laboratori utilizzano per la determinazione delle macrofite dei contenitori già pronti con formaldeide alla concentrazione richiesta, in modo da non dover manipolare le soluzioni concentrate al 37%.

Sostituzione della formaldeide per la conservazione delle alghe

Nei Manuali e Linee Guida ISPRA n.111/2014 nel PROTOCOLLO di CAMPIONAMENTO e ANALISI delle MACROFITE dei CORSI D'ACQUA GUADABILI (2030), al punto 4.3 Materiale da laboratorio è previsto l'uso di formalina per la conservazione dei campioni, aggiungendo all'acqua di raccolta un volume di formalina tale da far raggiungere una diluizione pari al 3 %. Vengono raccomandate precauzioni di sicurezza in relazione alla tossicità del reagente e vengono sconsigliate altre modalità di fissazione poiché non garantiscono che venga conservata la visibilità ottimale di tutte le parti dell'organismo necessarie per la determinazione. Viene però lasciata la possibilità di utilizzare, in alternativa alla formalina, modalità di fissazione con preparati che abbiano analoghe prestazioni nella conservazione a medio e lungo periodo, ovvero che garantiscano la conservazione dell'agglomerato algale campionato, delle caratteristiche morfologiche e cromatiche fondamentali per la determinazione, la possibilità di rivedere e sottoporre a verifica l'identificazione dei campioni.

Recentemente è stato proposto come sostituto della formaldeide l'utilizzo del "FineFIX Concentrate". Dalla sua scheda di sicurezza il preparato risulta considerato come non pericoloso essendo costituito da alcool polivinilico, glicole propilenico, sorbitolo e acqua.

I depliant illustrativi del prodotto dichiarano che a livello macroscopico, l'uso di FineFix come fissativo per istologia non è diverso da quello della Formalina, anche se la sua azione sui tessuti è differente e si riflette a livello dell'aspetto macroscopico del campione, cioè la consistenza del campione è aumentata, con preservazione dell'elasticità del tessuto (consistenza di tipo gommoso), con un colore macroscopico prodotto con FineFix molto simile a quello del campione allo stato fresco, diversamente dall'aspetto grigiastro del materiale fissato in Formalina.

Il fissativo è dichiarato adatto per conservare tessuti animali, con aggiunta di alcool.

Nel caso delle alghe può causare perdita del colore rendendo difficoltoso il riconoscimento degli organuli della cellula, utili per la determinazione.

Tale problema si poteva tuttavia manifestare anche con la formalina. Da osservazioni condotte, il fissativo, almeno per un breve periodo, può aiutare parzialmente a conservare il campione permettendo, in caso di dubbi, di potere rivedere le alghe di interesse. Sono in corso ulteriori prove per una migliore verifica dell'efficacia del conservante in termini di intervallo di tempo e grado di alterazione del materiale vegetale.

3.2.4 Tensioattivi anionici

L'identificazione e la quantificazione di tensioattivi in matrici ambientali è un'operazione analiticamente complessa per la natura di questi inquinanti, presenti nei formulati commerciali sotto forma di miscele di omologhi, oligomeri ed isomeri di composti con caratteristiche chimiche diverse (anionici, cationici, non ionici ed anfoteri).

Ad oggi i metodi ufficiali (APAT- IRSA/ CNR 5170 Tensioattivi anionici e 5180 Tensioattivi cationici) e normati UNI 10511-1 [34] disponibili per la determinazione di routine dei tensioattivi in matrice acquosa sono basati su reazioni colorimetriche, precedute da estrazioni più o meno selettive e sono tutti metodi cumulativi (Anionici e Non Ionici) che, oltre ad essere spesso poco affidabili, specie nel caso di matrici complesse, non forniscono alcuna informazione sulla composizione di omologhi od oligomeri, né sulla lunghezza della catena idrofobica, né sulla composizione della miscela e sulla

presenza di eventuali metaboliti. Fare riferimento alle schede metodi contenute nell'Allegato V per un descrizione breve dei metodi sopra menzionati

La normativa vigente nelle acque di scarico, matrice per la quale il numero di analisi per la determinazione del parametro tensioattivi è molto rilevante, stabilisce un limite per i tensioattivi totali pertanto i metodi non rispondono adeguatamente e pienamente alle esigenze analitiche dei laboratori di controllo. Più volte è stato richiesto un aggiornamento dei metodi ufficiali ma questo ad oggi ancora non è avvenuto.

La maggior parte delle ARPA/APPA di fronte all'esigenza di minimizzare i costi delle analisi e i tempi di risposta, ma in linea con quanto richiesto dalla normativa, impiega i test in cuvetta per la misura del parametro tensioattivi per lo screening ed effettua le misure secondo i metodi ufficiali (procedure più lunghe e a maggior utilizzo di sostanze chimiche anche pericolose) laddove è necessario confermare un superamento. Alcuni laboratori invece si servono di strumentazione automatica, cioè metodi di analisi colorimetrici a flusso continui basati sugli APHA Standard Methods 5540C e 5540D [35](vedi Allegato F).

Nel frattempo alcuni laboratori Agenziali, sempre per la misura dei tensioattivi, si sono orientati verso l'utilizzo di nuove metodologie analitiche, basate sull'impiego di tecniche strumentali specifiche quale ad esempio la Cromatografia Liquida ad alta prestazione (HPLC) con rivelatori a fluorescenza, evaporativi o spettrometria di massa .

Tale tecnica permette infatti di separare le tre principali classi di tensioattivi (cationici, non ionici e anionici) in una sola corsa analitica, ottenendo in più informazioni quantitative sulla presenza di isomeri e metaboliti degli stessi. Chiaramente questa scelta comporta un investimento economico iniziale superiore rispetto alle procedure di misura basate sull'analisi colorimetrica sia per l'acquisizione della strumentazione che per la formazione del personale ma in prospettiva un guadagno sia in rapidità di esecuzione delle misure che in termini di maggiore compatibilità ambientale nella scelta di sostanze a minore pericolosità e nell'utilizzo di minori quantitativi di reagenti e solventi.

Nell'ottica di aggiornare i metodi ufficiali per i motivi sopraesposti (minori tempi di analisi, rispondenza con il limite di legge per le acque di scarico, sostituzione di sostanze pericolose come il cloroformio H420 e H351 usato nel metodo APAT IRSA CNR 5170 per la determinazione dei tensioattivi anionici etc) il Gruppo di Lavoro ha effettuato una ricerca delle esperienze analitiche esistenti nei laboratori dell'SNPA o di altri Enti di Ricerca per individuare un metodo che potesse essere usato in alternativa ai metodi ufficiali dopo uno studio di convalida (Studio Collaborativo), come già fatto per la procedura di misurazione per la determinazione degli idrocarburi totali nelle acque (ISPRA MIg 117/2015).

Un metodo inizialmente considerato papabile è stato quello sviluppato dall'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano in collaborazione con il CNR IRSA: "Determinazione di tensioattivi anionici e non ionici in matrici acquose mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) e rivelazione UV-ELSD" [36] (vedi Allegato F) con l'estrazione in fase solida, SPE (Solid Phase Extraction). Tale metodo permette la misura di tensioattivi in acqua mediante utilizzo dell'UV e uno dei due rivelatori evaporativi (o CAD "Charged Aerosol Detector" o ELSD "Evaporative Light Scattering Detector") interfacciati all'HPLC (vedi Allegato F).

Da una valutazione successiva però tale metodo non è risultato un metodo consolidato nel Sistema Agenziale perché i rivelatori evaporativi impiegati insieme all'UV cioè il CAD o l'ELSD, non sono diffusi nel territorio nazionale e l'organizzazione di uno studio di convalida con questa premessa non è fattibile. D'altro canto non è stata individuata nei laboratori ARPA/APPA una procedura di misura di tensioattivi consolidata basata sulla determinazione in HPLC- fluorescenza o spettrometria di massa nella quale non fossero utilizzate sostanze pericolose cancerogene (vedi Allegato F, scheda metodo Corila).

In conclusione per rispondere anche se solo in parte all'esigenza dei laboratori di controllo di condurre le analisi per la misura dei tensioattivi in tempi più brevi con l'utilizzo di minori quantitativi di reagenti/solventi anche a carattere pericoloso, il GdL ha chiesto all'ex Servizio di Metrologia Ambientale di ISPRA la disponibilità ad organizzare uno studio collaborativo per la misura dei tensioattivi anionici in acque di scarico mediante test in cuvetta (principio MBAS- sostanze attive al blu di metilene), perché tale metodica rispetto al metodo ufficiale permette l'uso di minori quantità di cloroformio (H351 e H420) in sistemi chiusi, risultando quindi un metodo più compatibile dal punto di vista ambientale e della salute dell'operatore.

ISPRA si è resa disponibile ed ha proposto ai laboratori ARPA/APPA di effettuare uno studio di convalida, chiaramente previa verifica della sua fattibilità, durante il quale si possa anche mettere a confronto il metodo ufficiale APAT- IRSA/ CNR 5170 ed il metodo in cuvetta che si basa sullo stesso principio.

Tale studio collaborativo permetterà di convalidare entrambe le procedure di misurazione, definire quindi lo scarto tipo di riproducibilità (S_R) e lo scostamento sistematico mediante la misura di un MRC in matrice o sintetico. Tali grandezze sono necessarie per il calcolo dell'incertezza di misura. In base ai risultati dello Studio Collaborativo verrà valutata la rispondenza dei due metodi in esame ai fini del monitoraggio degli scarichi.

Studio di fattibilità allo Studio Collaborativo per la misura dei tensioattivi anionici in acque di scarico mediante test in cuvetta

Lo studio di fattibilità per lo Studio Collaborativo è stato condotto nei laboratori dell'ex Servizio di Metrologia Ambientale di ISPRA nei mesi di Giugno e Luglio 2016. Precedentemente all'attività di produzione dei materiali di riferimento i laboratori Agenziali sono stati consultati per delineare al meglio la logistica della produzione dei materiali di prova (contenitori di campionamento, tipo di stabilizzante, Materiali di Riferimento usati per le analisi etc).

I tre Materiali di Riferimento prodotti sono stati ottenuti per aggiunta di Sodio dodecil benzensolfonato ad acqua di scarico reale precedentemente stabilizzata con formaldeide, come richiesto dal metodo ufficiale APAT- IRSA/ CNR 5170, e analizzata per individuare il livello di tensioattivi anionici contenuto.

L'aggiunta del tensioattivo anionico è stata tale da ottenere una concentrazione di tensioattivo anionico per i tre materiali di circa 0,5 mg/L, 1,0 mg/L e 2,0 mg/L.

Sui materiali prodotti sono state eseguite le prove di eterogeneità residua e stabilità per verificare l'idoneità dei materiali allo Studio collaborativo.

La valutazione dell'omogeneità tra-bottiglie è stata condotta sui tre materiali di prova effettuando le misure di tensioattivo anionico con il metodo in cuvetta. Il metodo per la valutazione segue la procedura interna del Servizio che prevede, per ogni materiale di prova, l'analisi in condizioni di ripetibilità (in una singola sessione analitica) di 10 unità analizzate in triplicato.

L'omogeneità tra-bottiglie è stata quindi valutata tramite l'Analisi della Varianza (ANOVA) dopo aver verificato la normalità delle misure utilizzando i test di Shapiro Wilk e di Kolmogorov Smirnov. I materiali prodotti sono risultati omogenei e idonei allo svolgimento dello studio collaborativo.

Le prove di stabilità sono state effettuate sui materiali di prova in condizioni isocrone (A.M.H. Van der Veen, et al, 2001 [37]) nell'arco di un periodo di 22 giorni alla temperatura di 20°C controllando il parametro tensioattivi anionici oggetto dello studio di fattibilità. Tale metodo prevede l'esecuzione, in un'unica soluzione, di tutte le misure di tensioattivi anionici sulle bottiglie di ciascun materiale selezionate: cinque unità per ogni intervallo di tempo (per un totale di 15 per 3 intervalli di tempo) e cinque unità appartenenti al gruppo di riferimento). Le misure eseguite sulle unità mantenute alla temperatura di 20°C, per la durata dello studio collaborativo sono state poste a confronto con i risultati delle misure ottenute sulle bottiglie mantenute a 4°C per tutto il tempo della prova di stabilità (gruppo di riferimento). La temperatura di 4°C rappresenta la temperatura di conservazione del campione alla quale si assume non si possano manifestare fenomeni degradativi. I materiali sono risultati stabili.

Lo studio di fattibilità allo Studio Collaborativo ha dato quindi esito positivo, ISPRA è confidente di portare a termine lo Studio Collaborativo in un prossimo futuro.

3.3 Riduzione del rischio con l'utilizzo di corretti dispositivi collettivi

Come previsto dal d.lgs 81/08 [38] CAPO II, SEZIONE II, Articolo 235 Sostituzione e riduzione

1. *Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.*
2. *Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.*
3. *Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.*

Nelle attività di laboratorio risulta molto difficile sostituire le sostanze cancerogene o utilizzarle in un sistema chiuso pertanto si ricorre all'utilizzo di Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC), nelle attività analitiche i DPC sono rappresentati dalle cappe da laboratorio.

Sono dei dispositivi utilizzati per confinare le emissioni pericolose (gas, vapori, fumi, aerosol) prodotte durante l'attività lavorativa impedendone così la loro dispersione nell'ambiente lavorativo, inoltre la presenza di uno schermo frontale protegge l'operatore da eventuali schizzi.

Le cappe utilizzate nei laboratori chimici si possono suddividere in 2 categorie in base alla tipologia di trattamento dell'aria: ad espulsione esterna o a ricircolo.

Nelle cappe ad espulsione l'aria viene aspirata da un elettroventilatore attraverso un condotto di aspirazione e convogliata all'esterno.

Le cappe a ricircolo sono dotate di gruppi filtranti a bordo macchina, che consentono di trattenerne le sostanze inquinanti e reimmettere l'aria direttamente nel locale, senza necessità di canalizzarla all'esterno. La scelta e la durata del filtro dipende dalle caratteristiche chimico-fisiche e dalle quantità di sostanze chimiche manipolate.

3.3.1 La Normativa

L'esigenza di uniformare le varie normative nazionali del settore e di definire nuovi standard prestazionali delle cappe chimiche ha portato all'emanazione della normativa comunitaria UNI EN 14175 che fissa i requisiti di sicurezza, il controllo e la verifica di efficienza per tutte le nuove cappe aspiranti immesse sul mercato comunitario ed è suddivisa in 7 parti:

Parte 1: Vocabolario

Fornisce le definizioni per i termini inerenti le cappe di aspirazione di impiego generale.

Parte 2: Requisiti di sicurezza e di prestazione

Descrive i requisiti di sicurezza e prestazione e gli scopi delle cappe di aspirazione di uso generale.

Parte 3: Metodi per prove di omologazione

Descrive i metodi per le prove di omologazione aventi lo scopo di valutare la sicurezza e le prestazioni delle cappe di aspirazione.

Parte 4: Metodi di prova in loco

Descrive alcuni metodi di prova in loco per le seguenti cappe di aspirazione di impiego generale: - cappe progettate secondo la parte 2 della presente norma e sottoposte a prova di tipo secondo la parte 3 della presente norma; - cappe progettate secondo la parte 2 della presente norma e non sottoposte a prova di tipo.

Parte 5: Raccomandazioni per l'installazione e la manutenzione

Descrive alcune raccomandazioni per l'installazione e la manutenzione delle cappe di aspirazione in accordo con la UNI EN 14175 parte 2 e parte 6.

Parte 6: Cappe di aspirazione a volume d'aria variabile

Descrive alcune raccomandazioni per l'installazione e la manutenzione delle cappe di aspirazione in accordo con la UNI EN 14175 parte 2 e parte 6.

Parte 7: Cappe aspiranti per uso vapori forti e acidi caldi

E' applicabile a:

- cappe chimiche per manipolazione ad alta temperatura;

- cappe chimiche per manipolazione ad alta temperatura in combinazione con assimilazioni acide;
- cappe chimiche per la manipolazione di acido perclorico;
- cappe chimiche per la manipolazione di acido fluoridrico.

3.3.2 Verifica di efficienza di una cappa chimica

Per le cappe di nuova installazione la norma UNI EN 14175 Parte 4 prevede che vengano effettuate le prove di contenimento in loco per verificare l' idoneità all' utilizzo delle sostanze che verranno manipolate

La valutazione delle prestazioni di una cappa, può essere condotta secondo due diversi approcci:

- velocità frontale media
- capacità di contenimento.

◆ Velocità frontale media

La Tab.3.11, tratta dal Manuale Unichim 192/3 [39], riporta le indicazioni sulla velocità frontale in cappe per laboratori chimici fornite da normative di stati europei e da enti statunitensi. Tali indicazioni prevedono che la velocità frontale sia attestata fra 0,4 m/s (per sostanze a bassa pericolosità per la salute, cioè con TLV > 100 mg/m³ o Indice intrinseco di tossicità = 1) e 0,85 m/s (per sostanze molto tossiche, cancerogene, mutagene cioè con TLV < 1 mg/m³ o Indice intrinseco di tossicità = 3)

Per le sostanze chimiche a cui non è stato associato un TLV, la relativa tossicità è attribuita tramite l'Indice Intrinseco di Tossicità, in funzione delle frasi di rischio "R"/indicazioni di pericolo "H". Nella Tabella 3.12 sono riportate le corrispondenze tra Indice intrinseco di tossicità e Frasi R/H.

La misura della velocità frontale media deve essere effettuata con anemometro secondo le modalità previste da UNI EN 14175:3/4, con apertura frontale ad un' altezza di 40 cm.

Velocità frontale								
m/min	18	30	40	45	50	60	70	80
m/s	0,3	0,5	0,66	0,75	0,83	1	1,17	1,33
CIRC. Min. Lav. e Prev. Soc. n. 46 del 12 giugno 1979 - (ammie arom.)			↔					
AFNOR XP X15-203	0,4	→						
BS 7258	↔	→						
	probab. insuff.							
SCHEDE COSHH		→				→		
		vapori				polveri		
ACGIH – INDUSTRIAL VENTILATION	↔							
SAMA	0,4	0,5	0,7 m/s					
	A - bassa nociv.	B - media tossic.	C - alta toss., cancer., mutag.					
RACCOMANDAZIONE UNICHIM		0,4	↔		0,85	1 m/s		
						(polveri)		

Tabella 3.11– Indicazioni di fonte normativa, legislativa e di buona tecnica riguardanti la velocità frontale in cappe per laboratori chimici (UNICHIM M192/3)

Bassa Tossicità I.T.=1		Media Tossicità I.T.=2		Alta Tossicità I.T.=3	
R36	H319	R20	H332	R26	H330
R37	H335	R21	H312	R62	H361f
R66	EUH066	R34	H314	R63	H361d
		R67	H336	R64	H362
		R23	H330/H331	R68	H341
		R42	H334	R33	H373
				R40	H351
				R48	H373
				R45	H350
				R49	H350i
				R46	H340

Tabella 3.12– *Indice Intrinseco di Tossicità in funzione delle Frasi “R”/Indicazioni “H” per sostanze per le quali non è noto il TLV.*

◆ **Capacità di contenimento**

La misura della capacità di contenimento deve essere eseguita in conformità alla Norma UNI-EN 14175- parte 4.

Le prove vengono effettuate liberando un gas tracciante (SF₆ esafluoruro di zolfo) internamente alla cappa e misurata la concentrazione media del gas SF₆ in atmosfera, su più punti sul fronte della cappa. La concentrazione del gas tracciante quantifica la fuoriuscita a livello dell’apertura (contenimento) espressa in ppm.

Conoscendo l’efficienza del contenimento, la quantità della sostanza, la durata della manipolazione e l’evaporazione stimata si può calcolare quale sarà la concentrazione in ppm all’esterno della cappa e raffrontarla con il TLV reperibile sulla scheda di sicurezza.

La prova del contenimento identifica con maggiore precisione l’efficienza della cappa ma presenta alcuni limiti in quanto il TLV non è reperibile per tutte le sostanze e la stima dell’evaporazione comporta dei calcoli abbastanza complessi.

4. ALLEGATI

4.1 Allegato A- POD del GdL Area 1 Prodotto 5

PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO PER LE ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE DI SISTEMA

NOME DELLA ATTIVITA'
Ricognizione dei metodi analitici che utilizzano reagenti ozono alteranti e/o cancerogeni.
PRODOTTO NUMERO: 5
AREA ATTIVITA' Area 1- Formazione del dato

1. Scopi e obiettivi

1.1 Background e obiettivi	<ul style="list-style-type: none">✓ SNPA - PT 2014-2016,✓ SNPA - PT 2014-2016 “Prospetto Prodotti Candidature”,✓ Ricognizione dei metodi analitici che utilizzano reagenti ozono alteranti e/o cancerogeni,✓ Valutazione di alternative maggiormente compatibili dal punto di vista ambientale ai metodi con utilizzo di reagenti ozono alteranti e/o cancerogeni.
---------------------------------------	---

2. Principali riferimenti normativi

NORMA	Titolo
Regolamento (CE) N.1005/2009	Regolamento (CE) N.1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Regolamento Commissione Ue 291/2011	Regolamento sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idrofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio
DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
REGOLAMENTO CE 1272/2008 del 16 Dicembre 2008,	relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che, adottando i criteri del GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), sostituisce le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.

3. Struttura dell'attività

3.1. Componenti del Gruppo di Lavoro	<p>Carla Gramellini cgramellini@arpa.emr.it</p> <p>Cristina Zonato cristina.zonato@arpa.piemonte.it</p> <p>Antonio Limberti antonio.limberti@arpat.toscana.it (fino Dicembre 2015)</p> <p>Guido Spinelli guido.spinelli@arpat.toscana.it (da Gennaio 2016)</p> <p>Eugenia Peirone e.peirone@arpa.umbria.it</p>
3.2. Coordinatore	Elisa Calabretta elisa.calabretta@isprambiente.it
3.3 Principali fasi del progetto	1 Individuazione dei reagenti ozono alteranti e/o cancerogeni utilizzati nei metodi di misura in uso presso i laboratori ARPA/APPA
	2 Verifica dello stato dell'arte, confronto a livello nazionale ed eventuale ricerca bibliografica
	3 Individuazione e proposta di metodiche alternative non utilizzanti reagenti ozono alteranti e/o cancerogeni
	4 Stesura rapporto
3.4. Prodotti attesi	Rapporto
3.5 Diffusione dei risultati e principali gruppi destinatari interni e esterni	Stesura rapporto e sua pubblicazione sul sito dell'ISPRA Laboratori ARPA/APPA MATTM Laboratori privati

4. Risorse

4.1 Costi Previsti	Almeno tre riunioni del GdL comportanti spese di trasferta a carico delle agenzie per circa 12 unità di personale a meno di solo riunioni in videoconferenza.
4.2 Riunioni Previste	Contatti via mail e almeno tre riunioni del GdL in sede ISPRA o in videoconferenza.

5. Project planning

	Descrizione	Data
5.1 Cronoprogramma	A- Individuazione dei reagenti ozono alteranti e/o cancerogeni utilizzati nei metodi di misura in uso presso i laboratori ARPA/APPA	Entro Aprile 2015
	B- Verifica dello stato dell'arte, confronto a livello nazionale ed eventuale ricerca bibliografica	Entro Ottobre 2015
	C- Individuazione e proposta di metodiche alternative non utilizzanti reagenti ozono alteranti e/o cancerogeni	Entro Marzo 2016
	D- Redazione della/e bozze di rapporto intermedio. Circolazione nella Rete dei Referenti.	Entro Luglio 2016
	E- Redazione rapporto finale, circolazione nella rete dei referenti. Pubblicazione del rapporto finale.	Entro Novembre 2016

	Descrizione	Data
5.2. Milestones	A- Stesura documento di sintesi sullo stato dell'arte delle attività del GdL	Entro Ottobre 2015
	B- Pubblicazione rapporto finale	Entro Novembre 2016

6. Elementi per la validazione dei prodotti attesi

	Descrizione	Data
6.1Attività	A- Consultazione del GdL (sempre)	Via mail a partire da Gennaio 2015 e fino a Novembre 2016 - Almeno 3 incontri entro Novembre 2016
	B- Consultazione dei referenti tecnici delle agenzie (sempre)	Informativa in merito ad avanzamento lavori GdL Ottobre 2015, Marzo 2016, Novembre 2016
	C- Interlocuzioni con esperti esterni al sistema (eventuale)	-
	D- Peer review (eventuale)	-
	E- Sperimentazione (eventuale)	-
	F- Riferimenti scientifici nella letteratura (eventuale)	Entro Ottobre 2015

7. Elementi per la trasferibilità dei prodotti nel SNPA

	Descrizione	Data
7.1 Attività	A- Consultazione del GdL (sempre)	Via mail a partire da Gennaio 2015 e fino a Novembre 2016 - Almeno 3 incontri entro Novembre 2016
	B- Consultazione dei referenti tecnici delle agenzie (sempre)	Informativa in merito ad avanzamento lavori GdL Ottobre 2015, Marzo 2016, Novembre 2016
	C- Consultazione del GIV	Informativa in merito ad avanzamento lavori GdL Ottobre 2015, Marzo 2016, Novembre 2016
	D- Analisi SWOT	-
	E- Valutazione delle risorse impegnate nel SNPA	Definibile solo in corso d'opera

4.2 Allegato B- Database

Il database è presente on line nei formati xls, xlsx, ods insieme al testo (formato pdf) del Rapporto. Nel database il contenuto delle celle è stato bloccato, ma è stata lasciata la possibilità di effettuare i filtri su tutte le colonne.

Il database permette di visualizzare le sostanze e miscele pericolose cancerogene (H350 e H351) e/o ozono lesive (H420) nei laboratori del Sistema SNPA che hanno fattivamente collaborato alla sua compilazione nell'anno 2016.

4.3 Allegato C- Esempio di procedura di conferma metrologica di Materiali di Riferimento liquidi

Viene riportata di seguito un esempio di procedura di conferma metrologica di Materiali di Riferimento liquidi così come predisposta all'interno dei laboratori dell'ex Servizio di Metrologia Ambientale di ISPRA

La gestione dei materiali di riferimento certificati in soluzione è affidata al personale addetto all'esecuzione delle prove, il quale provvede, per quanto riguarda le soluzioni di taratura e controllo certificate inorganiche a prelevare dal contenitore originale le aliquote destinate ai controlli periodici e alla taratura, lasciando il resto nella confezione fornita dal costruttore e contrassegnando opportunamente i matracci contenenti le soluzioni preparate (soprattutto deve essere indicata la data di preparazione e la data di scadenza).

Per le soluzioni di taratura e controllo certificate organiche l'utilizzatore, ove necessario, trasferisce il contenuto della soluzione in un contenitore adatto e poi provvede a prelevare dal nuovo contenitore le aliquote destinate ai controlli periodici e alla taratura, lasciando il resto nel contenitore di trasferimento. Il contenitore di trasferimento o quello in cui è preparata una nuova soluzione deve essere contrassegnato opportunamente (data di scadenza, data di preparazione, lotto della soluzione o lotti delle soluzioni utilizzate).

Dopo la prima apertura, i materiali di riferimento in matrice liquida devono essere sottoposti all'operazione di conferma metrologica. La conferma metrologica viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- verifica della perdita del solvente per evaporazione (tramite verifica nel tempo della massa della soluzione. Le bilance utilizzate sono gestite in conformità alla ISO 17025 [40]);
- verifica degli eventuali cambiamenti della composizione chimico-fisica del materiale di riferimento certificato.

La verifica delle eventuali modifiche per evaporazione, viene effettuata mediante registrazione della massa del contenitore (con tappo chiuso) dopo il prelevamento delle aliquote. Al momento del nuovo uso e prima dell'apertura per il nuovo prelevamento l'operatore deve verificare nuovamente il peso del contenitore (con tappo chiuso) contenente la soluzione, al fine di evidenziare perdite di soluzione per evaporazione.

La registrazione delle pesate prima e dopo il prelievo vengono registrate su apposito modulo riferito al particolare Materiale di Riferimento. Su tale modulo, al momento del nuovo uso, verrà riportata la massa della soluzione in grammi *prima del prelievo*. Successivamente e sempre prima del prelevamento dell' aliquota di soluzione l'operatore dovrà calcolare la differenza di massa tra il valore del peso della soluzione *prima del prelievo* e l'ultimo valore in grammi registrato del *peso dopo il prelievo* (in valore assoluto). L'esito del controllo sarà positivo, quindi la soluzione sarà utilizzabile, solo nel caso in cui la differenza di peso espressa in grammi calcolata risulti inferiore all'incertezza, espressa in grammi e riferita alla massa che si sta misurando, della soluzione di riferimento indicata nel certificato del produttore (L_{inf} e L_{sup} calcolati come segue). Diversamente la soluzione non potrà essere utilizzata e sarà necessario operare come definito nel Manuale di Qualità del laboratorio.

I valori limite di accettabilità (L_{inf} e L_{sup}) vengono calcolati all'apertura del contenitore utilizzando la seguente equazione:

$$C1 * V1 = C2 * (V1 - X)$$

Ovvero

$$X = V1 - (C1 * V1 / C2)$$

dove

$C1$ = valore certificato di concentrazione riportato sul certificato della soluzione

$C2$ = estremo superiore dell'intervallo di concentrazione certificato ($C1$ +incertezza estesa) riportato sul certificato della soluzione

X = limite di accettabilità (L_{inf} , L_{sup}).

Per i **CRM_I (Materiali di Riferimento Certificati Inorganici)** vale:

$V1_{inf}$ = quantità corrispondente alla metà del volume totale originario della soluzione presente nel contenitore, espressa in grammi considerando la densità della soluzione riportata sul certificato.

$V1_{sup}$ = quantità corrispondente al volume totale originario della soluzione presente nel contenitore espressa in grammi considerando la densità della soluzione riportata sul certificato.

Per i **CRM_O (Materiali di Riferimento Certificati Organici)** vale:

V1 inf = quantità corrispondente al volume residuo minimo di prelievo della soluzione presente nel contenitore espressa in grammi considerando la densità del solvente indicata nelle specifiche del solvente stesso.

V1 sup = quantità corrispondente alla metà del volume totale originario della soluzione presente nel contenitore espressa in grammi considerando la densità del solvente indicata nelle specifiche del solvente stesso.

L'utilizzatore di CRM_I dovrà utilizzare come limite di accettabilità il limite inferiore (Linf) per quantità di soluzione $< V_{inf}$; nel caso si abbia una soluzione di massa compresa tra V_{sup} e V_{inf} l'operatore dovrà utilizzare il limite superiore (Lsup).

L'utilizzatore di CRM_O dovrà utilizzare come limite di accettabilità il limite inferiore (Linf) per quantità di soluzione compresa tra V_{inf} e V_{sup} ; nel caso si abbia una quantità di soluzione $> V_{sup}$, l'operatore dovrà utilizzare il limite superiore (Lsup).

I controlli di qualità per verificare gli eventuali cambiamenti delle proprietà chimico fisiche dei CRM_I e CRM_O vengono effettuate secondo le procedure di misura del particolare metodo validato. Tali procedure prevedono in generale l'utilizzo di soluzioni di controllo preparate mediante CRM_I/CRM_O aventi catene di riferibilità differenti rispetto a quelle utilizzate per la taratura degli strumenti. I criteri di accettabilità di tali controlli sono definiti all'interno del metodo validato. I due controlli, uno mediante pesata delle soluzioni di taratura e l'altro mediante l'utilizzo di soluzioni di controllo aventi catene di riferibilità differente, vengono effettuati in modo incrociato.

Tali verifiche intermedie ed incrociate assicurano la rilevazione di eventuali modifiche chimico-fisiche dei CRM_I e CRM_O utilizzati per la taratura degli strumenti.

Nota Le fiale contenenti usualmente le soluzioni di riferimento Organiche acquistate dal Servizio di Metrologia Ambientale sono vial di vetro con la chiusura a fuoco. Le soluzioni quindi prima dell'utilizzo sono trasferite in altre vial scure con il tappo a vite tali da permette con facilità il prelievo della soluzione mediante micro pipetta con spostamento capillare e tali da contenere ampiamente il volume di soluzione pari almeno a 1.2 mL. Le vial del Servizio di Metrologia Ambientale sono vial da 4 mL.

Considerato:

l'esiguo volume delle soluzioni di riferimento Organiche (le soluzioni di Riferimento Inorganiche sono pari anche a 500 mL),

la concreta difficoltà nell'essere ripetibili e accurati quando si prelevano piccoli volumi da volumi estremamente esigui,

la maggiore probabilità di errore/incertezza sulla concentrazione di un CRM_O per la maggiore volatilità dei solventi organici (le soluzioni di Riferimento Inorganiche sono in soluzione acquosa),

si è stabilito un volume residuo massimo ammissibile della soluzione (V_{inf}), dal quale poter prelevare ($V_{inf}= 100\mu\text{L}$), per il quale si definisce Linf e un V_{sup} pari alla metà del volume di soluzione (in generale $V_{sup}= 0.6\text{mL}$). In questo modo i criteri di accettabilità risultano molto più restrittivi rispetto a quelli definiti per le soluzioni Inorganiche come è corretto che avvenga per le motivazioni sopra esposte.

4.4 Allegato D- Sostanze di nicchia

4.4.1 Fucsina Basica

Esistono 3 diverse sostanze (tre diversi n. CAS) che corrispondono a questa denominazione; la tabella 4.1 riporta le informazioni per queste sostanze ottenute dall'esame del CLP e dalla Banca dati ECHA:

n. CAS	FORMULA	Nome	Classificazione armonizzata CLP	Classificazione da ECHA*	Classificazione C&L/ pittogramma
569-61-9 (1)	C ₁₉ H ₁₇ N ₃ * HCl	CI basic red 9	SI H350	H350	Univoca H350/GHS08
632-99-5 (2)	C ₂₀ H ₁₉ N ₃ * HCl	CI basic violet 14	NO	H351	Diverse (14)
58969-01-0 (3)	Non disponibile	Basic Fuchsin	NO	H351	Univoca H350/GHS07-08

* in base alla definizione "hazard classification & labelling"

(1) dal link <https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/66183>

(2) dal link <https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/110012>

(3) dal link <https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/214984>

Tabella 4.1– Fucsina basica

Dal data base risulterebbe che, laddove ne è dichiarato l'uso, è relativo solo al composto con n. CAS **632-99-5 (CI basic violet 14)**, per il quale non è disponibile una classificazione certa.

Infatti, la definizione riportata da ECHA (<https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.010.173>) di "sospettato di provocare il cancro" coincide con la classificazione di pericolo H351 (mentre quella di "può provocare il cancro" corrisponde ad H350); se si verifica però l'elenco delle notifiche CLP presentate da diversi produttori, sempre tratte da ECHA (<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/110012>), si evidenziano classificazioni anche molto diverse, con netta prevalenza in ogni caso di H351; in particolare, su 108 notifiche:

- 66 notifiche per Canc.2 – H351
- 3 notifiche per Canc.1A - H350
- 1 notifiche per Canc. 1B – H350
- 3 notifiche per Canc. 2 - H350 (errata)
- 33 notifiche per non Canc.

Allo stesso modo, dalla consultazione di varie SDS relative alla sostanza pura da produttori diversi, si conferma la non coerenza di classificazione riguardo la cancerogenicità (H350 o H351).

La presente sostanza rientra però nella Lista delle sostanze classificate dallo IARC nel Gruppo 2B (http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php), che corrisponde alla classificazione CLP "cancerogeno di categoria 2" ovvero H351, come riportato da Documento di Supporto "Banca dati ISS-INAIL", Marzo 2015, Tabella 5 (scaricabile all'indirizzo <http://www.iss.it/binary/ampp/cont/Doc supporto banca dati ISS INAIL Marzo 2015 FINAL PR.pdf>).

Pertanto la classificazione IARC è congruente con la classificazione più frequente nelle notifiche CLP. Assumendo quindi la classificazione predominante da ECHA e sulla base di SDS coerenti con la classificazione H351, si riassumono nella tabella seguente le indicazioni di pericolo e consigli di prudenza per la sostanza in esame:

La tabella 4.2 riassume la classificazione ed etichettatura della Fucsina basica n. CAS 632-99-5 secondo i criteri del Regolamento CLP:

Identificazione del prodotto		
N CAS: 632-99-5	N CE: 211-189-6	Formula: C ₂₀ H ₁₉ N ₃ *HCl
Usi identificati: Chimici di laboratorio, Produzione di sostanze chimiche.		
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008		
Indicazioni di pericolo		
H302	Nocivo se ingerito (Toss. orale acuta cat.4)	
H315	Provoca irritazione cutanea (Corr/Irr cat 2)	
H319	Provoca grave irritazione oculare (cat.2)	
H351	Sospettato di provocare il cancro (Canc. Cat. 2)	
		
Cancerogenicità e Mutagenicità		
IARC	CLP Cancerogeno	CLP Mutageno
2B	Sospetto cancerogeno 2	
Consigli di prudenza		
P264	Lavare accuratamente dopo l'uso	
P281	Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.	
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso	
P308 + P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.	
P405	Conservare sotto chiave	
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /	

Tabella 4.2– Classificazione ed etichettatura della Fucsina basica n. CAS 632-99-5 secondo i criteri del Regolamento CLP

L'utilizzo della sostanza in esame (fucsina basica) è previsto per il monitoraggio dei pollini (metodo UNI 11108:2004 [41]e, recentemente, da Linea Guida ISPRA POLLnet [42], approvata dal Consiglio Federale il 3/11/2015). Si riporta di seguito un estratto della norma UNI 11108: 2004 relativo alla descrizione della composizione del prodotto da utilizzare, da cui si rileva che di fatto il livello di concentrazione di fucsina basica nella soluzione finale è molto bassa.

.....

3.1.4.3 Ulteriori attrezzature e materiali di consumo

Risultano necessarie per l'operatore anche altre attrezzature, quali flussimetro a bolla, pinzette, bisturi, vetrini da microscopio, vetrini copri oggetti e portaoggetti micrometro, etichette, piastra riscaldante, pennello, nastro biadesivo, striscia di tessuto, termometro, pipetta Pasteur, soluzione al 3% di fluido di silicone, gelatina glicerinata con fucsina a concentrazione standardizzata (10gr di gelatina + 60 mL di acqua + 55 mL di glicerina + 2 gr circa di fenolo + alcune gocce di fucsina basica in soluzione acquosa satura).

.....

In Arpa Emilia Romagna tutti i laboratori che effettuano questa determinazione usano il prodotto della Lanzoni già pronto, che, in base alla classificazione riportata della Fucsina basica (CAS 632-99-5), non risulta pericoloso (in quanto <1%).

4.4.2 Arsenito di Sodio

L'arsenito di sodio (meta arsenito di sodio) di formula NaAsO_2 (N. CAS 7784-46-5); deriva dall'acido arsenioso (H_3AsO_3) che a sua volta si forma per idrolisi del triossido di Arsenico. Si presenta come una polvere bianca o grigiastra igroscopica. Fonde a $550\text{ }^\circ\text{C}$; è solubile in acqua (156g/100ml) e poco solubile in alcool. Nel CLP non è presente come voce specifica; esiste una voce generica "composti dell'Arsenico..." e "Acido arsenico e suoi Sali..." oltre ai vari ossidi.

Tutti questi composti sono caratterizzati principalmente da una tossicità acuta (per inalazione, ingestione, contatto con la pelle), ecotossicità acuta e cronica, e, ad eccezione della voce "composti dell'arsenico...", da cancerogenicità. Le classificazioni presentate sul sito dell'ECHA, sulla base delle varie notifiche CLP (<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/54758>) sono in generale congruenti con quelle specifiche del CLP relative agli ossidi e acidi. Assumendo quindi la classificazione predominante da ECHA e sulla base di SDS con essa coerenti si riassumono nella tabella 4.3 le indicazioni di pericolo e consigli di prudenza per la sostanza in esame:

Identificazione del prodotto		
N CAS: 7784-46-5	N CE: 232-070-5	Formula: AsNaO_2
Usi identificati: Chimici di laboratorio, Produzione di sostanze chimiche		
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (da notifiche ECHA prevalenti)		
Indicazioni di pericolo		
H300	Letale se ingerito (Toss. orale acuta cat.2)	
H310	Letale a contatto con la pelle (Toss. dermica acuta cat 2)	
H331	Tossico se inalato (Toss. inal. acuta cat 3)	
H350	Può provocare il cancro (Canc. Cat.1A)	
H400	Molto tossico per organismi acquatici (Toss.acuta ambiente acquatico)	
H410	Molto tossico per organismi acquatici con effetti di lunga durata(Toss.cronica ambiente acquatico)	
		
Cancerogenicità e Mutagenicità		
IARC	CLP Cancerogeno	CLP Mutageno
-	1A	
Consigli di prudenza		
P201	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso	
P261	Evitare di respirare la polvere	
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso	
P273	Non disperdere nell'ambiente	
P280	Indossare guanti e indumenti protettivi	
P301+P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico	

Tabella 4.3– *Classificazione ed etichettatura dell' Arsenito di Sodio secondo i criteri del Regolamento CLP (da notifiche ECHA prevalenti)*

L'arsenito di sodio è utilizzato dal laboratorio ARPAE EMR di Ravenna (Area Suolo/Rifiuti) per la determinazione dei “Cianuri totali e clorabili” secondo IRSA Quad.64-Metodo 17 [43]. In particolare il reattivo ha la funzione di eliminare le interferenze dovute al cloro libero.

Viene utilizzato come soluzione 0,1 M (corrispondente a circa 13.000 ppm) , preparata dal composto puro, per pesata, effettuata rigorosamente sotto cappa, con guanti. Vengono aggiunte poche gocce al campione di analisi. I quantitativi annui indicativi sono di poche decine di grammi.

Il laboratorio dichiara che questa determinazione viene richiesta molto raramente e di conseguenza l'utilizzo della sostanza risulta molto limitato sia come tempi di manipolazione, che come quantitativi. Esiste un metodo EPA 9010B [44] , molto simile a quello IRSA che prevede ugualmente l'utilizzo dell'arsenito di sodio; inoltre risulterebbe un metodo ISO 11262:2011 [45] non disponibile però in ARPAE EMR (si potrebbe valutare l'acquisto, avendo qualche informazione sul principio del metodo).

L'unico metodo che prevede un'alternativa all'arsenito di sodio è APHA Standard Method 4500 [46]: per l'eliminazione del cloro libero prevede infatti il Tiosolfato di sodio (0,02g/L) oppure l'Arsenito di sodio (0,1 g/L pari a 100 ppm cioè 0,01%). Per l'utilizzo del tiosolfato è però raccomandato di evitare un eccesso rispetto al contenuto di cloro, del quale è necessario quindi determinare il contenuto a priori. Invece il Metodo 17 del Quaderno n. 64 IRSA prevede l'aggiunta di un eccesso di arsenito di sodio.

Si raccomanda quindi di valutare la possibilità di sostituire l'arsenito con il tiosolfato o almeno di prevedere l'utilizzo di una soluzione diluita di arsenito verificando la possibilità di acquistarla già pronta.

4.4.3 Idrossilammina Cloridrato

L'idrossilammina cloridrato è il sale costituito da Idrossilammina e Acido cloridrico di formula bruta $\text{NH}_2\text{OH}\cdot\text{HCl}$ (N. CAS 5470-11-1); si presenta come solido incolore dal tenue odore di cloro. Solubile in acqua (464 g/L); temperatura di fusione 159°C.

Nel CLP è presente come voce specifica da cui, per gli scopi del GdL, il limite di pericolosità come cancerogeno (H351) risulta 10.000ppm (1%). Presenta comunque anche effetti acuti come nocivo per ingestione e contatto con la pelle, irritante per occhi e pelle.

Assumendo quindi la classificazione CLP, come riportata anche dall'ECHA (<https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/78573>) e sulla base di SDS con essa coerenti, si riassume nella Tabella 4.4 la classificazione ed etichettatura armonizzata della sostanza in esame.

Identificazione del prodotto			
N CAS: 5470-11-1	N CE: 226-798-2	Formula: $\text{NH}_2\text{OH}\cdot\text{HCl}$	
Usi identificati: Chimici di laboratorio, Produzione di sostanze chimiche			
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008			
Indicazioni di pericolo			
H290	Sostanze corrosive per metalli (cat.1)		
H302	Nocivo se ingerito (Toss. acuta orale cat 4)		
H312	Nocivo per contatto con la pelle (Toss. dermica acuta cat4)		
H315	Provoca irritazione cutanea (Irritaz. Cutanea cat2)		
H319	Provoca grave irritazione oculare (Irritaz. oculare cat2)		
H317	Può provocare reazione allergica cutanea (Sens. Cutanea cat 1)		
H351	Sospettato di provocare il cancro (Canc. Cat.2)		
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta (Toss. specifica per organi bersaglio-esposizione ripetuta Cat.2)		
H400	Molto tossico per organismi acquatici (Toss.acuta ambiente acquatico)		
			
Cancerogenicità e Mutagenicità			
IARC	CLP Cancerogeno	CLP Mutageno	
-	Sospetto cancerogeno 2	-	
Consigli di prudenza			
P273	Non disperdere nell'ambiente		
P280	Indossare guanti e indumenti protettivi		
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti; togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare		
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di eliminazione di rifiuti autorizzato		

Tabella 4.4– Classificazione ed etichettatura armonizzata dell'Idrossilammina Cloridrato

Nel metodo UNI EN 13211:2003 per [47] la determinazione del mercurio nelle emissioni da sorgente fissa, l'uso dell'idrossilammina risulta un'alternativa all'acqua ossigenata per il lavaggio di alcune parti della linea di campionamento a fine prelievo, tra cui i tubi di connessione al primo assorbitore. Infatti il metodo, al punto 7.6.3, cita testualmente:

"7.6.3 Risciacquo dei tubi di connessione al primo assorbitore non riscaldati
Dopo ogni misurazione, risciacquare i tubi di connessione al primo assorbitore.
a) Per gli assorbitori contenenti la soluzione di assorbimento I (soluzione di permanganato/acido solforico): Risciacquare il tubo di connessione al primo assorbitore con una soluzione di H₂O₂ o una soluzione di cloruro di idrossilammonio nel primo assorbitore." La soluzione di cloruro di idrossilammonio (HONH₃Cl) da utilizzare è circa al 10% m/m con l'avvertenza di seguire i requisiti di salute e sicurezza per l'uso del cloruro di idrossilammonio. Tale soluzione è classificabile come cancerogena e quindi da evitarne l'uso.

Anche il metodo EPA 245.1 "Determination of Mercury in water by cold vapor atomic absorption spectrometry" [48], nella sua revisione 3.0 che prevede l'utilizzo di potassio permanganato-potassio persolfato come ossidante, utilizza poi cloruro stannoso ed una soluzione al 12 % di idrossilammina cloridrato per eliminare l'eccesso di permanganato.

Analogamente il metodo EPA 245.7 "Mercury in Water by Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry" [49] nella sua revisione 2.0 del 2005, utilizza una soluzione al 12 % di idrossilammina cloridrato per eliminare l'eccesso dell'ossidante, in questo caso di reagente potassium bromate/potassium bromide.

Nessuno dei due metodi fornisce alternative all'utilizzo dell'idrossilammina.

L'idrossilammina cloridrato è utilizzato poi dal laboratorio ARPAE EMR di Ravenna (Area Suolo/Rifiuti) per la determinazione di AVS (Acid Volatile Sulphides) e LFe (Ferro labile), sui sedimenti di acque di transizione: sono due determinazioni effettuate nell'ambito del monitoraggio delle acque superficiali (DLgs. 152/06).

In particolare serve per fissare il LFe; cioè viene utilizzata una soluzione 0,3 M in HCl 0,5M (corrispondente a circa 21000 ppm di idrossilammina cloridrato), preparata per pesata del reattivo puro (bilancia sotto cappa). L'aggiunta di 20 ml di soluzione viene effettuata direttamente nelle provette di campionamento (1g di campione), unitamente a 10 ml di zinco acetato al 2%: quindi la concentrazione finale di idrossilammina risulta circa 14000 ppm. (limite H351= 10.000 ppm).

La soluzione deve essere preparata fresca ad ogni utilizzo, poiché questa determinazione viene effettuata su 3 cicli di campionamenti all'anno (in tre periodi ben precisi) per tutti i punti di monitoraggio predefiniti, la preparazione viene effettuata 3 volte/anno.

Il metodo utilizzato è stato sviluppato dall'Università di Parma (G. Giordani e P. Viaroli - Corso di Laurea "Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura") ed è stato messo a punto come metodo interno avvalendosi della collaborazione dello stesso Prof. Viaroli; è alternativo alla determinazione dell'ossigeno disciolto, che non dà risultati attendibili nel caso di sedimenti, in particolare in riferimento a queste tipologie di acque attraverso un calcolo effettuato partendo dalle concentrazioni dei due parametri (LFe e AVS) si risale al contenuto di ossigeno disponibile nella matrice in oggetto.

Anche un'altra Agenzia, a seguito di una collaborazione con il Laboratorio di Ravenna è passata all'utilizzo di questo metodo.

Al momento non si conoscono sostanze alternative e non si prevede in tempi brevi di poter apportare modifiche al metodo; eventualmente si potrebbe valutare se l'utilizzo di una soluzione più diluita, tale da scendere sotto il limite di pericolosità, possa dare gli stessi risultati (in questo modo si eviterebbe di portare in giro vial contenenti una miscela pericolosa), e in caso di esito positivo verificare se siano disponibili in commercio confezioni idonee di soluzione diluita già pronta (in modo da evitare la manipolazione della sostanza pura).

4.4.4 Cloramfenicolo

Il Cloramfenicolo (o Cloranfenicolo), CAS 56-75-7, è un antibiotico batteriostatico prodotto dal batterio *Streptomyces venezuelae*, ma attualmente è prodotto per sintesi dall'industria farmaceutica a basso costo.

Tale sostanza non è presente nel CLP, non ha cioè una classificazione ed etichettature armonizzate, ma sul sito ECHA nella maggioranza dei casi le notifiche CLP concordano nella classificazione H350.

La tabella 4.5 riassume la classificazione ed etichettatura del Cloramfenicolo secondo i criteri del Regolamento CLP.

Identificazione del prodotto		
N CAS: 56-75-7	N CE: 200-287-4	Formula: C ₁₁ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O ₅
Usi identificati: Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.		
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008		
Indicazioni di pericolo		
H350	Cancerogenicità (Categoria 1B).	
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.	
	Pittogramma GHS08 Simbolo: pericolo per la salute	
		
Cancerogenicità e Mutagenicità		
IARC	CLP Cancerogeno	CLP Mutageno
2A		
Consigli di prudenza		
P201	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.	
P281	Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.	
P308 + P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.	
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /	

Tabella 4.5– Classificazione ed etichettatura del Cloramfenicolo secondo i criteri del Regolamento CLP

E' stato impiegato in medicina contro una vasta gamma di microrganismi, ma attualmente, a causa della sua tossicità, presenta un impiego limitato a casi di infezioni gravi o per le quali non esiste una valida alternativa.

Il cloramfenicolo trova impiego anche nei laboratori di batteriologia e virologia per le sue qualità batteriostatiche e per la termoresistenza, che consente la sterilizzazione dei terreni di coltura, che lo contengono, mediante il calore.

In virologia viene impiegato per preservare da contaminazione batterica le colture cellulari, ma solo nel caso di colture preziosissime, per evitare la selezione di ceppi batterici resistenti.

In batteriologia può essere impiegato come inibitore della crescita dei procarioti ed è presente nei terreni selettivi per la ricerca e il conteggio di lieviti e muffe da campioni clinici, alimentari e lattiero-caseari.

La concentrazione finale nei terreni di coltura varia da 0,05 g/L a 0,5 g/L (< 0,1%) e non comporta una classificazione H350 dei terreni pronti all'uso.

Nei terreni liofilizzati, da ricostituire con acqua, la concentrazione di cloramfenicolo risulta $\geq 0,1\%$ e quindi questi preparati risultano H350.

Si consiglia quindi l'utilizzo di terreni pronti.

4.4.5 Fenolftaleina

Fenolftaleina (3,3-bis(4-idrossifenile)-1,(3H)-isobenzofuranone), n. CAS 77-09-8.

Il CLP classifica tale sostanza come H350 con limite specifico pari a 1% .

La tabella 4.6 riassume la classificazione ed etichettatura armonizzate della Fenolftaleina come evidenziate nel Regolamento CLP

Identificazione del prodotto		
N CAS: 77-09-8	N CE: 201-004-7	Formula: C ₂₀ H ₁₄ O ₄
Usi identificati: Chimici di laboratorio, Produzione di sostanze chimiche		
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008		
Indicazioni di pericolo		
H341	Mutagenicità delle cellule germinali (Categoria 2), Sospettato di provocare	
H350	Cancerogenicità (Categoria 1B), Può provocare il cancro	
H361f	Tossicità per la riproduzione (Categoria 2), Sospettato di nuocere alla fertilità	
		Pittogramma GHS08 Simbolo: pericolo per la salute
Cancerogenicità e Mutagenicità		
IARC	CLP Cancerogeno	CLP Mutageno
2B	1B	
Consigli di prudenza		
P201	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.	
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o	
P233	Tenere il recipiente ben chiuso.	
P280	Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.	
P281	Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.	
P308 + P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.	

Tabella 4.6– Classificazione ed etichettatura armonizzate della Fenolftaleina

A temperatura ambiente la fenolftaleina si presenta in forma di polvere cristallina bianca inodore, insolubile in acqua e solubile in etanolo.

In passato ha avuto un largo impiego anche come lassativo, ma a causa degli effetti collaterali e dei recenti dati sperimentali, che sembra dimostrino la correlazione fra uso cronico ed effetto genotossico e cancerogeno, la fenolftaleina è stata eliminata da tutti i prodotti farmaceutici da banco.

La fenolftaleina, acido molto debole incolore a $\text{pH} < 8,2$, trova ancora impiego nei laboratori chimici dove viene usata comunemente come indicatore di pH nelle titolazioni acido-base in soluzione etanolica.

In commercio è reperibile come sostanza pura in polvere da impiegare per le successive preparazioni o come soluzione indicatrice pronta all'uso.

Anche nel caso della soluzione etanolica pronta all'uso spesso le concentrazioni sono $> 1\%$ e quindi presenta ancora l'indicazione di pericolo H350.

Il metodo APAT- IRSA/ CNR 2010 [50] per la determinazione dell'acidità ed alcalinità nelle acque prevede, per la determinazione dell'alcalinità con il metodo B, l'impiego, come indicatore, della fenolftaleina ad una concentrazione dello $0,5\%$ in etanolo quindi in base al limite specifico definito da CLP, il prodotto non risulta H350.

(paragrafo 6.7-pag 122 Indicatore alla fenolftaleina: Sciogliere $0,5$ g di fenolftaleina in 50 mL di $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 95% e diluire a 100 mL con acqua distillata.)

Il Regolamento CE 1272/2008 del 16 Dicembre 2008 e sue modifiche classifica la Fenolftaleina come Cancerogeno categoria 1B con l'indicazione di pericolo H350, ma stabilisce un "Limite di concentrazione specifico" pari a : $C \geq 1\%$, per cui la soluzione prevista dal metodo IRSA 2010 non risulta cancerogena.

Risulta necessario acquisire le soluzioni già pronte all'uso per evitare l'uso della sostanza pura.

4.4.6 Furfurolo

Il furfurolo (Numero CAS 98-01-1) è un composto eterociclico di formula $\text{C}_5\text{H}_4\text{O}_2$. Ha massa molare di $96,09$ g/mol e temperatura di ebollizione pari a 162°C . Noto anche con il nome di aldeide furilica, furfurale o di 2- furancarbossialdeide, il furfurolo è un liquido incolore, volatile e poco stabile (tende a scurire e resinificare).

Il furfurolo è molto utilizzato come solvente selettivo.

Nella tabella seguente (Tabella 4.7) si riporta la classificazione ed etichettatura armonizzata del furfurolo, infatti è incluso nella Tabella 3.1 "Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose" del CLP.

In conformità al CLP quindi il furfurolo ha come indicazione di pericolo, relativamente alla cancerogenità, il codice H351, cancerogeno di tipo 2.

L'ARPA Liguria utilizza il furfurolo nelle modalità della tabella seguente (Tabella 4.8).

Il test di Villavecchia Fabris prevede l'aggiunta, al campione di olio, di acido cloridrico al 37% e successivamente di furfurolo. Dopo agitazione e riposo della soluzione così formata si stratificano due fasi liquide, una di olio e l'altra acquosa acida. L'acido libera dalla sesamolina il sesamolo per idrolisi, che reagisce col furfurolo per dare una colorazione rossa nello strato acido sottostante se l'olio contiene oli di semi additivati con olio di sesamo appunto.

E' possibile approfondire la classificazione di tale sostanza sul sito dell'ECHA collegandosi al seguente link: <https://echa.europa.eu/it/brief-profile/-/briefprofile/100.002.389>

Non sono stati trovati metodi alternativi per la determinazione dell'olio di sesamo che non prevedessero l'utilizzo di sostanze pericolose come il furfurolo che, quale H351, non ha comunque le caratteristiche di cancerogenicità più gravi e viene utilizzato annualmente nel laboratorio Ligure in quantità esigue.

Identificazione del prodotto		
N CAS: 98-01-1	N CE: 2202-627-7	Formula: C ₅ H ₄ O ₂
Usi identificati: Chimici di laboratorio, Produzione di sostanze chimiche		
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008		
Indicazioni di pericolo		
H351	Cancerogenicità (Categoria 2)	
H331	Tossicità acuta, Inalazione (Categoria 3)	
H301	Tossicità acuta, Orale (Categoria 3),	
H312	Tossicità acuta, Dermico (Categoria 4)	
H319	Irritazione oculare (Categoria 2)	
H335	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (Categoria 3),	
H315	Irritazione cutanea (Categoria 2)	
		
Cancerogenicità e Mutagenicità		
IARC	CLP Cancerogeno	CLP Mutageno
3	2	
Consigli di prudenza		
P261	Evitare di respirare i vapori.	
P280	Indossare guanti/ indumenti protettivi.	
P301 + P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico	
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.	
P311	Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.	

Tabella 4.7– Classificazione ed etichettatura armonizzate del Furfurolo

Furfurolo	
Riferimento al metodo ufficiale	Metodo ufficiale analisi oli: Reazione Villavecchia-Fabris per ricerca olio di sesamo
Quantitativi annui indicativi	20 ml
Quantità utilizzata a campione	0.5ml
Utilizzo previsto dal metodo	0.5ml di furfurolo al 2% in alcool etilico
Modalità di manipolazione	Manipolazione sotto cappa chimica previo utilizzo di guanti protettivi e visiera protettiva

Tabella 4.8– Tipo di utilizzo del Furfurolo in ARPA Liguria

4.4.7 Cromato di Sodio

Il cromato di sodio è il sale di sodio dell'acido cromico. A temperatura ambiente si presenta come un solido giallo inodore. È un composto cancerogeno, allergenico, pericoloso per l'ambiente. Generalmente cristallizza come tetraidrato pertanto la sua formula è $\text{Na}_2\text{CrO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$.

Nel database ARPA Emilia Romagna utilizza il cromato di sodio tetra idrato perché identificato mediante il N CAS: 10034-82-9. Tale sostanza, specificatamente nella forma idrata, non è inclusa nel CLP, esiste nel Regolamento 1272/2008 la voce relativa a Composti del Cromo VI (numero della sostanza: 024-017-00-8, con l'eccezione del cromato di bario e i composti specificati altrove nell'allegato).

La Tabella 4.9 riporta le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza corrispondenti del cromato di sodio tetra idrato considerando per i codici di pericoli quanto notificato (per un numero maggiore volte) dai produttori e dai distributori all'ECHA. Il link che segue, permette di approfondire le informazioni sul Cromato di Sodio tetra idrato <https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.106.892>

Il Cromato di Sodio tetra idrato risulta appunto utilizzato dal laboratorio ARPA EMR di Piacenza di Radiochimica, per far precipitare i cromati, interferenti nella determinazione dello Sr90 nelle matrici alimentari e ambientali. Il metodo prevede nell'ultima fase la determinazione strumentale mediante contatore beta a basso fondo. La quantità annua indicativa utilizzata dal laboratorio di Piacenza è pari a circa 7 g. Il laboratorio dichiara di utilizzare la maschera durante la pesata del sale e di preparare la soluzione sotto cappa.

In ARPA Lombardia il metodo per la misura dello ^{90}Sr in matrici alimentari e ambientali (UNI 9888 [51] modificata) si basa sull'estrazione di ^{90}Y in condizioni di equilibrio secolare con il progenitore ^{90}Sr e misura tramite contatore beta a basso fondo. Tale metodo non comporta l'utilizzo del Cromato di Sodio, ma per matrici quali terreni e assimilabili è previsto l'uso dell'idrossilammina cloridrato H351 di sospetta cancerogenità. Pertanto il metodo dell'ARPA Lombardia può essere considerato una alternativa migliorativa (anche se non completamente risolutiva) rispetto all'utilizzo di sostanze cancerogene.

L'ARPA Piemonte dichiara di effettuare la misura dello ^{90}Sr in matrice acquose in conformità alla norma ISO 13160: 2012 [52] con le modalità descritte nell'Appendice E nella quale non è contemplato l'uso del Cromato di Sodio.

Identificazione della sostanza			
N.CAS 10034-82-9	N.CE 231-889-5	Na ₂ CrO ₄ · 4H ₂ O	
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008			
Indicazioni di pericolo			
H301	Tossicità acuta, Orale (Categoria 3)		
H330	Tossicità acuta, Inalazione (Categoria 2)		
H312	Tossicità acuta, Dermico (Categoria 4)		
H314	Corrosione cutanea (Categoria 1B)		
H334	Sensibilizzazione delle vie respiratorie (Categoria 1)		
H317	Sensibilizzazione cutanea (Categoria 1)		
H340	Mutagenicità delle cellule germinali (Categoria 1B)		
H350	Cancerogenicità (Categoria 1B)		
H360FD	Tossicità per la riproduzione (Categoria 1B)		
H372	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (Categoria 1)		
H400	Tossicità acuto per l'ambiente acquatico (Categoria 1)		
H410	Tossicità cronica per l'ambiente acquatico (Categoria 1)		
			
Cancerogenicità e Mutagenicità			
IARC	CLP Cancerogeno	CLP Mutageno	
	1B	1B	
Consigli di prudenza			
P201	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.		
P280	Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.		
P301 + P330 + P331 +	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Contattare medico.		
P304 + P340 + P310	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.		
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.		
P308 + P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.		

Tabella 4.9– Classificazione ed etichettatura del Cromato di Sodio tetraidrato secondo i criteri del Regolamento CLP

4.4.8 Cloruro di Berillio

Il cloruro di berillio è un sale di formula BeCl_2 (N. CAS 7787-47-5); a temperatura ambiente si presenta come un solido cristallino bianco. Fonde e vaporizza a temperature piuttosto basse (rispettivamente $405\text{ }^\circ\text{C}$ e $520\text{ }^\circ\text{C}$) a differenza degli alogenuri degli altri metalli alcalino-terrosi. È solubile in solventi organici come alcool ed etere. Tali caratteristiche indicano il carattere essenzialmente covalente del composto. Idrolizza in acqua formando $[\text{Be}(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}_2$.

Identificazione della sostanza		
N.CAS 10034-82-9	N. CE. 232-116-4	Formula: $[\text{Be}(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}_2$
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008		
Indicazioni di pericolo		
H301	Tossicità acuta, Orale (Categoria 3)	
H330	Tossicità acuta, Inalazione (Categoria 2)	
H315	Irritazione cutanea (Categoria 2)	
H319	Irritazione oculare (Categoria 2)	
H317	Sensibilizzazione cutanea (Categoria 1)	
H350i	Cancerogenicità, Inalazione (Categoria 1B)	
H335	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (Categoria 3),	
H372	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (Categoria 1)	
H400	Tossicità acuto per l'ambiente acquatico (Categoria 1)	
H411	Tossicità cronica per l'ambiente acquatico (Categoria 2)	
		
Cancerogenicità e Mutagenicità		
IARC	CLP Cancerogeno	CLP Mutageno
	1B	
Consigli di prudenza		
P201	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.	
P260	Non respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol.	
P280	Indossare guanti.	
P301 + P310 + P330	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico Sciacquare la bocca.	
P304 + P340 + P310	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare	
P308 + P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.	
P403 + P233	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.	

Tabella 4.10– *Classificazione ed etichettatura del Cloruro di Berillio secondo i criteri del Regolamento CLP*

Nel CLP non è riportato precisamente il Cloruro di Berillio ma composti del Berillio (sostanza numero 004-002-00-2 si specifica che quanto definito vale per tutti i composti del berillio ad eccezione del berillio alluminio silicato e di quelli invece riportati esattamente).

La Tabella 4.10 riporta le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza corrispondenti del cloruro di Berillio considerando per i codici di pericoli quanto notificato (per un numero maggiore volte) dai produttori e dai distributori all'ECHA. Il link che segue, permette di approfondire le informazioni sul Cloruro di Berillio <https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.029.197>

Nel database il Berillio Cloruro risulta utilizzato dal laboratorio ARPA EMR di Piacenza di Radiochimica, come carrier/trascinatore nella determinazione dei radionuclidi (v. ^{90}Sr) nelle deposizioni umide (fall out). La quantità annua indicativa utilizzata dal laboratorio di Piacenza è pari a 25 g. Il laboratorio dichiara di utilizzare la maschera durante la pesata del sale e di preparare la soluzione sotto cappa.

In ARPA Lombardia il metodo per la misura dello ^{90}Sr nel fall out (UNI 9888 modificata) si basa sull'estrazione di ^{90}Y in condizioni di equilibrio secolare con il progenitore ^{90}Sr e misura tramite contatore beta a basso fondo. Tale metodo non comporta l'utilizzo del Berillio Cloruro. Pertanto il metodo dell'ARPA Lombardia può essere considerato una buona alternativa a quello che prevede l'utilizzo della sostanza H350.

L'ARPA Piemonte dichiara di effettuare la misura dello ^{90}Sr in matrice acquose in conformità alla norma ISO 13160: 2012 con le modalità descritte nell'Appendice E nella quale non è contemplato l'uso del Cloruro di Berillio.

4.4.9 1,2-dicloroetano

Il 1,2-dicloroetano (o cloruro di etilene o 1,2-DCE) è un alogenuro alchilico, il n. CAS è 107-06-2.

A temperatura ambiente si presenta come un liquido incolore e oleoso dall'odore penetrante di solvente. È un composto cancerogeno, molto infiammabile, nocivo ed irritante per le vie respiratorie. Libera nell'atmosfera acido cloridrico e fospene durante la combustione. Viene per lo più preparato per sintesi diretta, miscelando nelle giuste proporzioni etilene e cloro gassosi; la reazione avviene a temperatura e pressione standard ed è catalizzata dalla luce o dal cloruro ferrico.

Il suo principale utilizzo è come intermedio nella sintesi del cloruro di vinile, a sua volta precursore del PVC.

È un buon solvente apolare, trova quindi uso anche come agente sgrassante e diluente per vernici. È anche usato come intermedio nella sintesi di molecole più complesse. In passato ha trovato uso anche come anti-detonante per carburanti, in associazione con il piombo tetraetile.

La tabella che segue (Tabella 4.11) riporta la classificazione ed etichettatura armonizzata dell'1,2-dicloroetano, infatti tale sostanza è inclusa nella Tabella 3.1 "Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose" del CLP.

Il sito dell'ECHA riporta le informazioni per 1,2-dicloroetano come consultabili dal link: <https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.003.145>

Il 1,2-dicloroetano fa parte dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Substance of very high concern, SVHC), pubblicato in conformità all'articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH.

Nel database 1,2-dicloroetano risulta utilizzato dal laboratorio ARPA Marche di Ancona per la misura di tensioattivi non ionici secondo la norma UNI 10511-1: 1996.

La quantità annua indicativa utilizzata dal laboratorio di Ancona è pari a circa 2 L. Il laboratorio dichiara di manipolare il solvente sotto cappa.

Il metodo UNI 10511-1: 1996 prevede l'estrazione dei tensioattivi non ionici con etilacetato mediante sublazione, quindi concentrazione ed eventuale purificazione su resine di tensioattivi cationici ed anionici. La determinazione del contenuto di tensioattivo è calcolato sulla base del consumo di titolante (titolazione bifasica con una soluzione di Tetrakis) ed il contenuto di tensioattivo anionico è espresso in mg/L di nonil fenolo etossilato con 10 moli di ossido di etilene (NF/10 EO). Nel dettaglio

nella fase organica da 1,2-dicloroetano si osserva il viraggio dell'indicatore "Victoria blu" in presenza di KOH, cioè il passaggio da rosa a blu-violetto.

Identificazione della sostanza		
N. CAS 107-06-2	N. CE. 203-458-2	C ₂ H ₄ Cl ₂
Usi identificati: Chimici di laboratorio, Produzione di sostanze chimiche		
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008		
Indicazioni di pericolo		
H225	Liquidi infiammabili (Categoria 2)	
H302	Tossicità acuta, Orale (Categoria 4)	
H315	Irritazione cutanea (Categoria 2)	
H319	Irritazione oculare (Categoria 2)	
H350	Cancerogenicità (Categoria 1B)	
H335	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (Categoria 3),	
		
Cancerogenicità e Mutagenicità		
IARC	CLP Cancerogeno	CLP Mutageno
2B	1B	
Consigli di prudenza		
P201	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.	
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o	
P280	Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.	
P308 + P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.	
P370 + P378	In caso d'incendio: utilizzare polvere secca o sabbia secca per estinguere.	
P403 + P235	Conservare in luogo fresco e ben ventilato.	

Tabella 4.11– *Classificazione ed etichettatura armonizzate del 1,2-dicloroetano*

L'ARPA Liguria dichiara di utilizzare da diversi anni per la misura dei tensioattivi non ionici, determinati mediante UNI 10511, l' 1,4-diclorobutano.

Il metodo 5180 Tensioattivi non ionici del Manuale e Linee Guida APAT- IRSA/ CNR prevede la determinazione del parametro suddetto mediante titolazione del Bismuto contenuto nel precipitato che formano i tensioattivi non ionici con il Reattivo di Dragendorff (KBiI₄+ BaCl₂). Tale metodo non comporta l'utilizzo di sostanze cancerogene classificate H350 o H351 secondo il CLP.

Esistono inoltre in commercio test in cuvetta per la determinazione dei tensioattivi non ionici quali ad esempio:

- Hach LCK 333 0.2-6.0 mg/L TRITON x 100, LCK 433 6-200 mg/L TRITON x 100 (principio: i tensioattivi non ionici, etassilati con 3 – 20 gruppi ossietilenici, reagiscono con un

indicatore TBPE formando un complesso colorato. Dopo estrazione con diclorometano, H351, il complesso viene determinato tramite lettura fotometrica);

- Hach LCK 334 0.1-20.0 g/L (principio: i tensioattivi non ionici, con 3 – 20 ponti etossilati, reagiscono con un indicatore, il tiocianato di cobalto, formando un complesso colorato. Dopo estrazione con cloroformio, il complesso viene determinato tramite lettura fotometrica)
- Spectroquant 101787 0.10- 7.50 mg/L (principio: I tensioattivi non ionici, etossilati con da 3 a 20 ponti etere, reagiscono con un indicatore ,il TBPE, formando un complesso che viene estratto con diclorometano, H351. Il colore verde della fase organica viene determinato fotometricamente);
- NANOCOLOR® Test in provetta TENSIOATTIVI NON IONICI 15 Macherey Nagel 985.047 (Metodo al TBPE: i tensioattivi non ionici reagiscono con un indicatore, il TBPE = tetrabromofenoltaleinetilsteri, per formare un complesso che viene estratto con diclorometano).

I test in cuvetta, anche se prevedono come visto nei casi sopra menzionati reagenti H351, presentano il vantaggio di avere le quantità di sostanza pericolose necessarie già predosate in sistemi chiusi. Chiaramente è necessario dimostrare che i risultati ottenuti con il metodo in cuvetta e mediante il metodo ufficiale siano equivalenti, in alternativa il kit viene utilizzato nella fase di screening.

Inoltre la normativa ha definito per le acque di scarico un valore limite per i tensioattivi come tensioattivi totali (anionici, cationici e non ionici), sarebbe quindi preferibile una determinazione analitica direttamente della somma di più classi di tensioattivi (nota il problema ambientale per i tensioattivi cationici, presenti negli ammorbidenti, è recente, al momento è facile trovare metodi che permettano la somma dei tensioattivi anionici e non ionici) .

Il Notiziario dei metodi analitici IRSA CNR ha recentemente pubblicato un metodo dal titolo “Determinazione di tensioattivi anionici e non ionici in matrici acquose mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) e rivelazione UV-ELSD”. Tale metodo, nell’ estrazione dei tensioattivi mediante SPE (Solid Phase Extraction) permette la determinazione dei tensioattivi senza l’ utilizzo di sostanze cancerogene o ozono lesivi. In generale la misura dei tensioattivi può avvenire mediante HPLC interfacciati ai seguenti rivelatori: l’ELSD, “Evaporative Ligth Scattering Detector” o il CAD, “Charged Aerosol Detector”, ma anche lo spettrometro di massa. In letteratura è abbastanza facile reperire altri esempi di procedure di misura di tensioattivi (tensioattivi totali), che non prevedono l’ utilizzo di sostanze cancerogene o ozono lesive basate sulle tecniche strumentali menzionate.

Si tratta in ogni caso di metodi piuttosto complessi con strumentazioni poco diffuse (rivelatori ELSD e CAD) e non esaustivi (non previsti i cationici); anche in questo caso sarebbe auspicabile l’ individuazione del metodo più idoneo (o di metodi diversi ma dimostrabili equivalenti) a livello armonizzato, in modo da garantire la confrontabilità fra i risultati delle diverse Agenzie.

4.4.10 Benzene

Il benzene (comunemente chiamato benzolo) è un idrocarburo che si presenta come un liquido volatile, capace cioè di evaporare rapidamente a temperatura ambiente, incolore e facilmente infiammabile. E’ il capostipite di una famiglia di composti organici che vengono definiti aromatici, per l’ odore caratteristico. E’ un componente naturale del petrolio (1-5% in volume) e dei suoi derivati di raffinazione.

Possiede notevoli proprietà solventi: è miscibile in tutte le proporzioni con molti altri solventi organici, mentre è poco solubile in acqua (0,18% a 25 °C)

La tabella che segue (Tabella 4.12) riporta la classificazione ed etichettatura armonizzata del benzene, infatti tale sostanza è inclusa nella Tabella 3.1 “Elenco della classificazione e dell’ etichettatura armonizzate di sostanze pericolose” del Regolamento CLP.

Identificazione del prodotto		
N CAS: 71-43-2	N CE: 200-753-7	Formula: C ₆ H ₆
Usi identificati: Chimici di laboratorio, Produzione di sostanze chimiche		
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008		
Indicazioni di pericolo		
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili. (Categoria 2)	
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.	
H315	Provoca irritazione cutanea. (Categoria 2)	
H319	Provoca grave irritazione oculare. (Categoria 2)	
H340	Può provocare alterazioni genetiche. (Categoria 1B)	
H350	Può provocare il cancro. (Categoria 1A)	
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.	
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (Categoria 3)	
		
Cancerogenicità e Mutagenicità		
IARC	CLP Cancerogeno	CLP Mutageno
1	1A	1B
Consigli di prudenza		
P201	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.	
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o	
P280	Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.	
P308 + P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.	
P370 + P378	In caso d'incendio: utilizzare polvere secca o sabbia secca per estinguere.	
P403 + P235	Conservare in luogo fresco e ben ventilato	

Tabella 4.12– *Classificazione ed etichettatura armonizzate del benzene*

Altri pericoli: Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

Essendo un cancerogeno H350 Categoria 1A il limite di concentrazione in una miscela per classificarla cancerogena deve essere: **>= 0,1% oppure 1.000 ppm.**

Negli elenchi puntati che seguono viene riportato un esempio di utilizzo del Benzene all'interno di una Agenzia, nello specifico dell'ARPA Piemonte, che è risultata la regione che ancora utilizza il benzene come solvente/reagente nella procedura di misura degli Idrocarburi Policiclici Aromatici negli inchiostri da tatuaggi.

Il benzene è utilizzato come soluzione di riferimento per i seguenti metodi interni (indicati con la sigla U.RP.M ed un numero):

- Metodo interno U.RP.M.A018: “Determinazione, tramite la tecnica GC/MS, di sostanze organiche pericolose, presenti in miscele di solventi sotto forma di impurezze”;
- Metodo interno U.RP.M. 249: “Determinazione di solventi organici aromatici in campioni acquosi (spazio di testa statico + GC-FID; spazio di testa dinamico + GC-FID) - APAT IRSA/CNR 5140” [53];
- Metodo interno U.RP.M. 625: “Determinazione composti organici volatili nelle acque (VOCs) mediante Purge & Trap e GC-MS - EPA 5030C + EPA 8260B” [54], [55];
- U.T2M 185: “Solventi clorurati in campioni acquosi (spazio di testa statico + GC-ECD; spazio di testa dinamico + GC-ECD) - APAT IRSA/CNR 5150” [56];
- Metodo interno U.RP.M. 250: Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici nelle acque (HPLC) - APAT IRSA/CNR 5080 [57];
- EPA 5030C:1996: “Purge and Trap for aqueous sample”;
- EPA 8260B:1996; “Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)”;
- Metodo Interno: U.RP.M716: “Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) su fiale e filtri”;
- “Determinazione di composti organici volatili (VOCs) in suoli e sedimenti mediante Purge & Trap + GC/MS - EPA 5035A:2002 + EPA 5030C:2003 + EPA 8260B:1996” [58];
- Emissioni da sorgente fissa. Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa. Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente (UNI EN 13649: 2002) [59];
- Metodo interno U.RP.MA018: “Determinazione, tramite la tecnica GC/MS, di sostanze organiche pericolose, presenti in miscele di solventi sottoforma di impurezze”.

E' previsto l'utilizzo di Benzene come solvente nel metodo interno U.RP.M.A023 rev. 01: “Idrocarburi Policiclici Aromatici in inchiostri con GC/MS” dove l'estrazione viene effettuata aggiungendo al campione 20 ml di una soluzione Benzene/Acetone (2:1) e successivamente messo in bagno ad ultrasuoni ad una temperatura di circa 60 °C per 60 minuti quindi ridotto a piccolo volume con il rotavapor e concentrato su colonnina.

E' in fase di redazione la Revisione 2 del metodo che prevede la sostituzione del Benzene con il Toluene (H225, H304, H315, H336, H361d, H373). L'utilizzo del Toluene comporta tempi di evaporazione più lunghi rispetto all'uso del benzene (circa 3 volte), inoltre il recupero non sembra così efficiente come con il Benzene ma comunque sufficiente da raggiungere la concentrazione minima viene richiesta.

4.4.11 Formazina

La formazina è una sospensione preparata miscelando, in acqua ultrapura, una soluzione di solfato di idrazina (CAS 10034-93-2) ed una soluzione di esametilentetrammina (CAS 10097-0). L'esametilentetrammina non ha caratteristiche cancerogene ma le possiede invece il solfato di idrazina, pertanto a seconda della suo livello di concentrazione nella sospensione può dare carattere di cancerogenità (H350) alla formazina.

Il solfato di idrazina non è incluso nell'Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose del CLP, ma la tabella che segue (Tabella 4.13) ne sintetizza le caratteristiche di pericolosità e le indicazioni di pericolo in conformità ai criteri di classificazione del CLP. Le informazioni sono state estrapolate dal sito dell'ECHA considerando le notifiche di classificazione ed etichettatura, in particolare la classificazione con il maggior numero di notifiche (<https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.030.088>).

Nel database l'utilizzo di tale sostanza è stato dichiarato da uno dei laboratori di ISPRA, tale sospensione serve per la taratura del torbidi metro, la sospensione utilizzata è a 4000NTU.

La normativa tecnica di riferimento per la torbidimetria è la UNI EN ISO 7027-1:2016 [60] per matrici acquose, che prevede l'utilizzo della soluzione a 4000 NTU come soluzione madre di formazina da cui ottenere appunto le soluzioni della retta di taratura per diluizione. Sono però disponibili in commercio soluzioni certificate di formazina già pronte che coprono l'intervallo di lavoro 0.1- 20 NTU, tali soluzioni sono quindi assolutamente da preferire all'utilizzo della soluzione da 4000NTU H350 per la presenza di solfato di idrazina in concentrazione compresa nel seguente intervallo: (0.25-1)%.

E' stato proposto come possibile sostituto della formazina per la taratura del torbidimetro il seguente prodotto approvato dall'EPA: AMCO AEPA-1® Primary Turbidity Standards, della GFS Chemicals.

Tale prodotto risulta costituito da una soluzione acquosa del copolimero di stirene divinilbenzene, n. CAS 9003-70-7. Al variare della composizione in percentuale del copolimero si avrà un diverso valore di NTU per la soluzione.

Sono disponibili in commercio soluzioni a diverso valore di NTU. Il copolimero di stirene e divinilbenzene non è stato ancora classificato secondo il CLP, sul sito dell'ECHA la sostanza è presente soltanto nel processo di pre-registrazione del Reach (<https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.123.326>).

Identificazione del prodotto			
N CAS: 10034-93-2	N CE: 233-110-4	Formula: H4N2.H2O4S	
Usi identificati: Chimici di laboratorio, Produzione di sostanze chimiche			
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008			
Indicazioni di pericolo			
H301	Tossicità acuta, Orale (Categoria 3)		
H311	Tossicità acuta (per via cutanea), Categoria di pericolo 3		
H314	Corrosione cutanea (Categoria 1B)		
H317	Sensibilizzazione cutanea (Categoria 1)		
H331	Tossicità acuta, Inalazione (Categoria 3)		
H350	Può provocare il cancro. (Categoria 1B)		
H400	Tossicità acuto per l'ambiente acquatico (Categoria 1)		
H410	Tossicità cronica per l'ambiente acquatico (Categoria 1)		
			
Cancerogenicità e Mutagenicità			
IARC	CLP Cancerogeno	CLP Mutageno	
	1A	1B	
Consigli di prudenza			
P201	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.		
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o		
P280	Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.		
P308 + P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.		
P370 + P378	In caso d'incendio: utilizzare polvere secca o sabbia secca per estinguere.		
P403 + P235	Conservare in luogo fresco e ben ventilato		

Tabella 4.13– Classificazione ed etichettatura del Solfato di Idrarina secondo i criteri del Regolamento CLP

4.4.12 Terre di diatomee

La farina fossile (o sabbia di diatomee o terra diatomacea o diatomite o kieselgur) è una roccia sedimentaria organogena silicea; è il residuo fossile di microscopiche alghe della famiglia delle diatomee. E' costituita principalmente da carbonato di calcio e diossido di silicio (SiO₂) amorfo. In laboratorio è utilizzata sottoforma di prodotti in polvere (di diverse granulometrie) sia come supporto inerte nei materiali di riempimento di colonne cromatografiche di vario genere, sia per la sua azione disidratante e disperdente come riempimento di colonne di purificazione/estrazione nella fase di preparativa dei metodi cromatografici per l'analisi di inquinanti organici (pesticidi, ipa, pcb, diossine, semi-volatili, ecc.); in certi casi viene aggiunto e miscelato direttamente al campione da estrarre.

Esistono numerosi prodotti commerciali per gli usi sopra indicati che la contengono, da sola, come kieselgur-calcinato in continuo con soda o in miscela con altre due forme di diossido di silicio, rispettivamente cristobalite (polimorfa) e silice cristallina o quarzo.

Nessuna delle tre forme di silice suddette è presente nel CLP e dal sito ECHA si rilevano notifiche di classificazione molto diverse, che vanno da non classificato (NC) a dannoso per organi per esposizione prolungata (H372-H373) a sospetto cancerogeno (H351) o cancerogeno (H350); di seguito si riporta una sintesi delle principali classificazioni per le tre sostanze con il numero di notifiche in parentesi:

1. **Kieselguhr** (N. CAS 68855-54-9)
<https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/16503>
NC (952); H373 (101+355); H372 (26+80); **H351**+H373 (31)
2. **Cristobalite** (N. CAS 14464-46-1)
<https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/26467>
H372 (35+80+73); **H350** (93); H373 (90+42); NC (74)
3. **Silice cristallina o quarzo** (N. CAS 14808-60-7)
<https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/54394>
NC (486); H372 (356+95); H373 (99+94+92); **H350** (92+86)

Si rileva che mentre per il kieselguhr la percentuale di classificazione come “sospetto cancerogeno” (H351) è molto bassa, per cristobalite e quarzo si ha una percentuale significativa di “cancerogeno (H350)”; peraltro, sempre da sito ECHA, alla sezione “Registro delle intenzioni” si rileva che la sostanza “silice cristallina”, nelle tre forme quarzo, tridimite e cristobalite è proposta per una prossimo inserimento nel CLP come “cancerogeno”. Il Kieselguhr sembra quindi escluso da questo prossimo inserimento.

https://echa.europa.eu/registry-current-classification-and-labelling-intentions/-/substance-rev/13008/term?viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_SEARCH_CRITERIA_EC_NUMB_ER=238-878-4&viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet DISS=true

Inoltre la Lista delle sostanze classificate dallo IARC riporta la silice in polvere, cristallina in forma di quarzo o cristobalite al Gruppo 1 (quindi corrispondente ad H350), ma non prevede la forma amorfa.

Nei laboratori delle agenzie risultano in uso i seguenti prodotti:

- A. **ASE PREP DE** – miscela delle 2 forme **cristobalite + kieselguhr** (SDS non aggiornate di due produttori dichiarano cancerogenicità di entrambi i singoli componenti ma non della miscela)
- B. **HYDROMATRIX** - miscela delle 3 forme **cristobalite +kieselguhr+quarzo** (da SDS Agilent il prodotto risulta H350 e H372)
- C. **EXTRELUT** – **Kieselguhr** (da SDS Merck il prodotto risulta H373)
- D. **CELITE R566** – miscela delle 2 forme **cristobalite +kieselguhr** (da SDS Sigma-Aldrich il prodotto risulta H319-H335-H373)
- E. **CELITE R545** - Kieselguhr (da SDS Sigma-Aldrich il prodotto non risulta pericoloso)

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene quindi di considerare H350 i prodotti contenenti cristobalite e/o quarzo, ma non quelli contenenti solo Terra di diatomee (Kieselguhr).

Si consiglia quindi dove possibile l'utilizzo preferenziale del prodotto a base solo di quest'ultimo componente; in ogni caso, tuttavia, la migliore soluzione sarebbe presentata dall'acquisto di colonne pronte all'uso.

4.5 Allegato E- Progetto formalina free

Progetto:FOR-FREE

Durata del progetto: 12 mesi

Descrizione attività

La formaldeide, precedentemente classificata come probabile cancerogeno (cat 2), è stata classificata recentemente, in base al Regolamento della Commissione Europea n.605 del 5 giugno 2014 (Regolamento che modifica il CLP), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE n.167 del 6 giugno 2014, come cancerogeno di categoria 1B (presunto cancerogeno). Tale nuova classificazione di fatto eleva il rischio per la salute degli operatori che utilizzano e maneggiano tale sostanza. Ciò comporta la necessità di considerare il rischio cancerogeno ai fini della gestione della salute e sicurezza dei lavoratori con riferimento all'esposizione alla formaldeide. La tossicità della formaldeide è cosa risaputa e soprattutto considerata da tutti gli operatori e pertanto l'attenzione sull'uso di soluzioni fissative alternative non tossiche è sempre stata alta e finalizzata ad esplorare tutte le possibili vie per eliminare o ridurre il rischio connesso all'uso di tale sostanza. Negli ultimi anni numerose sono state le proposte per l'utilizzo di sostanze alternative che, negli annunci delle ditte produttrici garantiscono gli stessi risultati di fissazione riducendo od eliminando completamente le controindicazioni date dalla loro tossicità. Tali soluzioni fissative sono state tuttavia sviluppate e finalizzate per la conservazione di tessuti istologici ovvero di porzioni molto piccole di organismi e pertanto la loro efficacia nella conservazione di interi organismi o di parti cospicue di essi non è stata ancora appurata.

Attualmente i tecnici e ricercatori del Laboratorio di Ecologia del Benthos sono concordi nel ritenere non ancora esaustive le informazioni relative alla possibilità di sostituire la formaldeide con altre sostanze non tossiche. Ciò in considerazione dell'analisi critica delle informazioni disponibili nella letteratura scientifica e grigia relativa a tale problematica e anche sulla base di alcune sperimentazioni effettuate all'interno delle attività del Laboratorio tese a testare alcune soluzioni fissative proposte dal mercato. La sperimentazione effettuata dall'ISPRA in anni passati (*Oselladore et al., 2012*) sull'utilizzo di fissativi alternativi alla formalina è stata utile per avviare l'approccio sperimentale a tale problematica. Tuttavia i risultati sono da considerarsi limitati al tipo e alla taglia di organismi considerati e l'intera questione necessita di maggiori prove sperimentali su campioni reali di comunità macrobentoniche. In considerazione del carattere non prioritario di tale sperimentazione rispetto ad altre attività analitiche funzionali allo svolgimento dei diversi progetti di ricerca afferenti al Laboratorio, e in base anche all'estrema dinamicità del mercato dei fissativi alternativi alla formaldeide si ritiene necessaria un'attività specifica che risponda in modo univoco e chiaro alla possibilità di sostituire la formaldeide quale fissativo per organismi marini. Tra le soluzioni fissative alternative alla formalina proposte tuttavia non saranno prese in considerazione quelle a base di dialdeidi che, sebbene al momento non siano classificate al livello di pericolosità pari a quella della formalina, presentano comunque elementi di tossicità che ne sconsigliano l'utilizzo. Tale sperimentazione potrà avvalersi della collaborazione delle unità delle ARPA/APPA che sono interessate da tale problematica.

Oselladore F., Antonini C., Cornello M., Boscolo Brusà R. (2012) – Sperimentazione preliminare di fissativi alternativi alla formalina per la conservazione di campioni di macrozoobenthos marino. *Biol. Mar. Medit.*, 19(1): 184-185.

Obiettivi

Gli obiettivi che il presente progetto intende raggiungere sono connessi alla minimizzazione del rischio chimico e alla salvaguardia della salute dei tecnici e ricercatori del Laboratorio di Ecologia del Benthos.

In sintesi gli obiettivi del presente progetto sono:

- analizzare criticamente le informazioni disponibili nella letteratura scientifica e grigia relativa all'utilizzo di fissativi alternativi alla formaldeide;
- individuare e acquistare soluzioni fissative alternative alla formaldeide e prive di effetti tossici attualmente offerte dal mercato di riferimento;
- sperimentare l'efficacia nel tempo delle soluzioni individuate come fissativo di organismi marini alternative alla formaldeide;
- confrontarsi con le ARPA/APPA e gli altri Enti di Ricerca per condividere le esperienze e valutare le possibili soluzioni individuate.

Attività

Di seguito una sintesi delle attività proposte:

- analisi critica delle informazioni disponibili nella letteratura scientifica e griglia relativa all'individuazione di possibili alternative alla formaldeide (inclusi metodi alternativi alle soluzioni di fissaggio);
- analisi del mercato di riferimento per l'individuazione di soluzioni fissative non tossiche ma di uguale efficacia alternative alla formaldeide;
- acquisto soluzioni;
- messa a punto di un protocollo sperimentale per testare l'efficacia delle soluzioni selezionate;
- prelievo di campioni di organismi marini da fissare con le nuove soluzioni selezionate;
- fissazione dei campioni;
- ispezione visiva dei campioni con cadenza mensile per valutare l'efficacia della fissazione con le nuove soluzioni selezionate;
- sintesi dei risultati.

Difficoltà attese

Si prevedono le seguenti difficoltà:

- difficoltà di approvvigionamento delle soluzioni;
- tempi lunghi per la verifica dell'efficacia delle soluzioni.

Tempistica

Attività	Mesi											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	■											
2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3	■	■										
4		■	■									
5	■	■	■	■								
6		■	■	■	■							
7		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8												■

Tabella 4.15– Tempistica del Progetto FOR-FREE

Stima dei costi

- acquisto di soluzioni fissative* alternative alla formalina	€ 1500,00
- acquisto di materiale da laboratorio	€ 300,00
- spese di missione per raccolta campioni (spese di personale, spese di ormeggio gommone ISPRA)	€ 1500,00
Totale	€ 3300,00

*Attualmente sono disponibili diverse soluzioni che vengono pubblicizzate come sostitutive della formalina e dagli effetti non tossici. I prezzi di tali soluzioni variano molto e indicativamente possono variare da circa € 300,00 al litro per la Histochoice a € 50,00 al litro per la Formalternate.

4.6 Allegato F- Schema metodi approfonditi per la determinazione dei tensioattivi

METODO	APAT IRSA CNR 5170 Tensioattivi anionici					
Matrice	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acque di scarico urbane e industriali ✓ Acque superficiali e sotterranee 					
Principio	<p>I tensioattivi anionici (solfonati e solfatati, MBAS sostanze attive al blu di metilene) formano con il blu di metilene (colorante cationico) un sale di colore blu che viene estratto quantitativamente in cloroformio. L'assorbanza della fase cloroformica è proporzionale alla concentrazione del tensioattivo anionico e viene misurata, per via spettrofotometrica, alla lunghezza d'onda di 650 nm.</p> <p>In presenza di solidi sospesi tali da creare problemi nel processo di estrazione è necessario procedere alla filtrazione del campione su filtri in fibra di vetro da 0,80 µm, in questo caso lavare i filtri usati con metanolo ed aggiungere il metanolo al campione.</p>					
Intervallo di applicabilità	<p>Per tensioattivi MBAS (0,025 -100) mg/l di tensioattivi espressi come MBAS Estensione del campo di applicazione a concentrazioni più basse fino a 0,005 mg/L con l'utilizzo di celle con cammino ottico di 5 cm.</p>					
Interferenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interferenze positive: sostanze organiche che formano sali con il blu di metilene (solfati, solfonati e carbossilati organici, acido picrico, acidi solfonici...) sostanze inorganiche che con il blu di metilene danno luogo a coppie ioniche (cianati, fluoruri, cloruri...) 2. Interferenze negative: sostanze che reagiscono con i tensioattivi anionici (ammine, Sali di ammonio quaternari...), specie capaci di ridurre il blu di metilene (solfuri...) <p>L'estrazione del sale colorato prima con soluzione alcalina del blu di metilene e poi acida riduce notevolmente le interferenze sopra indicate.</p> <p>In presenza (accertata) dell'acido picrico e di determinati acidi solfonici è necessario effettuare una preestrazione del campione mediante sublatore come indicato nel metodo <i>APAT IRSA 5180 Tensioattivi non ionici</i></p>					
Conservazione, tempi di analisi	<p>Stabilizzazione del campione con 1% (v/v) di formaldeide 37% e refrigerazione a T=4 °C (Δattività batterica) Analisi entro 24 h dal campionamento</p>					
LOD/LOQ	-					
Dati di precisione (Ripetibilità, Riproducibilità)	<p>Precisione stimata come CV% su 5 repliche da sei laboratori</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Influyente impianto di depurazione</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Effluente impianto di depurazione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7%</td> <td style="text-align: center;">9%</td> </tr> </table>		Influyente impianto di depurazione	Effluente impianto di depurazione	7%	9%
Influyente impianto di depurazione	Effluente impianto di depurazione					
7%	9%					

METODO	APAT IRSA 5180 Tensioattivi non ionici
Matrice	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acque di scarico ✓ Acque naturali
Principio	<p>Estrazione dei tensioattivi non ionici con acetato di etile e flusso di azoto mediante sublatore. Qualora la presenza di solidi sospesi è tale da causare l'otturazione dei pori del setto del sublatore, l'estrazione è preceduta da una filtrazione sotto vuoto del campione su filtri in fibra di vetro (0,80 µm) prelavati con metanolo. Successivo lavaggio dei filtri con metanolo e aggiunta della soluzione di lavaggio all'acqua filtrata. L'estratto è fatto eventualmente passare su colonna a scambio ionico per eliminare le interferenze da tensioattivi anionici e cationici. L'estratto o il purificato è fatto reagire con il reattivo di Dragendorff (K₂BiI₄ + BaCl₂ in acido acetico glaciale) per cui si forma un precipitato nel quale il rapporto di combinazione Bi-tensioattivo è circa 1:1. Il precipitato viene disciolto e il bismuto presente viene titolato per via potenziometrica con pirrolidinditiocarbammato di sodio (NaPDC) che lo complessa nel rapporto 3:1 (3 NaPDC:1 Bi).</p>
Intervallo di applicabilità	<p>(0,05 -0.50) mg/l tensioattivi non ionici etossilati, BIAS (6- 30 gruppi ossietilenici)</p> <p>Estensione del campo di applicazione a concentrazioni più basse (0,01-0,05) mg/L ma con una diminuzione della precisione del metodo stesso.</p>
Interferenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. tensioattivi cationici per formazione di un precipitato con lo iodobismutato di bario 2. tensioattivi anionici <p>Necessaria la purificazione dell'estratto su resina cationica e anionica</p>
Conservazione, tempi di analisi	<p>Stabilizzazione del campione con 1% di formaldeide 37% e refrigerazione a T=4 °C per ridurre al minimo l'attività batterica</p> <p>Analisi entro 24 h dal campionamento (preferibile)</p>
LOD/LOQ	-
Dati di precisione (Ripetibilità, Riproducibilità)	CV (%)= (10-20)% su 5 repliche per l'intervallo (0,05 -0,50) mg/l

METODO	Standard Method 5540B Surfactant Separation by Sublation
Matrice	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acque di scarico ✓ Acque naturali
Principio	<p>Il processo di sublazione isola i tensioattivi, a prescindere dalla tipologia, da soluzioni acquose diluite e permette di ottenere un residuo relativamente libero da sostanze non tensioattive. Nel sublatores viene caricato il campione e dell'etilacetato insufflati poi con azoto. Il tensioattivo è adsorbito nell'interfaccia acqua-gas delle bolle ed è portato (disciolto) nell'etilacetato. La soluzione organica viene separata da quella acquosa, il solvente è evaporato in modo tale da ottenere un residuo che può essere analizzato, secondo la procedura indicata in Standard Method 5540C o D.</p> <p>Il processo di sublazione separa dal campione acquoso soltanto i tensioattivi disciolti nella fase acquosa, in presenza di particolato a cui possono essere adsorbiti fortemente i tensioattivi (così è nelle acque di scarico fognarie), è necessario, per diminuire i tempi di analisi, (durante il processo di sublazione i tensioattivi adsorbiti sul particolato sono disciolti nel tempo) filtrare il campione (si usano filtri di carta a media porosità). Al momento non è disponibile un metodo standardizzato per la determinazione dei tensioattivi adsorbiti.</p> <p>Nota dopo il processo di sublazione (ripetuto due volte) la soluzione organica è trasferita in imbuto separatore e dibattuta per allontanare eventuali residui acquosi, che sono successivamente riaggiunti all'interno del sublatores. Alla fine dei processi di sublazione le pareti del sublatores sono lavati con 20 mL di etilacetato aggiunti poi all'estratto totale.</p>
Intervallo di applicabilità	Al momento i metodi analitici disponibili risultano semiquantitativi per tensioattivi presenti a livelli < 1mg/L in campioni ambientali
Interferenze	Il processo di sublazione è specifico per i tensioattivi, perché soltanto i tensioattivi sono preferibilmente adsorbiti nell'interfaccia acqua-gas, ma sostanze non tensioattive potrebbero essere portate nell'etilacetato per via meccanica.
Conservazione, tempi di analisi	-
LOD/LOQ	-
Dati di precisione (Ripetibilità, Riproducibilità)	-

METODO	Standard Method 5540C Anionic Surfactants as MBAS								
Matrice	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acque di scarico ✓ Acque potabili 								
Principio	<p>Le MBAS (Methylene blue active substances) cioè le sostanze attive al blu di metilene, colorante cationico, sono soprattutto i tensioattivi anionici. Le MBAS portano il blu di metilene dalla soluzione acquosa ad una soluzione organica immiscibile con l'acqua secondo un dato equilibrio. Si ha la formazione della coppia ionica MBAS anione-blu di metilene catione, coppia ionica di colore blu. L'intensità del blu nella fase organica è una misura delle MBAS. Estrazione del campione con cloroformio per dibattimento in imbuto separatore e in presenza di un eccesso di blu di metilene (successivo lavaggio del campione con acqua per eliminare gli interferenti positivi), lettura spettrofotometrica a 652nm della soluzione cloroformica. <u>Nota</u> Tra i tensioattivi anionici sono esclusi i Sali alcalini C₁₀₋₂₀ o gli acidi grassi [RCO₂]⁻ Na⁺, perché non formano una coppia ionica estringibile nelle condizioni del metodo. I tensioattivi MBAS sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solfonati [RSO₃]⁻ Na⁺ - Esteri solfati [ROSO₃]⁻ Na⁺ - Tensioattivi non ionici solfati [RE_nOSO₃]⁻ Na⁺ - LAS alchilbenzensolfonato lineare 								
Intervallo di applicabilità	<p>[MBAS] < 0.025 mg/L Metodo lineare nell'intervallo 10 µg- 200 µg di soluzione di riferimento MBAS</p>								
Interferenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interferenze positive: sostanze organiche che formano sali con il blu di metilene (solfati, solfonati e carbossilati organici, fenoli) sostanze inorganiche che con il blu di metilene danno luogo a coppie ioniche (cianati, fluoruri, cloruri...), solfuri 2. Interferenze negative: sostanze che reagiscono con i tensioattivi anionici (ammine, Sali di ammonio quaternari...), presenza di particolato sospeso 3. tensioattivi cationici <p>Accorgimenti per eliminare le interferenze: utilizzo resine a scambio ionico (tensioattivi cationici), sublazione e filtrazione, idrolisi acida (desorbimento delle MBAS da particolato ma comporta la distruzione di MBAS esteri solfati), ossidazione con acqua ossigenata per i solfuri.</p>								
Conservazione, tempi di analisi	-								
LOD/LOQ	-								
Dati di precisione (Ripetibilità, Riproducibilità)	<p>La tabella seguente riporta i valori di RSD% ottenuti dall'analisi dei campioni indicati in 110 laboratori</p> <table border="1" data-bbox="448 1585 1401 1798"> <thead> <tr> <th data-bbox="448 1585 767 1731">Campione sintetico: acqua distillata +270 µg LAS/L</th> <th data-bbox="767 1585 1086 1731">Campione di acqua di rubinetto addizionata con 480 µg LAS/L</th> <th data-bbox="1086 1585 1401 1731">Campione di acqua di fiume addizionata con 2,94 mg LAS/L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="448 1731 767 1798">RSD%= 14,8 %</td> <td data-bbox="767 1731 1086 1798">RSD%= 9,9 %</td> <td data-bbox="1086 1731 1401 1798">RSD%= 9,1 %</td> </tr> </tbody> </table>			Campione sintetico: acqua distillata +270 µg LAS/L	Campione di acqua di rubinetto addizionata con 480 µg LAS/L	Campione di acqua di fiume addizionata con 2,94 mg LAS/L	RSD%= 14,8 %	RSD%= 9,9 %	RSD%= 9,1 %
Campione sintetico: acqua distillata +270 µg LAS/L	Campione di acqua di rubinetto addizionata con 480 µg LAS/L	Campione di acqua di fiume addizionata con 2,94 mg LAS/L							
RSD%= 14,8 %	RSD%= 9,9 %	RSD%= 9,1 %							

METODO	Standard Method 5540D Anionic Surfactants as CTAS
Matrice	Matrice acquosa tensioattivi nonionici disciolti
Principio	<p>Le CTAS (Cobalt Thiocyanate Active Substances) cioè le sostanze attive al Cobalto tiocianato reagiscono con una soluzione acquosa di tiocianato per formare un prodotto contenente Cobalto estraibile in solvente organico (Diclorometano) nel quale può essere misurato (lettura spettrofotometrica a 620 nm). I tensioattivi non ionici sono CTAS come altri materiali naturali, pertanto devono essere eliminate le interferenze (via processo di sublazione per sostanze non tensioattive e purificazione su resine a scambio ionico per tensioattivi cationici e anionici).</p> <p>Si usa come standard di riferimento il tensioattivo nonionico C₁₂₋₁₈E₁₁ che ha una risposta a CTAS di circa 0.21 unità di assorbanza/mg.</p>
Intervallo di applicabilità	-
Interferenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. tensioattivi cationici e anionici eliminati via purificazione su resine a scambio ionico 2. tensioattivi non ionici eliminati mediante sublazione 3. particolato sospeso su cui si adsorbono CTAS, eliminazione mediante filtrazione del campione così facendo si determinano sono le CTAS disciolte
Conservazione, tempi di analisi	-
LOD/LOQ	LOD: 0.1 mg CTAS calcolato come C ₁₂₋₁₈ E ₁₁ , che corrisponde a 1mg/L in 1L di campione
Dati di precisione (Ripetibilità, Riproducibilità)	<p>RSD (%)= 3% per 24 campioni di 6.22% p/v di soluzione di riferimento di C₁₂₋₁₈E₁₁ . Le analisi sono state effettuate da tre laboratori senza sublazione o purificazione su resine a scambio ionico.</p> <p>RSD (%)= 6% per campioni sublato e addizionati con 0.50 o 0.67 mg di soluzione di riferimento di C₁₂₋₁₈E₁₁. I campioni sono stati nuovamente sottoposti a sublazione e successivamente a purificazione su resine a scambio ionico.</p>

METODO	Determinazione di tensioattivi anionici e non ionici in matrici acquose mediante HPLC e rivelazione UV-ELSD (rivelatore evaporativo) Mariani D.*, Capri S.** e Polesello S.* Notiziario IRSA dei Metodi Analitici, Aprile, 2-8, anno 2015
Matrice	<ul style="list-style-type: none"> ✓ acque di scarico urbane e industriali ✓ acque superficiali e sotterranee
Principio	Estrazione dei campioni acquosi in LLE (in cloroformio) o mediante SPE(eluato in metanolo), se si opera in SPE su cartucce C18 filtrare il campione (membrane filtranti in fibra di vetro 0.7mm porosità nominale) soltanto quando SPM>50mg/L. Gli estratti o eluati sono ripresi in acqua dopo evaporazione del solvente organico e iniettati direttamente in HPLC. La fase stazionaria dell'HPLC è molto selettiva, infatti ha come gruppi funzionali: catene alchiliche, gruppi amminici terziari e gruppi ammidici polari permettendo in questo modo differenti meccanismi di separazione degli analiti (fase inversa, scambio anionico e interazioni dipolo dipolo). I tensioattivi anionici sono ritenuti principalmente per interazioni a scambio ionico e ripartizioni idrofobiche, quelli non ionici vengono separati grazie ad interazioni idrofobiche e dipolo-dipolo.
Intervallo di applicabilità	-
Interferenze	Processare bianchi procedurali per valutare eventuale contaminazione, utilizzare reattivi idonei vista la diffusione dei tensioattivi. Pulire la vetreria con una sol HCl 10%, non usare detersivi, sciacquare alla fine la vetreria con acetone 3. tensioattivi anionici Necessaria la purificazione dell'estratto su resina cationica e anionica
Conservazione, tempi di analisi	Campionamento in bottiglie scure Stabilizzazione del campione con 1% di formaldeide 37% Refrigerazione a T=4 °C al buio La deconcentrazione entro 24 h dal campionamento
LOD/LOQ	Dipendente dal fattore di concentrazione applicato in fase di preparazione del campione. Si deve arrivare tramite la preconcentrazione ad una soluzione contenente almeno 100mg/kg di ciascuna specie tensioattiva che si vuole determinare.
Dati di precisione (Ripetibilità, Riproducibilità)	Serie di ripetizioni di soluzioni di riferimento effettuati in giorni diversi hanno dato un CV% mai superiore al 3%

METODO	Corila 1.13.1 Tensioattivi anionici
Matrice	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acque di fiume ✓ Anche estendibile ad acque marine
Principio	<p>Estrazione del campione acquoso non filtrato e preconcentrazione degli analiti mediante SPE su carbone grafitato (Carbopack B) ed analisi in HPLC-Fluorescenza. Colonna cromatografica C₈DB o similare.</p> <p>La fase eluente in SPE è costituita da 5 mL di CH₂Cl₂/MeOH 80/20 v/v basificata con TMAOH (lavaggio della cartuccia dopo la preconcentrazione con 5mL di acqua distillata, 10 mL di MeOH e 10 mL di CH₂Cl₂/MeOH 80/20 v/v acida per acido formico 15mM)</p>
Intervallo di applicabilità	(0.8- 800) µg/L
Interferenze	<p>Processare bianchi procedurali per valutare eventuale contaminazione, utilizzare reattivi idonei vista la diffusione dei tensioattivi.</p> <p>Pulire la vetreria con una soluzione metabolica di HCl 3M, non usare detergenti, sciacquare alla fine la vetreria con acetone</p> <p>Interferenza a causa di contaminanti coestratti</p>
Conservazione, tempi di analisi	<p>Stabilizzazione del campione con 1% di formaldeide 37%</p> <p>Refrigerazione a T=4 °C</p> <p>Analisi entro 24 h dal campionamento</p>
LOD/LOQ	0.8 µg/L acque di fiume per 200 mL di campione estratto
Dati di precisione (Ripetibilità, Riproducibilità)	CV (%)= 5% a livello di 10 µg/L

METODO	UNI 10511-1 Qualità dell'acqua Determinazione dei tensioattivi non ionici Metodo per titolazione bifasica con Tetrakis (4-fluorofenil)borato sodico
Matrice	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acque di fiume ✓ Anche estendibile ad acque marine
Principio	Estrazione dei tensioattivi in etilacetato dalla matrice acquosa mediante sublazione. Dopo eventuale eliminazione su resine scambiatrici di ioni dei tensioattivi cationici e anionici, il residuo viene sciolto in acqua e analizzato via titolazione bifasica con Tetrakis. Si osserva il punto di viraggio del Tetrakis nella fase organica da 1,2-dicloroetano. Il contenuto di tensioattivo non ionico viene calcolato sulla base del consumo di titolante, ed espresso in mg/L di nonilfenolo etossilato con 10 moli di ossido di etilene (NF/10 EO).
Intervallo di applicabilità	-
Interferenze	Poliglicoli, tensioattivi anionici (per concentrazioni superiori a 5 mg/L) e cationici In presenza di tensioattivi anionici cationici e effettuare la purificazione su resine. In assenza di tali possibili interferenti non effettuare né la sublazione né il passaggio su resine.
Campionamento, Conservazione	Operare secondo le norme UNI EN 25667 (parti 1 e 2) e ISO 5667 (part 3 e 10) Il Volume minimo di campionamento è pari a 250 mL per una concentrazione di tensioattivo di circa 2 mg/l, per livelli di concentrazioni inferiori il volume di campionamento deve essere proporzionalmente aumentato.
LOD/LOQ	
Dati di precisione (Ripetibilità, Riproducibilità)	CV _r (%)= 9-33%, n _{lab} = 6, livello di tensioattivi non ionici: 1-5mg/L in acque di scarico CVR (%)= 25-80%, n _{lab} = 6, livello di tensioattivi non ionici 1-5mg/L in acque di scarico

5. BIBLIOGRAFIA

- [1] *Direttiva 2000/60 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.*
- [2] *Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.*
- [3] *Decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155- Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (pubblicato nella G.U. n.216 del 16/09/2010- suppl. ord. n. 217-in vigore dal 30/09/2010).*
- [4] *REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE, e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008).*
- [5] *REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).*
- [6] *DIRETTIVA CONSIGLIO UE 67/548/CEE del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative ed amministrative relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.*
- [7] *Regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.*
- [8] *Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.*
- [9] *Regolamento (CE) N. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.*
- [10] *Regolamento (UE) N. 744/2010 della Commissione del 18 agosto 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, relativamente agli usi critici degli halon.*
- [11] *Regolamento (UE) N. 291/2011 della Commissione del 24 marzo 2011 sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009.*
- [12] *Regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione del 1 giugno 2011 relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del Regolamento (CE) n. 1005/2009.*
- [13] *Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.*
- [14] *Decreto Legislativo 13 settembre 2013, n. 108 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (G.U. 27 settembre 2013, n. 227).*
- [15] *APAT- IRSA/ CNR, Manuali e Linee Guida 29/2003, Metodi analitici per le acque- Metodo 5130, Richiesta Chimica di Ossigeno.*
- [16] *APAT- IRSA/CNR, Manuali e Linee Guida 29/2003, Metodi analitici per le acque- Metodo 5170, Tensioattivi anionici.*
- [17] *ISPRA Manuale e Linee Guida 75/2011, Procedura per l'analisi degli idrocarburi >C12 in suoli contaminati.*

-
- [18] *ISPRA Manuale e Linee Guida 123/2015, Procedura di misurazione per la determinazione degli idrocarburi totali nelle acque.*
- [19] *EPA METHOD 5021A VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS IN VARIOUS SAMPLE MATRICES USING EQUILIBRIUM HEADSPACE ANALYSIS.*
- [20] *UNI EN ISO 9377- 2:2002 Qualità dell'acqua. Determinazione dell'indice di idrocarburi. Metodo mediante estrazione con solvente e gascromatografia.*
- [21] *ASTM D7066-04, Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S-316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared Determination.*
- [22] *APAT- IRSA/CNR, Manuali e Linee Guida 29/2003, Metodi analitici per le acque- Metodo 5160B Sostanze oleose: Determinazione mediante spettrofotometria infrarossa.*
- [23] *APAT- IRSA/CNR, Manuali e Linee Guida 29/2003, Metodi analitici per le acque- Metodo 5160A Sostanze oleose: Determinazione gravimetrica.*
- [24] *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" GU n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96.*
- [25] *UNI EN 1484:1999 Water Analysis - Guidelines For The Determination Of Total Organic Carbon (toc) And Dissolved Organic Carbon (doc).*
- [26] *ISO 15705:2002 Water quality - Determination of the chemical oxygen demand index (ST-COD) -- Small-scale sealed-tube method.*
- [27] *ISPRA Manuale e Linee Guida 117/2014, Procedura di misurazione per la determinazione della Richiesta Chimica di Ossigeno (COD) mediante test in cuvetta: Metodo 5135.*
- [28] *APAT- IRSA/CNR, Manuali e Linee Guida 29/2003, Metodi analitici per le acque- Metodo 5010,.*
- [29] *Metodo Unichim 487: 79 Ambienti di lavoro- Determinazione della formaldeide nell'aria- Metodo colorimetrico.*
- [30] *ASTM, 1998 Standard guide for conducting static acute toxicity tests starting with embryos of four species of saltwater bivalve molluscs. E 724-98, American Society for testing and materials, Philadelphia, PA; USA, 21 pp.*
- [31] *VDI 3862-6:2004 Measurement of gaseous emissions- Measurement of formaldehyde in the exhaust gas of combustion engine- FTIR Method.*
- [32] *ISPRA Manuale e Linee Guida 111/2014, Metodi biologici per le acque superficiali interne.*
- [33] *ISPRA Nuovi approcci metodologici per la classificazione dello stato di qualità degli ecosistemi acquatici di transizione- Metodologie per la determinazione della struttura dimensionale di fitoplancton e macroinvertebrati bentonici, Febbraio 2009.*
- [34] *UNI 10511-1: 1996/A1 Qualità dell'acqua : determinazione di tensioattivi non ionici : metodo per la titolazione bifasica con tetrakis (4-fluorofenil) borato sodico (TAS).*
- [35] *APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 5540 Surfactants, 22 nd edition 2012.*
- [36] *D. Mariani et al, Notiziario IRSA dei Metodi Analitici, Aprile 2015.*
- [37] *A.M.H. Van der Veen, et al, Accreditation and Quality Assurance, 2001- Volume 6, Issue 1, pp 20-25.*
- [38] *Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU Serie Generale n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108).*
- [39] *Manuale Unichim 192- Parte III la sicurezza nei laboratori: valutazione dei rischi chimici.*

-
- [40] *UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2010 (E) Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.*
- [41] *UNI 11108:2004 Qualità dell'aria- Metodo di campionamento e conteggio dei granuli pollinici e delle spore fungine aerodisperse.*
- [42] *Linea Guida POLLnet- Linea guida per il monitoraggio aereobiologico.*
- [43] *IRSA Quaderno n.64- Metodi analitici per i fanghi, Metodo 17 Cianuri totali e clorabili”.*
- [44] *EPA METHOD 9010B TOTAL AND AMENABLE CYANIDE.*
- [45] *ISO 11262:2011 Soil quality - Determination of total cyanide.*
- [46] *APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 4500 CN-Cyanide.*
- [47] *UNI EN 13211:2003 Qualità dell'aria - Emissioni da sorgente fissa - Metodo manuale per la determinazione della concentrazione di mercurio totale.*
- [48] *EPA “Method 245.1: Determination of Mercury in Water by Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry (CVAA).”.*
- [49] *EPA Method 245.7: Mercury in Water by Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry.*
- [50] *APAT- IRSA/CNR, Manuali e Linee Guida 29/2003, Metodi analitici per le acque- Metodo 2010,.*
- [51] *UNI 9888:1991 Energia nucleare. Determinazione radiochimica dello 90 Sr.*
- [52] *ISO 13160: 2012 Water quality- Strontium 90 and strontium 89 - Test methods using liquid scintillation counting or proportional counting.*
- [53] *APAT- IRSA/CNR, Manuali e Linee Guida 29/2003, Metodi analitici per le acque- Metodo 5140, Solventi organici aromatici.*
- [54] *EPA METHOD 5030C PURGE AND TRAP FOR AQUEOUS SAMPLES.*
- [55] *EPA METHOD 8260B VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS BY GAS CHROMATOGRAPHY/ MASS SPECTROMETRY (GC/MS).*
- [56] *APAT- IRSA/CNR, Manuali e Linee Guida 29/2003, Metodi analitici per le acque- Metodo 5150,.*
- [57] *APAT- IRSA/CNR, Manuali e Linee Guida 29/2003, Metodi analitici per le acque- Metodo 5080, Idrocarburi Policiclici Aromatici.*
- [58] *METHOD 5035A. CLOSED-SYSTEM PURGE-AND-TRAP AND EXTRACTION FOR VOLATILE ORGANICS IN SOIL AND WASTE SAMPLE.*
- [59] *UNI EN 13649: 2002 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico.*
- [60] *UNI EN ISO 7027-1:2016 Qualità dell'acqua – Determinazione della Torbidità – Parte 1 : Metodi Quantitativi.*
- [61] *EPA METHOD 8270D SEMIVOLATILE ORGANIC COMPOUNDS BY GAS CHROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRY (GC/MS).*
- [62] *EPA METHOD 3500C ORGANIC EXTRACTION AND SAMPLE PREPARATION.*
- [63] *APAT IRSA CNR, Manuali e Linee Guida 29/2003, Metodi analitici per le acque- Metodo 5180, Tensioattivi non ionici.*

ARPA/APPA	Nome Referente laboratorio e numero di telefono	Sostanza	n. CAS	Classificazione	Tipo di utilizzo	Metodo	Tecnica	Matrice
Toscana	Antonio Limberti 348 3968456	Miscela di calibrazione VOC 1000 ppm in metanolo (1,2-dibromoetano)	106-93-4	H350	sol di rif/standard	EPA 8260C 2006 + EPA 5030C 2003	GC-MS	acque
Toscana	Antonio Limberti 348 3968456	Miscela di calibrazione VOC 1000 ppm in metanolo(1,1,1-tricloroetano)	71-55-6	H420	sol di rif/standard	EPA 8260C 2006 + EPA 5030C 2003	GC-MS	acque
Toscana	Antonio Limberti 348 3968456	Miscela di calibrazione VOC 1000 ppm in metanolo (tricloroetilene)	79-01-06	H350	sol di rif/standard	EPA 8260C 2006 + EPA 5030C 2003	GC-MS	acque
Toscana	Antonio Limberti 348 3968456	Miscela di calibrazione VOC 1000 ppm in metanolo (benzene)	71-43-2	H350	sol di rif/standard	EPA 8260C 2006 + EPA 5030C 2003	GC-MS	acque
Toscana	Antonio Limberti 348 3968456	Miscela di calibrazione VOC 1000 ppm in metanolo(cloruro di vinile)	75-01-04	H350	sol di rif/standard	EPA 8260C 2006 + EPA 5030C 2003	GC-MS	acque
Toscana	Antonio Limberti 348 3968456	idrossilammina cloridrato	5470-11-01	H351	reagente	UNI EN 13211:2003	campionamento	emissioni
Toscana	Guido Spinelli 0553206962	PAH Solution 200 mg/L, O2Si 116662-058-5PAK, (dibenzo(a,h)antracene)	53-70-3	H350	sol di rif/standard	EPA 8270D	GC-MS	acque naturali
Toscana	Guido Spinelli 0553206963	PAH Solution 200 mg/L, O2Si 116662-058-5PAK, (benzo (a) pirene)	50-32-8	H350	sol di rif/standard	EPA 8270D	GC-MS	acque naturali
Toscana	Guido Spinelli 0553206972	Volatile mix 120359-02-5PAK 2000 mg/L, 1 ml O2Si, (benzene)	71-43-2	H350	sol di rif/standard	EPA 8260C	GC-MS	acque naturali
Toscana	Guido Spinelli 0553206963	Bromin solution 0,05M Br2 (bromato di potassio)	7758-01-2	H350	reagente	EPA 245.7	CVAFS	acque naturali
Toscana	Antonio Limberti 348 3968456	idrossilammina cloridrato	5470-11-01	H351	reagente	EPA 245.7	CVAFS	acque naturali
Toscana	Guido Spinelli 0553206969	Ultra low diesel &SAEoil mix (Dieselfuel) 50000 mg/L, O2Si 116613/06-5PAK	68476-34-6	H351	sol di rif/standard	UNI EN ISO 9377-2:2002	GC-FID	suolo,acque
Toscana	Guido Spinelli 0553206969	gasoline unlead solution 20000 mg/L, O2Si 020246-56-5PAK	8006-61-9	H350	sol di rif/standard	EPA 5021A	GC-FID	suolo,acque
Toscana	Guido Spinelli 0553206961	Custom chloroaniline mix 110625-02-4PAK O2Si 2000mg/L, (4-cloroanilina)	106-47-8	H350	sol di rif/standard	EPA 3510C + EPA 8151A	GC-MS	acque
Toscana	Guido Spinelli 0553206961	Custom chloroaniline mix 110625-02-4PAK O2Si 2000mg/L, (2-cloroanilina)	106-47-8	H350	sol di rif/standard	EPA 3510C + EPA 8151A	GC-MS	acque
Toscana	Guido Spinelli 0553206961	Custom chloroaniline mix 110625-02-4PAK O2Si 2000mg/L, (3-cloroanilina)	106-47-8	H350	sol di rif/standard	EPA 3510C + EPA 8151A	GC-MS	acque
Toscana	Guido Spinelli 0553206961	pentaclorofenolo	87-86-5	H351	sol di rif/standard	interno	GC-MS	suolo,acque
Toscana	Guido Spinelli 0553206961	esaclorobenzene	118-74-1	H350	sol di rif/standard	EPA 8270D	GC-MS	acque/suoli/sedimenti /biota
Toscana	Guido Spinelli 0553206961	Endo agar, terreno (fucsina basica 1-2%)	632-99-5	H351	reagente	APAT CNR IRSA MET 7010C MAN 29: 2003	microbiologia (membrane filtranti)	
Toscana	Guido Spinelli 0553206961	dicromato di potassio (soluzione 0,3-0,5%)	7778-50-9	H350	reagente	APAT CNR IRSA MET 8020 B MAN 29: 2003 esclusa appendice 1	ecotossicologia (materiale di riferimento saggio ecotossicologico)	
Toscana	Guido Spinelli 0553206961	Fast blue BB	5486-84-0	H351	reagente	metodi microbiologici	identificazione batterica sistema API	
Toscana	Antonio Limberti 348 3968456	dicromato di potassio soluzione	7778-50-9	H350	sol di rif/standard	manuale Unichim 177/2 LINEE GUIDA PER LA TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA - SPETTROMETRI DI ASSORBIMENTO ATOMICO AD ATOMIZZAZIONE ELETTROTHERMICA (EAAS)	Spettrofotometrica	acque reflue
Toscana	Antonio Limberti 348 3968456	dicromato di potassio soluzione	7778-50-9	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 8020B Man 29 2003 esclusa appendice 1	Test di tossicità	acque reflue
Toscana	Antonio Limberti 348 3968456	kit (dicromato di potassio)	7778-50-9	H350	reagente	ISO 15705:2002	Spettrofotometrica	acque reflue
Toscana	Antonio Limberti 348 3968456	dicromato di potassio (soluzione)	7778-50-9	H350	reagente	APHA Standard methods for the examination of water and wastewater, ed 21th 2005, 5220C	Spettrofotometrica	acque reflue
Toscana	Antonio Limberti 348 3968456	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	UNI EN ISO 18857	Estrazione e purificazione	acque naturali
Toscana	Antonio Limberti 348 3968456	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 8270D	Estrazione e purificazione	aria emissioni
Toscana	Antonio Limberti 348 3968456	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 1613D	Estrazione e purificazione	aria emissioni
Toscana	Antonio Limberti 348 3968456	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	UNI EN 1948-2-4	Estrazione e purificazione	aria emissioni
Toscana	Antonio Limberti 348 3968456	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT CNR IRSA Man 29/2003 5170	Spettrofotometrica	acque reflue
Arpa Emilia Romagna sez. PC – CTR Rad	Sogni Roberto 0523 489646	cloruro di berillio	7787-47-5	H350	reagente	metodo interno MFGE001	Spettrometria gamma	altro
Arpa sez. PC – CTR Rad	Sogni Roberto 0523 489646	cromato di sodio	10034-82-9	H350	reagente	Metodo Interno	Contatore scintillatore a stato solido	altro

ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	110092-08-4PAK PAH Solution, 2000 mg/L, 1 ml O2Si (benzo(k)fluorantene)	207-08-9	H350	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAB.039	GC-MS	acque naturali
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	110092-08-4PAK PAH Solution, 2000 mg/L, 1 ml O2Si (benzo(a)antracene)	56-55-3	H350	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAB.039	GC-MS	acque naturali
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	110092-08-4PAK PAH Solution, 2000 mg/L, 1 ml O2Si (benzo(a)pirene)	50-32-8	H350	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAB.039	GC-MS	acque naturali
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	110092-08-4PAK PAH Solution, 2000 mg/L, 1 ml O2Si (crisene)	218-01-9	H350	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAB.039	GC-MS	acque naturali
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	110092-08-4PAK PAH Solution, 2000 mg/L, 1 ml O2Si (benzo(b)fluorantene)	205-99-2	H350	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAB.039	GC-MS	acque naturali
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	110092-08-4PAK PAH Solution, 2000 mg/L, 1 ml O2Si (dibenzo(a,h)antracene)	53-70-3	H350	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAB.039	GC-MS	acque naturali
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	110092-08-4PAK PAH Solution, 2000 mg/L, 1 ml O2Si (diclorometano, solvente)	75-09-2	H351	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAB.039	GC-MS	acque naturali
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	110092-08-4PAK PAH Solution, 2000 mg/L, 1 ml O2Si (benzene, solvente)	71-43-2	H350	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAB.039	GC-MS	acque naturali
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	CUS-15899 Soluzione custom Ultra Scientific (cloroetilene)	75-01-4	H350	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA.004	GC-MS	acque potabili
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	CUS-15900 standard ULTRA scientific aromatici e clorurati, (tricloroetilene)	79-01-6	H350	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA.004	GC-MS	acque potabili
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	CUS-15900 standard ULTRA scientific aromatici e clorurati, (1,2 dibromoetano)	106-93-4	H350	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA.004	GC-MS	acque potabili
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	CUS-15900 standard ULTRA scientific aromatici e clorurati, (1,2,3-tricloropropano)	96-18-4	H350	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA.004	GC-MS	acque potabili
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	CUS-15900 standard ULTRA scientific aromatici e clorurati, (1,1,1-tricloroetano)	71-55-6	H420	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA.004	GC-MS	acque potabili
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	CUS-15900 standard ULTRA scientific aromatici e clorurati, (benzene)	71-43-2	H350	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA.004	GC-MS	acque potabili
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	CUS-15900 standard ULTRA scientific aromatici e clorurati, (tetraclorometano)	56-23-5	H420	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA.004	GC-MS	acque potabili
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	CUS-15900 standard ULTRA scientific aromatici e clorurati, (1,2-dibromoetano)	106-93-4	H350	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA.004	GC-MS	acque potabili
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	CUS-15900 standard ULTRA scientific aromatici e clorurati, (1,2-dicloroetano)	107-06-2	H350	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA.004	GC-MS	acque potabili
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	455042K arsenico VWR (arsenico triossido)	1327-53-3	H350	sol di rif/standard	UNI EN ISO 17294-2:2005	ICP-MS	acque naturali
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	kit Lange LCK 514 (dicromato di potassio)	7778-50-9	H350	reagente	ISO 15705:2002	VIS	acque reflue
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	kit Lange LCK 332 (cloroformio)	67-66-3	H351	reagente	M.U. 201:2006 (Manuale Unichim 201)	VIS	acque reflue
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	kit Lange LCK 333 (diclorometano)	75-09-2	H351	reagente	M.U. 201:2006 (Manuale Unichim 201)	VIS	acque reflue
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	VIS	acque naturali
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	VIS	acque reflue
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	kit Lange LCK 331 (cloroformio)	67-66-3	H351	reagente	Lange: test in cuvetta	VIS	acque reflue
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	formaldeide	50-00-0	H351	reagente	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	Nessuno	acque reflue
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	Hydrocarbon Mix O2si (mineral oil type A)	68476-34-6	H351	sol di rif/standard	ISO 16703:2004	GC-FID	suolo
ARPAER – Reggio Emilia	Adriano Fava 3357712795	Regular Unleaded Gasoline Solution O2si	8006-61-9	H350	sol di rif/standard	Manuale Linee Guida ISPRA 123:2015	GC-FID	acque reflue
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	alacloro	15972-60-8	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	aldrin	309-00-2	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	captano	133-06-2	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	carbaril	63-25-2	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	clorotalonil	1897-45-6	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	chlortoluron	15545-48-9	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	clorprofamio	101-21-3	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	2,4'-DDD	53-19-0	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	4,4'-DDD	72-54-8	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti

ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	2,4'-DDE	3424-82-6	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	4,4'-DDE	72-55-9	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	2,4'-DDT	789-02-6	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	4,4'-DDT	50-29-3	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	diuron	330-54-1	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	α -HCH	319-84-6	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	β -HCH	319-85-7	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	δ -HCH	319-86-8	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	epossiconazolo	133855-98-8	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	eptacloro	76-44-8	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	eptacloro epossido isomero A	28044-83-9	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	eptacloro epossido isomero B	1024-57-3	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	esaclorobenzene	118-74-1	H350	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	esaclorobenzene (13C6)	93952-14-8	H350	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	acetato di fentina	900-95-8	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	flusilazole	85509-19-9	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	folpet	133-07-3	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	Gamma-chlordane	5103-74-2	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	esacloroetano	67-72-1	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	iprodione	36734-19-7	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	isoproturon	34123-59-6	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	kresoxim-methyl	143390-89-0	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	linuron	330-55-2	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	mepanipirim	110235-47-7	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	metossicloro	72-43-5	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	mirex	2385-85-5	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	molineate	2212-67-1	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	nitrofen	1836-75-5	H350	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	N-Nitrosodimetilamina	62-75-9	H350	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	procymidone	32809-16-8	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	propargite	2312-35-8	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	propazina	139-40-2	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	propyzamide	23950-58-5	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	pymetrozine	123312-89-0	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	simazina	122-34-9	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	trifluralina	1582-09-8	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	vinclozolin	50471-44-8	H351	sol di rif/standard		GC/HPLC	alimenti
ARPA ER Sez Ferrara	Morelli Marco 0532 901214 Lab Tematico Fitofarmaci	miscela cromica (dicromato di potassio)	7778-50-9	H350	reagente	per pulizia inserti inj. GC		

ARPA ER Sez Ferrara	Mirolò Graziella 0532 901226 Lab Biotossicologico	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	sol di rif/standard	UNI EN ISO 6341: 2013; UNI EN ISO 8692:2012; UNI EN ISO 10253:2006	Test ecotossicologico	altro
ARPA ER Sez Ferrara	Mirolò Graziella 0532 901226 Lab Biotossicologico	cloruro di cadmio monoidrato	35658-65-2	H350	sol di rif/standard	EPA-822-R-01-001: 2001; EPA-600-4-91-003: 1994	Test ecotossicologico	altro
ARPA ER Sez Ferrara	Mirolò Graziella 0532 901226 Lab Biotossicologico	formaldeide (40% stabilizzata)	50-00-0	H351	reagente	ASTM E724-98	Test ecotossicologico La sostanza è impiegata per bloccare il test	altro
ARPA Sez.Prov di MODENA	dr.Giuseppe Del Carlo 059/433666	tetraclorometano	56-23-5	H420	sol di rif/standard	UNI EN 13649	GC-MS	aria emissioni
ARPA Sez.Prov di MODENA	dr.Giuseppe Del Carlo 059/433667	1,1,1-tricloroetano	71-55-6	H420	sol di rif/standard	UNI EN 13649	GC-MS	aria emissioni
ARPALOMBARDIA	COLLI ADELIO 0342 1832540	tetraclorometano	56-23-5	H420	sol di rif/standard	INTERNO	Spazio di testa -GC-ECD	acque naturali
ARPALOMBARDIA	COLLI ADELIO 0342 1832541	1,1,1-tricloroetano	71-55-6	H420	sol di rif/standard	INTERNO	Spazio di testa -GC-ECD	acque naturali
ARPA PUGLIA-Foggia	Dalessandro Giacomo 0881316234	Custom VOC solution (1,2dicloroetano)	107-06-2	H350	sol di rif/standard	EPA 524.2	GC-MS P&T	acque potabili
ARPA PUGLIA-Foggia	Dalessandro Giacomo 0881316235	Custom VOC solution (tricloroetene)	79-01-6	H350	sol di rif/standard	EPA 524.2	GC-MS P&T	acque potabili
ARPA PUGLIA-Foggia	Dalessandro Giacomo 0881316243	Custom VOC solution (1,2-dicloroetano d4)	17060-07-0	H350	sol di rif/standard	EPA 524.2	GC-MS P&T	acque potabili
ARPA PUGLIA-Foggia	Dalessandro Giacomo 0881316247	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 525.3	GC-MS	acque potabili
ARPA Puglia DAP TA lab	Catucci Francesco 0994520175	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	APAT IRSA CNR 5080 man. 29:2003	Estraz. Liq./liq. - analisi GC/MS	altro
ARPA Puglia DAP TA lab	Catucci Francesco 0994520175	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT IRSA CNR 5170 man. 29:2003	Estraz. Liq./liq. - analisi spettrofotom.	altro
ARPA Puglia DAP TA lab	Catucci Francesco 0994520175	fenoltaleina	77-09-8	H350	reagente	APAT IRSA CNR 2010 man. 29:2003	Titolazione	acque naturali
ARPA Puglia DAP TA lab	Catucci Francesco 0994520175	kit COD (dicromato di potassio)	7778-50-9	H350	reagente	ISO 15705:2002	ossidazione - det. Spettrofotometrica con kit	altro
ARPA Puglia DAP TA lab	Catucci Francesco 0994520175	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	sol di rif/standard	UNI 196/10:2008	costruzione retta di taratura - filtrazione - det. Spettrofotom.	materiali
ARPA Puglia DAP TA lab	Catucci Francesco 0994520175	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	Supplemento ordinario alla G.U. n.248/99	ossidazione - titolazione	altro
ARPA Puglia DAP TA lab	Catucci Francesco 0994520175	o-toluidina	95-53-4	H350	reagente	IRSA-CNR, Met. an. per le acque, Cloro Met. B 1979	pretrattamento con reagenti - spettrofotometria	altro
ARPA Puglia Polo Microinquinanti TA	Esposito Vittorio 0999949764	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA1613, EPA1668, EPA1614 e altri	Estrazione, purificazione,analisi	altro
ARPA Puglia Polo Microinquinanti TA	Esposito Vittorio 0999949765	terra di diatomee (ASE PREP DE miscela: cristobalite + kieselguhr) (cristobalite)	14464-46-1	H350	reagente	EPA1613, EPA1668, EPA1614 e altri	Estrazione, purificazione,analisi	altro
ARPA Puglia- Bari	Di Mauro Massimo 0805533213	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 3640A:1994-EPA 3545A:2000	Estrazione e purificazione	rifiuti
ARPA Puglia- Bari	Di Mauro Massimo 0805533214	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	DM13/9/1999 Met.VII.3	analisi	suolo
ARPA Puglia- Bari	Dott.ssa Francesca Ferieri 080 5533213	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III	analisi	alimenti
ARPA Puglia- Bari	Dott.ssa Francesca Ferieri 080 5533214	fenoltaleina	77-09-8	H350	reagente	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II	Titolazione	alimenti
ARPA Puglia- Bari	Dott.ssa Francesca Ferieri 080 5533216	cloroformio	67-66-3	H351	reagente	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III	analisi	alimenti
ARPA FVG	Francesca Tassan 04321918277	fucsina basica	632-99-5	H351	reagente	UNI 11108:2004		altro
ARPA FVG	Pierluigi Verardo	fucsina basica	632-99-5	H351	reagente	UNI 11108:2004		altro
ARPA FVG	Nicola Skert	fucsina basica	632-99-5	H351	reagente	UNI 11108:2004		altro
ISPRA	G. Molto 06-50073268	benzo(a)pirene	50-32-8	H350	sol di rif/standard	ASTM, E1611-00 (2007) leggerm. Modificato	test di tossicità su policheti	altro
ISPRA	G. Molto 06-50073268	benzo(a)pirene (soluzione 0.1-0.25%)	50-32-8	H350	sol di rif/standard	ASTM, E1611-00 (2007) leggerm. Modificato	test di tossicità su policheti	altro
ISPRA	Marco Matiddi tel 0650073249	formaldeide	50-00-0	H351	reagente	Metodo interno	Fissazione organismi	altro
ISPRA	Paolo Tomassetti	formaldeide	50-00-0	H350	reagente		Fissazione organismi	acque naturali
ISPRA	Paolo Tomassetti	formazina 4000 NTU (solfato di idrazina)	10034-93-2	H350	sol di rif/standard	UNI EN ISO 7027:2003	torbidimetria	acque naturali
ISPRA	Andrea Tornambè 0650073299	acrilammide/Bis 40% (37.5:1) soluzione (acrilammide)	79-06-1	H350	reagente	interno	Elettroforesi di proteine	altro
ISPRA	Andrea Tornambè 0650073299	dicromato di potassio polvere	7778-50-9	H350	sol di rif/standard	ISO 10253: 2006	Saggio di inibizione della crescita di alghe marine	acque naturali
ISPRA	Andrea Tornambè 0650073299	dicromato di potassio 0.4 %	7778-50-9	H350	sol di rif/standard	ISO 10253: 2006	Saggio di inibizione della crescita di alghe marine	acque naturali

ISPRA	Andrea Tornambè 0650073299	cloruro di cobalto	7646-79-9	H350	reagente	ISO 10253: 2006	Saggio di inibizione della crescita di alghe marine	acque naturali
ISPRA	Stefania Balzamo 0650073228	diclorometano	75-09-2	H351	reagente	EPA1613, EPA1668, Metodo interno basato su EPA 3545 A + EPA 3640 A + EPA 8270 D EPA35	spettrometria di massa	suolo sedimento
ISPRA	Stefania Balzamo 0650073228	O2Si soluzione di simazina 1000mg/L, (simazina)	122-34-9	H351	sol di rif/standard	Metodo interno basato su EPA 3545 A + EPA 3640 A + EPA 8270 D EPA35	spettrometria di massa	suolo sedimento
ISPRA	Stefania Balzamo 0650073228	β-estradiolo polvere	50-28-2	H351	sol di rif/standard	Metodo di altro laboratorio	LC-MS-MS	
ISPRA	Stefania Balzamo 0650073228	benzo(a)pirene polvere	50-32-8	H350	sol di rif/standard	Metodo interno basato su EPA 8270	GC-MS	
ISPRA	Stefania Balzamo 0650073228	diuron polvere	330-54-1	H351	sol di rif/standard	Metodo interno basato su EPA 8270	GC-MS	
ISPRA	Stefania Balzamo 0650073228	benzo(a)pirene d-12 polvere	63466-71-7	H350	sol di rif/standard	Metodo interno basato su EPA 8270	GC-MS	
ARPA Bologna	Daniela Lucchini 051-396239	gelatina con fucsina basica (fucsina basica)	632-99-5	H351	reagente	UNI 11108:2004	Campionamento e conteggio pollini	altro
ARPA Bologna	Daniela Lucchini 051-396239	soluzione di silicone in tetraclorometano, (tetraclorometano)	56-23-5	H351	reagente	UNI 11108:2004	Campionamento e conteggio pollini	altro
ARPA Piacenza	Contardi Laura 0523-489643	gelatina con fucsina basica (fucsina basica)	632-99-5	H351	reagente	UNI 11108:2004	Campionamento e conteggio pollini	altro
ARPA Rimini	Anelli Patrizia 0541-319284	gelatina con fucsina basica (fucsina basica)	632-99-5	H351	reagente	UNI 11108:2004	Campionamento e conteggio pollini	altro
ARPA Rimini	Anelli Patrizia 0541-319284	soluzione di silicone in tetraclorometano, (tetraclorometano)	56-23-5	H351	reagente	UNI 11108:2004	Campionamento e conteggio pollini	altro
ARPAE Ferrara	Erika Manfredini 0532-234871	gelatina con fucsina basica (fucsina basica)	632-99-5	H351	reagente	UNI 11108:2004	Campionamento e conteggio pollini	altro
ARPAE Ferrara	Erika Manfredini 0532-234871	silicone in soluzione (tetraclorometano)	56-23-5	H351	reagente	UNI 11108:2004	Campionamento e conteggio pollini	altro
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	1,1-dicloro-1-fluoroetano	1717-00-6	H420	sol di rif/standard	EPA 5030+8260	P&T GC-MS	acque naturali
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	triclorofluorometano	75-69-4	H420	sol di rif/standard	EPA 5030+8260	P&T GC-MS	acque naturali
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT CNR IRSA 5170	estr LL /UV-VIS	acque reflue
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	1,1,1-tricloroetano	71-55-6	H420	sol di rif/standard	EPA 5030+8260	P&T GC-MS	acque naturali
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	interno	SPE-HPLC	acque naturali
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	metronidazolo	443-48-1	H351	sol di rif/standard	interno	HPLC	acque naturali
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	4,4'-DDT	50-29-3	H351	sol di rif/standard	interno	GC	acque naturali
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	dieldrin	60-57-1	H351	sol di rif/standard	interno	GC	acque naturali
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	2,4'-DDE	3424-82-6	H351	sol di rif/standard	interno	GC	acque naturali
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	2,4'-DDT	789-02-6	H351	sol di rif/standard	interno	GC	acque naturali
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	aldrin	309-00-2	H351	sol di rif/standard	interno	GC	acque naturali
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	benzene	71-43-2	H350	sol di rif/standard	EPA 5030+8260	P&T GC-MS	acque naturali
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	molinate	2212-67-1	H351	sol di rif/standard	interno	GC	acque naturali
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	trifluralina	1582-09-8	H351	sol di rif/standard	interno	GC	acque naturali
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	eptacloro	76-44-8	H351	sol di rif/standard	interno	GC	acque naturali
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	eptacloro epossido (Isomero A)	28044-83-9	H351	sol di rif/standard	interno	GC	acque naturali
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	diesel oil	na	H351	sol di rif/standard	interno	GC	acque naturali
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	1,2-dicloroetano	107-06-2	H350	solvente	M.U. 980/1 :1993	estr LL /titolazione	acque reflue
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	formaldeide 30-40% stabilizzata con metanolo	50-00-0	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 5010		acque reflue
ARPA Lombardia- Bergamo	Daniela Rizzo 0354221889	formaldeide (30-40% stabilizzata con metanolo)	50-00-0	H350	reagente	APAT CNR IRSA 5170	estr LL /UV-VIS	acque reflue
ARPA Lombardia UO Lab MI via Juvara	Dott.ssa Clerici/Dott. Robles 0274872221-258	1,1,1-tricloroetano	71-55-6	H420	sol di rif/standard	APAT IRSA CNR 5140;APAT IRSA CNR 5150	GC- ECD	acque naturali

ARPA Lombardia UO Lab MI via Juvara	Dott.ssa Clerici/Dott. Robles 0274872221-258	1,1,1-tricloroetano	71-55-6	H420	sol di rif/standard	Metodo Interno (rif. EPA 5021-8021)	GC- ECD	suolo
ARPA Lombardia UO Lab MI via Juvara	Dott.ssa Clerici/Dott. Robles 0274872221-258	1,1,1-tricloroetano	71-55-6	H420	sol di rif/standard	EPA TO 15	GC-MS	altro
ARPA Lombardia UO Lab MI via Juvara	Dott.ssa Clerici/Dott. Robles 0274872221-258	1,1,1-tricloroetano	71-55-6	H420	sol di rif/standard	UNI EN ISO 13649:2002	GC-MS	altro
ARPA Lombardia UO Lab MI via Juvara	Dott.ssa Clerici/Dott. Robles 0274872221-258	bromoclorometano	74-83-9	H420	sol di rif/standard	EPA TO 15	GC-MS	altro
ARPA Lombardia UO Lab MI via Juvara	Dott.ssa Clerici/Dott. Robles 0274872221-258	bromoclorometano	74-83-9	H420	sol di rif/standard	UNI EN ISO 13649:2002	GC-MS	altro
ARPA UMBRIA sede TR e PG	Olga Moretti 07444796720	arsenico AAS	7440-38-2	H350	sol di rif/standard	UNI EN 14902	AA a fornetto di grafite	aria immissioni
ARPA UMBRIA sede TR	Olga Moretti 07444796720	BTEX Mix 1000 mg/l HC (Benzene)	71-43-2	H350	sol di rif/standard	Metodo interno	GC-FID	aria immissioni
ARPA UMBRIA sede TR	Olga Moretti 07444796720	cromato di potassio	7789-00-6	H350	sol di rif/standard	NIOSH 7600	COLORIMETRIA	aria emissioni
ARPA UMBRIA sede TR	Olga Moretti 07444796720	diclorometano	75-09-2	H351	reagente	UNI EN 15549+Metodo interno	GC-MS	aria immissioni
ARPA UMBRIA sede TR	Olga Moretti 07444796720	PAH mixture Ultra scientific PM-611(benzo(a)pyrene)	50-32-8	H350	sol di rif/standard	UNI EN 15549	GC-MS	aria immissioni
ARPA UMBRIA sede TR	Olga Moretti 07444796720	PAH mixture Ultra scientific PM-611(dibenzo(a,h)anthracene)	53-70-3	H350	sol di rif/standard	UNI EN 15549	GC-MS	aria immissioni
ARPA UMBRIA sede TR	Olga Moretti 07444796720	PAH mixture Ultra scientific PM-611(dichlorometano, solvente)	75-09-2	H351	sol di rif/standard	UNI EN 15550	GC-MS	aria immissioni
ARPA UMBRIA sede TR	Olga Moretti 07444796720	cromato di potassio	7789-00-6	H350	reagente			
ARPA UMBRIA sede PG	Ciccarelli Elisabetta 07551596550	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	Metodica pesticidi (Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAC 015)	GC-MS e GC-MS-MS	altro
ARPA UMBRIA sede PG	Ciccarelli Elisabetta 07551596550	dicromato di potassio (soluzione 0,1 N)	7778-50-9	H350	reagente	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 e CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1985 e APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003	Spettrofotometria UV-VIS	altro
ARPA UMBRIA sede PG	Ciccarelli Elisabetta 07551596550	epicloridrina	106-89-8	H350	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 2003/XX Final Draft	GC-MS	acque potabili
ARPA UMBRIA sede PG	Ciccarelli Elisabetta 07551596550	formaldeide	50-00-0	H351	reagente	Metodi biologici per le acque superficiali interne Manuali e Linee Guida ISPRA 111/2014 metodo 2030	Fissazione alghe secondo il PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE MACROFITE DEI CORSI D'ACQUA GUADABILI	acque naturali
ARPA UMBRIA sede PG	Ciccarelli Elisabetta 07551596550	formaldeide	50-00-1	H351	sol di rif/standard	EPA 5021 A 2003+EPA 8260 C 2006	GC-MS	rifiuti
ARPA UMBRIA sede PG	Ciccarelli Elisabetta 07551596550	arsenico AAS	7440-38-2	H350	sol di rif/standard	EPA 3051 A 2007+EPA 6010 C 2007	ICP-AES	
ARPA UMBRIA sede PG	Ciccarelli Elisabetta 07551596550	arsenico AAS	7440-38-2	H350	sol di rif/standard	UNI EN ISO 17294-2:2005	ICP-MS	
ARPA UMBRIA sede PG	Ciccarelli Elisabetta 07551596550	BTEX Mix HC (benzene)	71-43-2	H350	sol di rif/standard	EPA 5021 A 2003+EPA 8260 C 2006 e APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003	GC-MS e purge&trap GC-MS	
ARPA UMBRIA sede PG	Ciccarelli Elisabetta 07551596550	Custom PAH 22-200 ppm(benzo(a)pirene)	50-32-8	H350	sol di rif/standard	EPA 3550 C 2007+ EPA 3630 C 1996+ EPA 8270 D 2014	GC-MS	suolo, sedimenti, rifiuti
ARPA UMBRIA sede PG	Ciccarelli Elisabetta 07551596550	Custom PAH 22-200 ppm(dibenzo(a,h)anthracene)	53-70-3	H350	sol di rif/standard	EPA 3550 C 2007+ EPA 3630 C 1996+ EPA 8270 D 2016	GC-MS	suolo, sedimenti, rifiuti
ARPA UMBRIA sede PG	Ciccarelli Elisabetta 07551596550	Custom PAH 22-200 ppm(dibenzo(a,l)pirene)	191-30-0	H350	sol di rif/standard	EPA 3550 C 2007+ EPA 3630 C 1996+ EPA 8270 D 2022	GC-MS	suolo, sedimenti, rifiuti
ARPA UMBRIA sede PG	Ciccarelli Elisabetta 07551596550	Custom PAH 22-200 ppm(diclorometano, solvente)	75-09-2	H351	sol di rif/standard	EPA 3550 C 2007+ EPA 3630 C 1996+ EPA 8270 D 2023	GC-MS	suolo, sedimenti, rifiuti
Sicilia S.T. CL	Di Stefano Camillo 3204652853	tetracloroetilene	127-18-4	H351	solvente	det. Idrocarburi C>12 (interno)	IR	acque reflue
Sicilia S.T. CL	Di Stefano Camillo 3204652853	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT IRSA CNR 2003-5170	Spettrofot. VIS.	acque reflue
Sicilia S.T. CL	Di Stefano Camillo 3204652853	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	APAT IRSA CNR 5130 2003	Titolazione	acque reflue
Arpa Sicilia - ST CT	Marcello Tarantello 0952545140	etere di petrolio	8032-32-4	H350	solvente	Idrocarburi nei suoli e in matrice solida		altro
Arpa Sicilia - ST CT	Marcello Tarantello 0952545140	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 3550		
Arpa Sicilia - ST CT	Marcello Tarantello 0952545140	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 3545		
Arpa Sicilia - ST CT	Marcello Tarantello 0952545140	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	IPA e PCB acque		
Arpa Sicilia - ST CT	Marcello Tarantello 0952545140	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	IPA particolato atmosferico (UNI EN 15549)		

Arpa Sicilia - ST CT	Marcello Tarantello 0952545140	etere di petrolio	8032-32-4	H350	solvente	Idrocarburi acque	GC	
Arpa Sicilia - ST CT	Marcello Tarantello 0952545140	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	APAT IRSA CNR 29/2003 5130	Titolazione	acque reflue
Arpa Sicilia - ST CT	Marcello Tarantello 0952545140	fenolftaleina	77-09-8	H350	reagente	APAT IRSA CNR 29/2003 2010	Titolazione	acque naturali
Arpa Sicilia - ST CT	Marcello Tarantello 0952545140	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT IRSA CNR 29/2003 5170	Spettrofot. VIS.	acque reflue
Arpa Sicilia - ST CT	Marcello Tarantello 0952545140	cloruro di cobalto(II) esaidrato	7791-13-1	H350	sol di rif/standard	APAT IRSA CNR 29/2003 2020 c		acque naturali
Arpa Sicilia - ST CT	Marcello Tarantello 0952545140	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	APAT IRSA CNR 29/2003 8020		acque reflue
Arpa Sicilia - ST CT	Marcello Tarantello 0952545140	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	APAT IRSA CNR 5130 Man 29 2003	Titolazione	acque reflue
Arpa Sicilia - ST CT	Marcello Tarantello 0952545140	berillio soluzione standard	7440-41-7	H350	sol di rif/standard	Determinazione metalli (EPA 200,7 - EPA 200,8)		
Arpa Sicilia - ST CT	Marcello Tarantello 0952545140	arsenico soluzione standard	7440-38-2	H350	sol di rif/standard	Determinazione metalli (EPA 200,7 - EPA 200,8)		
Arpa Sicilia - ST CT	Marcello Tarantello 0952545140	cadmio soluzione standard	7440-43-9	H350	sol di rif/standard	Determinazione metalli (EPA 200,7 - EPA 200,8)		
Arpa Sicilia - ST CT	Marcello Tarantello 0952545140	miscela idrocarburi (DIESEL FUEL)	68476-34-6	H350	sol di rif/standard	ISO 9377-2; EPA 3550 + EPA 8015		acque naturali
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 1613 - UNI EN 1948		
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 1668		altro
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	Idrocarburi nei suoli e in matrice solida		altro
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	diesel range organics (diclorometano, solvente)	75-09-2	H351	sol di rif/standard			
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 3550		
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	IPA e PCB acque con SPE (C8/Env+)		
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	IPA particolato atmosferico (UNI EN 15549)		
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	etere di petrolio	8032-32-4	H350	solvente	metodo di purificazione su colonne multistrato per analisi diossine		
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	triclorotrifluoroetano	76-13-1	H420	solvente	Idrocarburi acque (Manuale APAT - IRSA CNR 5160)	FT IR	
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	tetracloroetilene	127-18-4	H351	solvente	Idrocarburi acque (Manuale APAT - IRSA CNR 5160)	FT IR	
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	APAT IRSA CNR 29/2003 5130	Titolazione	acque reflue
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	fenolftaleina	77-09-8	H350	reagente	APAT IRSA CNR 29/2003 2010	Titolazione	acque naturali
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT IRSA CNR 29/2003 5170	Spettrofot. VIS.	acque reflue
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	cloruro di cobalto(II) esaidrato	7791-13-1	H350	sol di rif/standard	APAT IRSA CNR 29/2003 2020 c		acque naturali
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	APAT IRSA CNR 29/2003 8020		acque reflue
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	Metodo VII.3 DM 13/9/1999 - Determinazione Carbonio organico nei suoli (METODO WALKLEY-BLACK)		acque reflue
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	berillio soluzione standard	7440-41-7	H350	sol di rif/standard	Determinazione metalli (EPA 200,7 - EPA 200,8)		
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	arsenico soluzione standard (arsenico triossido)	1327-53-3	H350	sol di rif/standard	Determinazione metalli (EPA 200,7 - EPA 200,8)		
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	cadmio soluzione standard (cadmio nitrato)	10325-94-7	H350	sol di rif/standard	Determinazione metalli (EPA 200,7 - EPA 200,8)		
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	mercurio soluzione standard	7439-97-6	H350	sol di rif/standard	Determinazione metalli (EPA 200,7 - EPA 200,8)		
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	mepanipirim	110235-47-7	H351	sol di rif/standard	APAT IRSA CNR 5060 Man 29 2003		acque naturali
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	propargite	2312-35-8	H351	sol di rif/standard	APAT IRSA CNR 5060 Man 29 2004		acque naturali
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	pymetrozine	123312-89-0	H351	sol di rif/standard	APAT IRSA CNR 5060 Man 29 2005		acque naturali
Arpa Sicilia - ST PA	Vittoria Giudice 091 7033518	gamma-chlordane	5103-74-2	H351	sol di rif/standard	APAT IRSA CNR 5060 Man 29 2006		acque naturali
Sicilia S.T. SR	Liali Maria 3204649797	miscela di metalli CPA chem cod. prodotto C1AC105NL1 (cadmio)	7440-43-9	H350	sol di rif/standard	det.metalli EPA 6020A -2007	ICP-MS	acque naturali
Sicilia S.T. SR	Liali Maria 3204649798	miscela di metalli CPA chem cod. prodotto C1AC105NL1 (cadmio)	7440-43-9	H350	sol di rif/standard	det.metalli EPA 6020A -2007	ICP-MS	suolo
Sicilia S.T. SR	Liali Maria 3204649799	miscela di metalli CPA chem cod. prodotto C1AC105NL1 (cadmio)	7440-43-9	H350	sol di rif/standard	det.metalli EPA 6020A -2007	ICP-MS	acque reflue
Sicilia S.T. SR	Liali Maria 3204649799	miscela di metalli CPA chem - cod. prodotto FFA4K15NL1 (cadmio)	7440-43-9	H350	sol di rif/standard	det.metalli EPA 6010C -2007	ICP-OES	acque naturali
Sicilia S.T. SR	Liali Maria 3204649799	miscela di metalli CPA chem - cod. prodotto FFA4K15NL1 (cadmio)	7440-43-9	H350	sol di rif/standard	det.metalli EPA 6010C -2007	ICP-OES	suolo

Sicilia S.T. SR	Liali Maria 3204649799	miscela di metalli CPA chem - cod. prodotto FFA4K15NL1 (cadmio)	7440-43-9	H350	sol di rif/standard	det.metalli EPA 6010C -2007	ICP-OES	acque reflue
Sicilia S.T. SR	Liali Maria 3204649799	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 3550C	ultrasuoni	rifiuti
Sicilia S.T. SR	Liali Maria 3204649799	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	IPA particolato atmosferico (EPA 3550)	ultrasuoni	filtri particolato
Sicilia S.T. SR	Liali Maria 3204649799	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	IPA e PCB (EPA 3550)	ultrasuoni	suoli/sedimenti
Sicilia S.T. SR	Liali Maria 3204649799	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	APAT IRSA CNR 29/2003 5130	Titolazione	acque reflue
Sicilia S.T. SR	Liali Maria 3204649799	fenolftaleina	77-09-8	H350	reagente	APAT IRSA CNR 29/2003 2010	Titolazione	acque naturali
Sicilia S.T. SR	Liali Maria 3204649799	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT IRSA CNR 29/2003 5170	Spettrofot. VIS.	acque reflue
Arpa Sicilia-ST TP	Lorenzo Gentile 3204391360	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	APAT IRSA CNR 29/2003 5130	Tritrimetria	acque reflue
Arpa Sicilia-ST TP	Lorenzo Gentile 3204391360	fenolftaleina	77-09-8	H350	reagente	APAT IRSA CNR 29/2003 2010	Tritrimetria	acque naturali
Arpa Sicilia-ST TP	Lorenzo Gentile 3204391360	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT IRSA CNR 29/2003 5170	Spettrofot.Vis	acque reflue
Arpa Sicilia-ST TP	Lorenzo Gentile 3204391360	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	IRSA CNR Quad 64	Tritrimetria	
Arpa Sicilia-ST TP	Lorenzo Gentile 3204391360	cromo VI soluzione standard (dicromato d'ammonio)	7789-09-5	H350	sol di rif/standard	EPA 218.6	Cromatografia Ionica	acque naturali
Arpa Sicilia-ST TP	Lorenzo Gentile 3204391360	arsenico soluzione standard (acido arsenico)	7778-39-4	H350	sol di rif/standard	Determinazione metalli(EPA 200.7)	spettroscopia di emissione(ICP-OES)	
Arpa Sicilia-ST TP	Lorenzo Gentile 3204391360	cadmio soluzione standard (nitrato di cadmio)	10325-94-7	H350	sol di rif/standard	Determinazione metalli(EPA 200.7)	spettroscopia di emissione(ICP-OES)	
Arpa Sicilia-ST TP	Lorenzo Gentile 3204391360	berillio soluzione standard (berillio acetato basico)	19049-40-2	H350	sol di rif/standard	Determinazione metalli(EPA 200.7)	spettroscopia di emissione(ICP-OES)	
Arpa Sicilia-ST TP	Lorenzo Gentile 3204391360	nicel soluzione standard (nitrato di nicel)	13138-45-9	H350	sol di rif/standard	Determinazione metalli(EPA 200.7)	spettroscopia di emissione(ICP-OES)	
Arpa Sicilia-ST TP	Lorenzo Gentile 3204391360	cobalto soluzione standard (nitrato di cobalto)	10141-05-6	H350	sol di rif/standard	Determinazione metalli(EPA 200.7)	spettroscopia di emissione(ICP-OES)	
APPA Bolzano	dott. C. Bachmann 0471-417201	dicromato di potassio (soluzione 0,25 N)	7778-50-9	H350	reagente	APAT IRSA nr. 5080 Man 29/2003 secondo me è 5130	Titolazione analisi COD	acque reflue
APPA Bolzano	dott. C. Bachmann 0471-417201	VOC mixture Supelco 48132 (tetracloruro di carbonio)	56-23-5	H350	sol di rif/standard	Rapp. Istisan 2007/31 ISS CAA 036	GC	acque potabili
APPA Bolzano	dott. C. Bachmann 0471-417201	VOC mixture Supelco 48132 (tricloroetilene)	79-01-06	H350	sol di rif/standard	Rapp. Istisan 2007/31 ISS CAA 036	GC	acque potabili
APPA Bolzano	dott. C. Bachmann 0471-417201	VOC mixture Supelco 48132 (1,2-dibromoetano)	106-93-4	H350	sol di rif/standard	Rapp. Istisan 2007/31 ISS CAA 036	GC	acque potabili
APPA Bolzano	dott. C. Bachmann 0471-417201	VOC mixture Supelco 48132 (1,2-dicloroetano)	107-06-02	H350	sol di rif/standard	Rapp. Istisan 2007/31 ISS CAA 036	GC	acque potabili
APPA Bolzano	dott. C. Bachmann 0471-417201	PAH mixture Ultra scientific PM-611(benzo(a)pirene)	50-32-8	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 5080 Man 29/2008	HPLC-FL	acque potabili
APPA Bolzano	dott. C. Bachmann 0471-417201	PAH mixture Ultra scientific PM-611(dibenzo(a,h)antracene)	53-70-3	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 5080 Man 29/2010	HPLC-FL	acque potabili
APPA Bolzano	dott. C. Bachmann 0471-417202	PAH mixture Ultra scientific PM-611(dichlorometano, solvente)	75-09-2	H351	sol di rif/standard	UNI EN 15550	GC-MS	aria immissioni
APPA Bolzano	dott. C. Bachmann 0471-417201	dicromato di potassio (soluzione 0,25 N)	7778-50-9	H350	reagente	APAT CNR IRSA 5130 Man 29/2003	Titolazione analisi COD	acque reflue
APPA Bolzano	dott. C. Bachmann 0471-417201	BTEX Mix Supelco 47505(benzene)	71-43-2	H350	sol di rif/standard	Rapp. Istisan 2007/31 ISS CAA 036	Purge and Trap GC-MS	acque potabili
APPA Bolzano	dott. C. Bachmann 0471-417201	captafol	2425-06-01	H350	sol di rif/standard	Rapp. Istisan 2007/31 ISS CAC 015	GC-MS	acque potabili
APPA Bolzano	dott. C. Bachmann 0471-417201	HCB	118-74-1	H350	sol di rif/standard	Rapp. Istisan 2007/31 ISS CAC 015	LC-MS	acque potabili
APPA Bolzano	dott. C. Bachmann 0471-417201	nitrofen	1836-75-5	H350	sol di rif/standard	Rapp. Istisan 2007/31 ISS CAC 015	GC-MS	acque potabili
APPA Bolzano	dott. C. Bachmann 0471-417201	oxyfluorfen	42874-03-3	H350	sol di rif/standard	Rapp. Istisan 2007/31 ISS CAC 015	LC-MS	acque potabili
APPA Bolzano	dott. C. Bachmann 0471-417201	propyzamide	23950-58-5	H350	sol di rif/standard	Rapp. Istisan 2007/31 ISS CAC 015	LC-MS	acque potabili
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210645	2-nitronaftalene	581-89-5	H350	sol di rif/standard	Metodo interno	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	aria emissioni
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210646	Custom PAH 22-200 ppm(antracene)	120-12-7	H350	sol di rif/standard	EPA 8270D (matrici solide) + APAT 5080 (matrici acquose) + UNI EN 15549 (aria)	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210647	Custom PAH 22-200 ppm(benzo(a)antracene)	56-55-3	H350	sol di rif/standard	EPA 8270D (matrici solide) + APAT 5080 (matrici acquose) + UNI EN 15549 (aria)	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210648	Custom PAH 22-200 ppm(benzo(b)fluorantene)	205-99-2	H350	sol di rif/standard	EPA 8270D (matrici solide) + APAT 5080 (matrici acquose) + UNI EN 15549 (aria)	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210649	Custom PAH 22-200 ppm(benzo(k)fluorantene)	207-08-9	H350	sol di rif/standard	EPA 8270D (matrici solide) + APAT 5080 (matrici acquose) + UNI EN 15549 (aria)	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210650	Custom PAH 22-200 ppm(benzo(ghi)perilene)	191-24-2	H350	sol di rif/standard	EPA 8270D (matrici solide) + APAT 5080 (matrici acquose) + UNI EN 15549 (aria)	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210651	Custom PAH 22-200 ppm(benzo(a)pirene)	50-32-8	H350	sol di rif/standard	EPA 8270D (matrici solide) + APAT 5080 (matrici acquose) + UNI EN 15549 (aria)	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210652	Custom PAH 22-200 ppm(crisene)	218-01-9	H350	sol di rif/standard	EPA 8270D (matrici solide) + APAT 5080 (matrici acquose) + UNI EN 15549 (aria)	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	altro

Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210653	Custom PAH 22-200 ppm(dibenzo(a,h)antracene)	53-70-3	H350	sol di rif/standard	EPA 8270D (matrici solide) + APAT 5080 (matrici acquose) + UNI EN 15549 (aria)	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210654	Custom PAH 22-200 ppm(indeno(1,2,3-cd)pirene)	193-39-5	H351	sol di rif/standard	EPA 8270D (matrici solide) + APAT 5080 (matrici acquose) + UNI EN 15549 (aria)	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210655	Custom PAH 22-200 ppm(naftalene)	91-20-3	H351	sol di rif/standard	EPA 8270D (matrici solide) + APAT 5080 (matrici acquose) + UNI EN 15549 (aria)	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210656	Custom PAH 22-200 ppm (fenantrene)	85-01-8	H351	sol di rif/standard	EPA 8270D (matrici solide) + APAT 5080 (matrici acquose) + UNI EN 15549 (aria)	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210657	Custom PAH 22-200 ppm (dibenzo(a,h)pirene)	189-64-0	H350	sol di rif/standard	EPA 8270D (matrici solide) + APAT 5080 (matrici acquose) + UNI EN 15549 (aria)	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210658	Custom PAH 22-200 ppm (dibenzo(a,i)pirene)	189-55-9	H350	sol di rif/standard	EPA 8270D (matrici solide) + APAT 5080 (matrici acquose) + UNI EN 15549 (aria)	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210659	Custom PAH 22-200 ppm (dibenzo(a,l)pirene)	191-30-0	H350	sol di rif/standard	EPA 8270D (matrici solide) + APAT 5080 (matrici acquose) + UNI EN 15549 (aria)	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210660	Custom PAH 22-200 ppm (dibenzo(a,e)pirene)	192-65-4	H350	sol di rif/standard	EPA 8270D (matrici solide) + APAT 5080 (matrici acquose) + UNI EN 15549 (aria)	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210661	Custom PAH 22-200 ppm (benzo(e)pirene)	192-97-2	H350	sol di rif/standard	EPA 8270D (matrici solide) + APAT 5080 (matrici acquose) + UNI EN 15549 (aria)	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210662	Custom PAH 22-200 ppm (diclorometano, solvente)	75-09-2	H351	sol di rif/standard	EPA 8270D (matrici solide) + APAT 5080 (matrici acquose) + UNI EN 15549 (aria)	Estrazione con solvente e analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210645 Dott.ssa Billi 0544210620	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	Metodi interni + EPA 8270D + APAT 5080 UNI EN 15549	Principale solvente impiegato per le estrazioni	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.ssa Billi 0544210620	arsenito di sodio	7784-46-5	H350	reagente	IRSA quaderno 64 metodo 17	Pre-trattamento	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210645 Dott.ssa Billi 0544210620	acrilonitrile	107-13-1	H350	sol di rif/standard		Analisi GC-FID	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210645 Dott.ssa Billi 0544210620	formaldeide	50-00-0	H350	reagente	APAT CNR IRSA 5170 - 5180 Man 29/2003	Spettrofotometrica	acque reflue
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210645 Dott.ssa Billi 0544210620	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	APAT CNR IRSA 5130 Man 29/2003	Titolazione Volumetrica	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.ssa Billi 0544210620	dicromato di ammonio	7789-09-5	H350	sol di rif/standard	EPA 7199A	Cromatografia ionica	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210645 Dott.ssa Billi 0544210620	cromato di potassio	7789-00-6	H350	reagente	APAT CNR IRSA 4090 Man 29/2003	Titolazione argentometrica con indicatore	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210645 Dott.ssa Billi 0544210620	tetracloroetilene	127-18-4	H351	solvente	Metodo interno	FT IR	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210645 Dott.ssa Billi 0544210620	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003	Determinazione spettrofotometrica (Fenoli)	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.Scaroni 0544210645 Dott.ssa Billi 0544210620	fenoltaleina	77-09-8	H350	reagente	APAT CNR IRSA 4110 Man 29 2003	Spettrofotometrica	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.ssa Billi 0544210620	idrossilammina cloridrato	5470-11-1	H351	reagente	Metodo interno Lfe	Estrazione selettiva	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.ssa Billi 0544210620	Mix surrogate standard method 8260 (codice prodotto) STM-530, (1,2 dicloroetano d4)	17060-07-0	H350	sol di rif/standard	EPA 5035/EPA 8260 B	Analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.ssa Billi 0544210621	Mix surrogate standard method 8260 (codice prodotto) STM-530, (dibromofluorometano)	1868-53-7	H420	sol di rif/standard		Analisi GC-MS	altro
Arpa EMR- Sez. RA	Dott. Bandini 0544210606	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	sol di rif/standard	APAT IRSA CNR 8020:2003/ UNI ISO EN 11349/2009	Test tossicologici	acque reflue
Arpa EMR- Sez. RA	Dott. Bandini 0544210606	formaldeide	50-00-0	H350	reagente	analisi del macrobenthos	prove biologiche	acque naturali
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.ssa Pagnani 0544210628	chloramphenicol glucose yeast extract agar (cloramfenicolo)	56-75-7	H350	reagente	Conteggio carica batterica	agar germi	acque potabili
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.ssa Pagnani 0544210628	silicone in soluzione (tetraclorometano)	56-23-5	H351	reagente	Monitoraggio pollini aerodispersi		
Arpa EMR- Sez. RA	Dott.ssa Pagnani 0544210628	silicone in soluzione (tetraclorometano)	56-23-5	H420	reagente	Monitoraggio pollini aerodispersi		
ARPAER – Bologna	Maria Antonietta Bucci Sabattini 3351411190	kit Lange LCK (314-414-514)	7778-50-9	H350	reagente	ISO 15705:2002	VIS	acque reflue

ARPAER – Bologna	Maria Antonietta Bucci Sabattini 3351411190	kit Lange LCK 332 (cloroformio)	67-66-3	H351	reagente	M.U. 201:2006	VIS	acque reflue
ARPAER – Bologna	Maria Antonietta Bucci Sabattini 3351411190	kit Lange LCK 333 (diclorometano)	75-09-2	H351	reagente	M.U. 201:2006	VIS	acque reflue
ARPAER – Bologna	Maria Antonietta Bucci Sabattini 3351411190	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	VIS	acque reflue
ARPAER – Bologna	Maria Antonietta Bucci Sabattini 3351411190	kit Lange LCK 331 (cloroformio)	67-66-3	H351	reagente	Lange: test in cuvetta	VIS	acque reflue
ARPAER – Bologna	Maria Antonietta Bucci Sabattini 3351411190	formaldeide	50-00-0	H351	reagente	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	Nessuno	acque reflue
APPA TN	Chemelli 0461 493002	formaldeide 37%	50-00-0	H351	sol di rif/standard	UNICHIM 487	UV-VIS	aria emissioni
APPA TN	Chemelli 0461 493002	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	ISO 18287 2006	GC-MS	suolo
APPA TN	Chemelli 0461 493002	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	sol di rif/standard	EPA 3060A + EPA 7196A	UV-VIS	suolo
APPA TN	Chemelli 0461 493003	Mix surrogate standard method 8260 (codice prodotto) STM-530, (1,2 dicloroetano d4)	17060-07-0	H350	sol di rif/standard	EPA 5030C: 2003+EPA 8230C:2007	P&T GC-MS	altro
APPA TN	Chemelli 0461 493004	Mix surrogate standard method 8260 (codice prodotto) STM-530, (dibromofluorometano)	1868-53-7	H420	sol di rif/standard	EPA 5030C: 2003+EPA 8230C:2008	P&T GC-MS	altro
APPA TN	Chemelli 0461 493002	tetraclorometano	56-23-5	H351	sol di rif/standard	EPA 5030C: 2003+EPA 8230C:2006	P&T GC-MS	
APPA TN	Chemelli 0461 493002	triclorotrifluoroetano	76-13-1	H420	solvente	APAT IRSA 5160-B2 (Idrocarburi totali)	IR	acque potabili
APPA TN	Chemelli 0461 493002	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	estraz liquido liquido; SPE GC-MS	altro
APPA TN	Chemelli 0461 493002	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	metodo interno	eluizione su fase solida	alimenti
APPA TN	Chemelli 0461 493002	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	estrazione+spettrofotometria	acque naturali
APPA TN	Chemelli 0461 493002	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003	estrazione+spettrofotometria	acque naturali
APPA TN	Chemelli 0461 493002	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	digestione+titolazione	acque naturali
APPA TN	Chemelli 0461 493002	1,2-dicloroetano	107-06-2	H350	solvente	APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	estrazione+spettrofotometria	acque reflue
ARPA Calabria Dipartimento Provinciale di Cosenza	Spadafora Giuliana 0984790356	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	GC-MS	acque naturali
ARPA Calabria Dipartimento Provinciale di Cosenza	Spadafora Giuliana 0984790356	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	Spettrofotometrica	acque naturali
ARPA Calabria Dipartimento Provinciale di Cosenza	Spadafora Giuliana 0984790356	IQC-026 (berillio acetato)	543-81-7	H350	sol di rif/standard	UNI EN ISO 17294	ICP-MS	acque naturali
ARPA Calabria Dipartimento Provinciale di Cosenza	Spadafora Giuliana 0984790356	Custom PAH 22-200 ppm (benzo(a)pirene)	50-32-8	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	GC-MS	acque naturali
ARPA Calabria Dipartimento Provinciale di Cosenza	Spadafora Giuliana 0984790356	Custom PAH 22-200 ppm (dibenzo(a,h)antracene)	53-70-3	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	GC-MS	acque naturali
ARPA Calabria Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia	Francesco Gionfriddo tel. 0963567367	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	Spettrofotometrica	acque reflue
ARPACAL DAP CZ	Ventrice Domenica 3475386928	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	Determinazione tensioattivi APAT IRSA CNR 5170 29/03	estrazione liquido liquido	acque reflue
ARPACAL DAP CZ	Ventrice Domenica 3475386928	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	Determinazione pesticidi (metodo interno)	estrazione	acque potabili
ARPACAL DAP CZ	Ventrice Domenica 3475386928	formaldeide	50-00-0	H351	reagente	Determinazione tensioattivi APAT IRSA CNR 5170 29/03	stabilizzazione campione	acque reflue
ARPACAL DAP CZ	Ventrice Domenica 3475386928	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	Determinazione COD APAT IRSA CNR 5130 29/03 + screening test in cuvetta	Titolazione o determinazione UV	acque reflue
APPA Bolzano	29.8 Laboratorio chimica fisica- Luca Verdi 0471-417140	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EN 15549:2008 Air quality - Standard method for the measurement of the concentration of benzo[a]pyrene in ambient air	utilizzo diclorometano per estrazione con bagno a ultrasuoni	altro
APPA Bolzano	29.8 Laboratorio chimica fisica- Luca Verdi 0471-417140	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EN 1948-1:2006 Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 1: Sampling of PCDDs/PCDFs	utilizzo diclorometano per pulizia linea prelievo diossine (prima e dopo)	aria emissioni
APPA Bolzano	29.8 Laboratorio chimica fisica- Luca Verdi 0471-417140	formaldeide	50-00-0	H351	sol di rif/standard	VDI 3862-6:2004 Gaseous emission measurement Measurement of formaldehyde by the acetylacetone method	utilizzo per taratura- metodo di Hantzsch + analisi fluorimetrica	aria immissioni
ARPA Puglia- Bari	Dott.ssa Francesca Ferieri 080 5533217	cadmio (nitrato di cadmio)	10325-94-7	H350	sol di rif/standard	Reg. CE 1881/06	analisi	alimenti
ARPA Puglia- Bari	Dott.ssa Francesca Ferieri 080 5533218	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 3510C 1996	Estrazione	acque naturali
ARPA Puglia- Bari	Dott.ssa Francesca Ferieri 080 5533220	kit (dicromato di potassio)	7778-50-9	H350	reagente	ISO 15705:2002	spettrofotometria	acque naturali
ARPA Puglia- Bari	Dott.ssa Francesca Ferieri 080 5533221	cromato di potassio	7789-00-6	H350	reagente	ISO 15705:2002	Estrazione	acque naturali
ARPA Puglia- Bari	Dott.ssa Francesca Ferieri 080 5533222	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	Estrazione	acque naturali
ARPA Puglia- Bari	Dott.ssa Francesca Ferieri 080 5533223	kit Lange LCK 331 (cloroformio)	67-66-3	H351	reagente	LCK331 tensioattivi cationici	spettrofotometria	acque naturali
ARPA Puglia- Bari	Dott.ssa Francesca Ferieri 080 5533224	kit Lange LCK 333 (diclorometano)	75-09-2	H351	reagente	LCK333 tensioattivi non ionici	spettrofotometria	acque naturali
ARPA Puglia- Bari	Dott.ssa Francesca Ferieri 080 5533225	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	Metodo interno (Sostanze estraibili in cloroformio)	Estrazione	acque naturali
ARPA Puglia DAP LE	Sturdà Filippo 0832-1810027	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 525.3	Estrazione	acque potabili
ARPA Puglia DAP LE	Sturdà Filippo 0832-1810027	cromato di potassio	7789-00-6	H350	reagente	APAT IRSA-CNR 29/2003 n.4090	Titolazione	acque reflue

ARPA Puglia DAP LE	Sturdà Filippo 0832-1810027	kit (cloroformio)	67-66-3	H351	reagente	Determinazione MBAS con kit ISO 15705:2002 DETERMINAZIONE DEL COD – METODO CON TUBI SIGILLATI A BASSA SCALA	Spettrofotometria con kit	acque reflue
ARPA Puglia DAP LE	Sturdà Filippo 0832-1810027	kit (dicromato di potassio)	7778-50-9	H350	reagente		Spettrofotometria con kit	acque reflue
ARPA Puglia DAP LE	Sturdà Filippo 0832-1810027	Custom pesticidi Mix 17-3 - 4,4' DDT	50-29-3	H351	sol di rif/standard	EPA 525.3	GC-MS	acque potabili
ARPA Puglia DAP LE	Sturdà Filippo 0832-1810027	Custom pesticidi Mix 17-3 - dieldrin	60-57-1	H351	sol di rif/standard	EPA 525.3	GC-MS	acque potabili
ARPA Puglia DAP LE	Sturdà Filippo 0832-1810027	Custom pesticidi Mix 17-3 - aldrin	309-00-2	H351	sol di rif/standard	EPA 525.3	GC-MS	acque potabili
ARPA Puglia DAP LE	Sturdà Filippo 0832-1810027	miscela IPA 100 ppm (benzo(a)pirene)	50-32-8	H350	sol di rif/standard	EPA 525.3	GC-MS	acque potabili
ARPA Puglia DAP LE	Sturdà Filippo 0832-1810027	miscela IPA 100 ppm, (dibenzo(a,h)antracene)	53-70-3	H350	sol di rif/standard	EPA 525.3	GC-MS	acque potabili
ARPA Puglia DAP LE	Sturdà Filippo 0832-1810027	miscela IPA 100 ppm (diclorometano, solvente)	75-09-2	H351	sol di rif/standard	EPA 525.3	GC-MS	acque potabili
ARPA Puglia DAP LE	Sturdà Filippo 0832-1810027	VOC Internal Standard/Surrogate Solution 1,2-Dichloroethane-d4	17060-07-0	H350	sol di rif/standard	UNI EN ISO 15680:2005	GC-MS P&T	acque potabili
ARPA Basilicata	dott.ssa K. Pilat /0971 656 275	Mix (tetraclorometano)	56-23-5	H351	sol di rif/standard	EPA 8260C 2006	GC-MS	acque naturali
ARPA Basilicata	dott.ssa K. Pilat /0971 656 275	Mix (triclorofluorometano)	75-69-4	H420	sol di rif/standard	EPA 8260C 2006	GC-MS	
ARPA Basilicata	dott.ssa K. Pilat /0971 656 275	Mix (1,1,1-tricloroetano)	71-55-6	H420	sol di rif/standard	EPA 8260C 2006	GC-MS	suolo
ARPA Basilicata	dott.ssa K. Pilat /0971 656 275	Mix (bromometano)	74-83-9	H420	sol di rif/standard	EPA 8260C 2006	GC-MS	
ARPA Basilicata	dott.ssa K. Pilat /0971 656 275	Mix (clorometano)	74-87-3	H351	sol di rif/standard	EPA 8260C 2006	GC-MS	suolo
ARPA Basilicata	dott.ssa K. Pilat /0971 656 275	Mix (clorometano)	74-87-3	H351	sol di rif/standard	EPA 8260C 2006	GC-MS	acque naturali
ARPA Basilicata	dott.ssa K. Pilat /0971 656 275	Mix (diclorodifluorometano)	75-71-8	H420	sol di rif/standard	EPA 8260C 2006	GC-MS	
Arpas Lab dipartimentale di CAGLIARI	M. P. Usai Tel. 070/4042604	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 3510C	GC-MS GC-MS-MS	altro
Arpas Lab dipartimentale di CAGLIARI	M. P. Usai Tel. 070/4042604	tetracloroetilene	127-18-4	H351	solvente	APAT CNR IRSA 5160	Spettroscopia IR	acque reflue
Arpas Lab dipartimentale di CAGLIARI	M. P. Usai Tel. 070/4042604	kit Lange (dicromato di potassio)	7778-50-9	H350	reagente	COD kit Lange LCK414 e LCK 314 ISPRA met 5135/2014	Spettrofotometria	acque reflue
Arpas Lab dipartimentale di ORISTANO	Sergio Puddu 0783 770609	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	estrazione SPE	GC-MS	acque potabili
Arpas Lab dipartimentale di ORISTANO	Sergio Puddu 0783 770609	cloruro di cobalto esaidrato	7791-13-1	H350	reagente	test tossicità Dunaliella, Selenastrum	micronutriente	sedimenti
Arpas Lab dipartimentale di ORISTANO	Sergio Puddu 0783 770609	formaldeide	50-00-0	H351	reagente	test fitoplancton	microscopia ottica	acque naturali
Arpas Lab dipartimentale di ORISTANO	Sergio Puddu 0783 770610	kit Lange (dicromato di potassio)	7778-50-9	H350	reagente	COD kit Lange LCK414 e LCK 314 ISPRA met 5135/2014	Spettrofotometria	acque reflue, superficiali, sotterranee e suoli
Arpas Lab dipartimentale di ORISTANO	Sergio Puddu 0783 770609	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	test tossicità Dunaliella, Selenastrum, Vibrio fischeri	micronutriente	sedimenti
Arpas Lab dipartimentale di NUORO	A. M. Piroddi Tel. 0784/233401	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 3510C	GC-MS	altro
Arpas Lab dipartimentale di NUORO	A. M. Piroddi Tel. 0784/233401	tetracloroetilene	127-18-4	H351	solvente	APAT CNR IRSA 5160	Spettroscopia IR	acque reflue
Arpas Lab dipartimentale di NUORO	A. M. Piroddi Tel. 0784/233401	kit Lange (dicromato di potassio)	7778-50-9	H350	reagente	COD kit Lange LCK414 e LCK 314 ISPRA met 5135/2014	Spettrofotometria	acque reflue
Arpas Lab dipartimentale di SASSARI	Pietro L. Caria 079 2835383	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 3510C	GC-MS GC-MS-MS	Acque superficiali, terreni
Arpas Lab dipartimentale di SASSARI	Pietro L. Caria 079 2835383	kit Lange LCK 333 (diclorometano)	75-09-2	H351	reagente	Tensioattivi non ionici kit Lange LCK333 APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°5170	Spettrofotometria	acque reflue
Arpas Lab dipartimentale di SASSARI	Pietro L. Caria 079 2835383	kit Lange LCK 331 (cloroformio)	67-66-3	H351	reagente	Tensioattivi Cationici kit Lange LCK331 APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°5170	Spettrofotometria	acque reflue
Arpas Lab dipartimentale di SASSARI	Pietro L. Caria 079 2835383	kit Lange LCK 332 (cloroformio)	67-66-3	H351	reagente	Tensioattivi anionici kit Lange LCK332 APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°5170	Spettrofotometria	acque reflue, acque superficiali
Arpas Lab dipartimentale di SASSARI	Pietro L. Caria 079 2835383	kit Lange (dicromato di potassio)	7778-50-9	H350	reagente	COD kit Lange LCK414 e LCK 314 ISPRA met 5135/2014	Spettrofotometria	acque reflue, superficiali, sotterranee e suoli
Arpas Lab dipartimentale del SULCIS	M.S. Palazzoli Tel. 0781/5110672	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 3510C	GC/GC-MS	altro
Arpas Lab dipartimentale del SULCIS	M.S. Palazzoli Tel. 0781/5110672	kit Lange LCK 333 (diclorometano)	75-09-2	H351	reagente	Tensioattivi non ionici kit Lange LCK333 APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°5170	Spettrofotometria	acque reflue
Arpas Lab dipartimentale del SULCIS	M.S. Palazzoli Tel. 0781/5110672	kit Lange LCK 331 (cloroformio)	67-66-3	H351	reagente	Tensioattivi Cationici kit Lange LCK331 APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°5170	Spettrofotometria	acque reflue
Arpas Lab dipartimentale del SULCIS	M.S. Palazzoli Tel. 0781/5110672	kit Lange LCK 332 (cloroformio)	67-66-3	H351	reagente	Tensioattivi anionici kit Lange LCK332 APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°5170	Spettrofotometria	acque reflue, acque superficiali
Arpas Lab dipartimentale del SULCIS	M.S. Palazzoli Tel. 0781/5110672	cloruro di cobalto esaidrato	7791-13-1	H350	reagente	test tossicità Dunaliella, Selenastrum		
Arpas Lab dipartimentale del SULCIS	M.S. Palazzoli Tel. 0781/5110672	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	sol di rif/standard	Tossico di riferimento per i test ecotossicologici		altro

ARPA LIGURIA	Dott. Paolo Legnani - 0183673260	benzene	71-43-2	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003	GC	acque potabili
ARPA LIGURIA	Dott. Paolo Legnani - 0183673260	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	Titolazione	acque reflue
ARPA LIGURIA	Dott. Paolo Legnani - 0183673260	cloroetene	75-01-4	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003	GC	acque naturali
ARPA LIGURIA	Dott. Paolo Legnani - 0183673260	tricloroetilene	79-01-6	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003	GC	acque potabili
ARPA LIGURIA	Dott. Paolo Legnani - 0183673260	fenoltaleina	77-09-8	H350	reagente	Reg. CEE n.2568/91 Allegato II - mod. Reg.CEE 702/07	Titolazione	alimenti
ARPA LIGURIA	Dott. Paolo Legnani - 0183673260	furfurolo	98-01-1	H351	reagente	Ricerca oli di semi	Spettrofotometrica	alimenti
ARPA LIGURIA	Dott. Paolo Legnani - 0183673260	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	Estrazione sostanze psicoattive (MI)	GC	altro
ARPA LIGURIA	Dott. Paolo Legnani - 0183673260	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 3510C + EPA 8081B	GC	sedimenti
ARPA LIGURIA	Dott. Paolo Legnani - 0183673260	4 amminoazobenzene	60-09-3	H350	sol di rif/standard	EPA 3535A + EPA 8270D	GC	acque naturali
ARPA LIGURIA	Dott. Paolo Legnani - 0183673260	4,4'-DDD	72-54-8	H351	sol di rif/standard	Rapp. ISTISAN 07/31 Met. ISS CAC 015 rev 00	GC	acque potabili
ARPA LIGURIA	Dott. Paolo Legnani - 0183673260	4,4'-DDE	72-55-9	H351	sol di rif/standard	Rapp. ISTISAN 07/31 Met. ISS CAC 015 rev 01	GC	acque potabili
ARPA LIGURIA	Dott. Paolo Legnani - 0183673260	esaclorobenzene	118-74-1	H350	sol di rif/standard	Rapp. ISTISAN 07/31 Met. ISS CAC 015 rev 02	GC	acque potabili
ARPA LIGURIA	Dott. Paolo Legnani - 0183673260	α -HCH	319-84-6	H351	sol di rif/standard	Rapp. ISTISAN 07/31 Met. ISS CAC 015 rev 03	GC	acque potabili
ARPA LIGURIA	Dott. Paolo Legnani - 0183673260	simazina	122-34-9	H351	sol di rif/standard	Rapp. ISTISAN 07/31 Met. ISS CAC 015 rev 04	GC	acque potabili
ARPA LIGURIA	Dott. Pier Paolo Toso 01984181248	Multistandard 24 elementi ICP nitrato di berillio da 0,1% a 0,25%	13597-99-4	H350	sol di rif/standard	UNI 17294-2:2005 / APAT CNR IRSA 3020 / EPA 6010B / EPA 6020A	ICP-OES / ICP-MS	acque potabili
ARPA LIGURIA	Dott. Pier Paolo Toso 01984181248	Multistandard 24 elementi ICP nitrato di nickel da 0,01% a 0,1 %	13138-45-9	H350	sol di rif/standard	UNI 17294-2:2005 / APAT CNR IRSA 3020 / EPA 6010B / EPA 6020A	ICP-OES / ICP-MS	acque potabili
ARPA LIGURIA	Dott. Pier Paolo Toso 01984181248	arsenico 1000 ppm (acido arsenico)	7778-39-4	H350	sol di rif/standard	prove di conferma qualitativa	ICP-OES / ICP-MS	acque potabili
ARPA LIGURIA	Dott. Pier Paolo Toso 01984181248	cadmio 1000 ppm	7440-43-9	H350	sol di rif/standard	prove di conferma qualitativa	ICP-OES / ICP-MS	acque potabili
ARPA LIGURIA	Dott. Pier Paolo Toso 01984181248	cromo VI 1000 ppm (dicromato di potassio)	7778-50-9	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 3150C / EPA 3060A+3155	Uv-VIS	acque naturali
ARPA LIGURIA	Dott. Pier Paolo Toso 01984181248	Mix taratura composti fenilstannici, (diclorometano, solvente)	75-09-2	H351	sol di rif/standard	metodo interno	HPLC-ICP-MS	acque naturali
ARPA LIGURIA	Dott. Pier Paolo Toso 01984181248	Mix taratura composti butilstannici, (diclorometano, solvente)	75-09-2	H351	sol di rif/standard	metodo interno	HPLC-ICP-MS	acque naturali
ARPA LIGURIA	Dott. Pier Paolo Toso 01984181248	Mix taratura composti tributilstannici, (diclorometano, solvente)	75-09-2	H351	sol di rif/standard	metodo interno	HPLC-ICP-MS	acque naturali
ARPA LIGURIA	Dott. Pier Paolo Toso 01984181248	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	UNI 10511-1:1996/A1	Volumetria	acque reflue
ARPA LIGURIA	Dott. Pier Paolo Toso 01984181248	fenoltaleina	77-09-8	H350	reagente	metodo interno	Volumetria	acque potabili
ARPA LIGURIA	Dott. Pier Paolo Toso 01984181248	formazina 4000 NTU (solfato di idrazina)	10034-93-2	H350	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 31/2007 met. ISS.BLA.030	Nefelometria	acque naturali
ARPA LIGURIA	Dott. Pier Paolo Toso 01984181248	EA-1000 Ni : mix di sali per riempimento colonne TOC (monossido di nichel)	1313-99-1	H350	reagente	D.M. 13/09/1999 metodi 7.1 e 14.1	analizzatore elementare	suolo
ARPA LOMBARDIA-Milano PB	Livio Mauri 02.74872526	triclorofluorometano	75-69-4	H420	sol di rif/standard	EPA	GC-MS	acque naturali
ARPA LOMBARDIA-Milano PB	Livio Mauri 02.74872526	triclorotrifluoroetano	76-13-1	H420	sol di rif/standard	EPA	GC-MS	acque naturali
ARPA LOMBARDIA-Milano PB	Livio Mauri 02.74872526	diclorotetrafluoroetano	76-14-2	H420	sol di rif/standard	EPA	GC-MS	acque naturali
ARPA LOMBARDIA-Milano PB	Livio Mauri 02.74872526	tetraclorometano	56-23-5	H420	sol di rif/standard	EPA	GC-MS	acque naturali
ARPA LOMBARDIA-Milano PB	Livio Mauri 02.74872526	1,1,1-tricloroetano	71-55-6	H420	sol di rif/standard	EPA	GC-MS	acque naturali
ARPA Lombardia Pavia	Marinone	tetraclorometano	56-23-5	H351	sol di rif/standard	EPA5030C/03+EPA8260C/06	P&T GC-MS	acque naturali
ARPA Lombardia Pavia	Marinone	1,1,1-tricloroetano	71-55-6	H420	sol di rif/standard	EPA5030C/03+EPA8260C/06	P&T GC-MS	acque naturali
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	VOC Ultrascientific DWM 588 - 2000 ug/ml - (benzene)	71-43-2	H350	sol di rif/standard	Metodo interno -APAT CNR-IRSA METODO 5140 MAN 29/2003 + APAT CNR-IRSA METODO 5150 MAN 29/2003	P&T GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	VOC Ultrascientific DWM 588 - 2000 ug/ml - (tetraclorometano)	56-23-5	H420	sol di rif/standard	Metodo interno -APAT CNR-IRSA METODO 5140 MAN 29/2003 + APAT CNR-IRSA METODO 5150 MAN 29/2003	P&T GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	VOC Ultrascientific DWM 588 - 2000 ug/ml - (1,2-dibromoetano)	106-93-4	H420	sol di rif/standard	Metodo interno -APAT CNR-IRSA METODO 5140 MAN 29/2003 + APAT CNR-IRSA METODO 5150 MAN 29/2003	P&T GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	VOC Ultrascientific DWM 588 - 2000 ug/ml - (1,1-dicloroetano)	75-34-3	H420	sol di rif/standard	Metodo interno -APAT CNR-IRSA METODO 5140 MAN 29/2003 + APAT CNR-IRSA METODO 5150 MAN 29/2003	P&T GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	VOC Ultrascientific DWM 588 - 2000 ug/ml - (1,1,2-tricloroetano)	79-00-5	H420	sol di rif/standard	Metodo interno -APAT CNR-IRSA METODO 5140 MAN 29/2003 + APAT CNR-IRSA METODO 5150 MAN 29/2003	P&T GC-MS	acque potabili

Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	VOC Ultrascientific DWM 588 - 2000 ug/ml - (1,1,2-tricloroetano)	79-00-5	H420	sol di rif/standard	Determinazione di composti organici volatili (VOCs) in suoli e sedimenti mediante Purge & Trap + GC/MS - EPA 5035A:2002 + EPA 5030C:2003 + EPA 8260B:1996	P&T GC-MS	Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	VOC Ultrascientific DWM 588 - 2000 ug/ml - (tricloroetilene)	79-01-6	H350	sol di rif/standard	Determinazione di composti organici volatili (VOCs) in suoli e sedimenti mediante Purge & Trap + GC/MS - EPA 5035A:2002 + EPA 5030C:2003 + EPA 8260B:1996	P&T GC-MS	Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	VOC Ultrascientific DWM 588 - 2000 ug/ml - (cloroetene)	75-01-4	H350	sol di rif/standard	Metodo interno -APAT CNR-IRSA METODO 5140 MAN 29/2003 + APAT CNR-IRSA METODO 5150 MAN 29/2003	P&T GC-MS	Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	VOC Ultrascientific DWM 588 - 2000 ug/ml - (benzene)	71-43-2	H350	sol di rif/standard	Metodo Interno U.RP.M716 - DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	VOC Ultrascientific DWM 588 - 2000 ug/ml - (tetraclorometano)	56-23-5	H420	sol di rif/standard	Metodo Interno U.RP.M716 - DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	VOC Ultrascientific DWM 588 - 2000 ug/ml - (1,2-dibromoetano)	106-93-4	H420	sol di rif/standard	Metodo Interno U.RP.M716 - DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	VOC Ultrascientific DWM 588 - 2000 ug/ml - (1,1-dicloroetano)	75-34-3	H420	sol di rif/standard	Metodo Interno U.RP.M716 - DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	VOC Ultrascientific DWM 588 - 2000 ug/ml - (1,1,2-tricloroetano)	79-00-5	H420	sol di rif/standard	Metodo Interno U.RP.M716 - DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	VOC Ultrascientific DWM 588 - 2000 ug/ml - (tricloroetilene)	79-01-6	H350	sol di rif/standard	Metodo Interno U.RP.M716 - DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	Custom Standard - 5000ug/mL in Metanolo (cloroetene)	75-01-4	H350	sol di rif/standard	EMISSIONI DA SORGENTE FISSA - DETERMINAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE IN MASSA DI SINGOLI COMPOSTI ORGANICI IN FORMA GASSOSA - METODO MEDIANTE CARBONI ATTIVI E DESORBIMENTO CON SOLVENTE - UNI EN 13649:2002	GC-MS	SOV aeriformi su fiale
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	Aromatic Hydrocarbons Mix 11 - 2000ug/mL in Metanolo (benzene)	71-43-2	H350	sol di rif/standard	APAT CNR-IRSA Metodo 5140 Man 29/2003aromatici e APAT CNR-IRSA 5150 Man.29/2003 - Solventi clorurati	GC-MS	Acqua
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (acenaftene)	83-32-9	H351	sol di rif/standard	Metodo interno rif. APAT CNR-IRSA METODO 5080 MAN 29/2003 - (U.RP.M250)	GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (acenaftilene)	208-96-8	H351	sol di rif/standard	Metodo interno rif. APAT CNR-IRSA METODO 5080 MAN 29/2003 - (U.RP.M250)	GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (antracene)	120-12-7	H351	sol di rif/standard	Metodo interno rif. APAT CNR-IRSA METODO 5080 MAN 29/2003 - (U.RP.M250)	GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (benzo(b)fluorantene)	205-99-2	H350	sol di rif/standard	Metodo interno rif. APAT CNR-IRSA METODO 5080 MAN 29/2003 - (U.RP.M250)	GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (benzo(k)fluorantene)	207-08-9	H350	sol di rif/standard	Metodo interno rif. APAT CNR-IRSA METODO 5080 MAN 29/2003 - (U.RP.M250)	GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (benzo(ghi)perilene)	191-24-2	H351	sol di rif/standard	Metodo interno rif. APAT CNR-IRSA METODO 5080 MAN 29/2003 - (U.RP.M250)	GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (crisene)	218-01-9	H350	sol di rif/standard	Metodo interno rif. APAT CNR-IRSA METODO 5080 MAN 29/2003 - (U.RP.M250)	GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (dibenzo(a,h)antracene)	53-70-3	H350	sol di rif/standard	Metodo interno rif. APAT CNR-IRSA METODO 5080 MAN 29/2003 - (U.RP.M250)	GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (fluorantene)	206-44-0	H351	sol di rif/standard	Metodo interno rif. APAT CNR-IRSA METODO 5080 MAN 29/2003 - (U.RP.M250)	GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (fluorene)	86-73-7	H351	sol di rif/standard	Metodo interno rif. APAT CNR-IRSA METODO 5080 MAN 29/2003 - (U.RP.M250)	GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (indeno(1,2,3-cd)pirene)	193-39-5	H351	sol di rif/standard	Metodo interno rif. APAT CNR-IRSA METODO 5080 MAN 29/2003 - (U.RP.M250)	GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (naftalene)	91-20-3	H351	sol di rif/standard	Metodo interno rif. APAT CNR-IRSA METODO 5080 MAN 29/2003 - (U.RP.M250)	GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (fenantrene)	85-01-8	H351	sol di rif/standard	Metodo interno rif. APAT CNR-IRSA METODO 5080 MAN 29/2003 - (U.RP.M250)	GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (pirene)	129-00-0	H351	sol di rif/standard	Metodo interno rif. APAT CNR-IRSA METODO 5080 MAN 29/2003 - (U.RP.M250)	GC-MS	acque potabili

Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (acenaftene)	83-32-9	H351	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (acenaftilene)	208-96-8	H351	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (antracene)	120-12-7	H351	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (benzo(b)fluorantene)	205-99-2	H350	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (benzo(k)fluorantene)	207-08-9	H350	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (benzo(ghi)perilene)	191-24-2	H351	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (crisene)	218-01-9	H350	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (dibenzo(a,h)antracene)	53-70-3	H350	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (fluorantene)	206-44-0	H351	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (fluorene)	86-73-7	H351	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (indeno(1,2,3-cd)pirene)	193-39-5	H351	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (naftalene)	91-20-3	H351	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (fenantrene)	85-01-8	H351	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (pirene)	129-00-0	H351	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (benzo(a)pirene)	50-32-8	H350	sol di rif/standard	Metodo interno rif. APAT CNR-IRSA METODO 5080 MAN 29/2003 - (U.RP.M250)	GC-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (benzo(e)pirene)	192-97-2	H350	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (dibenzo(a,l)pirene)	191-30-0	H350	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (dibenzo(a,e)pirene)	192-65-4	H351	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (dibenzo(a,i)pirene)	189-55-9	H351	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - 2000 ug/ml (dibenzo(a,h)pirene)	189-64-0	H350	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH mixture Ultra scientific PM 022 - (diclorometano, solvente)	75-09-2	H351	sol di rif/standard	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in suolo e rifiuti EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli

Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard 23 elementi in Acido Nitrico - 1000ug/ml Nichel (nitrato)	13138-45-9	H350	sol di rif/standard	Metodo Interno U.RP.M314 "Metalli in acque reflue, mineralizzazione ed ICP/MS" rif: APAT CNR IRSA Metodo 2010 Man 29/2003, EPA 200,8 Rev 5.5 1996	ICP-MS	acque reflue
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard in Acido Nitrico- 1000ug/ml Berillio (nitrato)	13597-99-4	H350	sol di rif/standard	Metodo Interno U.RP.M314 "Metalli in acque reflue, mineralizzazione ed ICP/MS" rif: APAT CNR IRSA Metodo 2010 Man 29/2003, EPA 200,8 Rev 5.5 1996	ICP-MS	acque reflue
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard 23 elementi in Acido Nitrico - 1000ug/ml Cadmio (nitrato)	10325-94-7	H350	sol di rif/standard	Metodo Interno U.RP.M314 "Metalli in acque reflue, mineralizzazione ed ICP/MS" rif: APAT CNR IRSA Metodo 2010 Man 29/2003, EPA 200,8 Rev 5.5 1996	ICP-MS	acque reflue
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard 23 elementi in Acido Nitrico - 1000ug/ml (Cobalto Nitrato)	10141-05-6	H350	sol di rif/standard	Metodo Interno U.RP.M314 "Metalli in acque reflue, mineralizzazione ed ICP/MS" rif: APAT CNR IRSA Metodo 2010 Man 29/2003, EPA 200,8 Rev 5.5 1996	ICP-MS	acque reflue
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard 23 elementi in Acido Nitrico - 1000ug/ml (Nichel Nitrato)	13138-45-9	H350	sol di rif/standard	Metodo Interno U.RP.M672 "Determinazione di Metalli su particolato" rf: EPA 625/R-96/010a	ICP-MS	Altro
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard in Acido Nitrico - 1000ug/ml Berillio (nitrato)	13597-99-4	H350	sol di rif/standard	Metodo Interno U.RP.M314 "Metalli in acque reflue, mineralizzazione ed ICP/MS" rif: APAT CNR IRSA Metodo 2010 Man 29/2003, EPA 200,8 Rev 5.5 1996	ICP-MS	Altro
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard 23 elementi in Acido Nitrico - 1000ug/ml Cadmio (nitrato)	10325-94-7	H350	sol di rif/standard	Metodo Interno U.RP.M672 "Determinazione di Metalli su particolato" rf: EPA 625/R-96/010a	ICP-MS	Altro
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard 23 elementi in Acido Nitrico - 1000ug/ml (Cobalto Nitrato)	10141-05-6	H350	sol di rif/standard	Metodo Interno U.RP.M672 "Determinazione di Metalli su particolato" rf: EPA 625/R-96/010a	ICP-MS	Altro
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard 23 elementi in Acido Nitrico - 1000ug/ml (Nichel Nitrato)	13138-45-9	H350	sol di rif/standard	Metodo interno U.RO.M739 "Determinazione metalli nel vino" rif: OIV-MA-AS322-13 R2013	ICP Ottico	Altro
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard in Acido Nitrico - 1000ug/ml Berillio (nitrato)	13597-99-4	H350	sol di rif/standard	Metodo Interno U.RP.M314 "Metalli in acque reflue, mineralizzazione ed ICP/MS" rif: APAT CNR IRSA Metodo 2010 Man 29/2003, EPA 200,8 Rev 5.5 1996	ICP-MS	Altro
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard 23 elementi in Acido Nitrico - 1000ug/ml Cadmio (nitrato)	10325-94-7	H350	sol di rif/standard	Metodo interno U.RO.M739 "Determinazione metalli nel vino" rif: OIV-MA-AS322-13 R2013	ICP Ottico	Altro
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard 23 elementi in Acido Nitrico - 1000ug/ml (Cobalto Nitrato)	10141-05-6	H350	sol di rif/standard	Metodo interno U.RO.M739 "Determinazione metalli nel vino" rif: OIV-MA-AS322-13 R2013	ICP Ottico	Altro
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard 23 elementi in Acido Nitrico - 1000ug/ml (Nichel Nitrato)	13138-45-9	H350	sol di rif/standard	Metodo interno U.RP.M848 "Determinazione dei metallinelle acque" rif: APHA 3120B - 2012	ICP Ottico	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard in Acido Nitrico - 1000ug/ml Berillio (nitrato)	13597-99-4	H350	sol di rif/standard	Metodo Interno U.RP.M314 "Metalli in acque reflue, mineralizzazione ed ICP/MS" rif: APAT CNR IRSA Metodo 2010 Man 29/2003, EPA 200,8 Rev 5.5 1996	ICP-MS	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard 23 elementi in Acido Nitrico - 1000ug/ml Cadmio (nitrato)	10325-94-7	H350	sol di rif/standard	Metodo interno U.RP.M848 "Determinazione dei metallinelle acque" rif: APHA 3120B - 2012	ICP Ottico	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard 23 elementi in Acido Nitrico - 1000ug/ml (Cobalto Nitrato)	10141-05-6	H350	sol di rif/standard	Metodo interno U.RP.M848 "Determinazione dei metallinelle acque" rif: APHA 3120B - 2012	ICP Ottico	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard 23 elementi in Acido Nitrico - 1000ug/ml (Nichel Nitrato)	13138-45-9	H350	sol di rif/standard	Metodo interno U.RP.M848 "Determinazione dei metallinelle acque" rif: APHA 3120B - 2012	ICP Ottico	acque naturali
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard in Acidi Nitrico - 1000ug/ml Berillio (nitrato)	13597-99-4	H350	sol di rif/standard	Metodo Interno U.RP.M314 "Metalli in acque reflue, mineralizzazione ed ICP/MS" rif: APAT CNR IRSA Metodo 2010 Man 29/2003, EPA 200,8 Rev 5.5 1996	ICP-MS	acque naturali
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard 23 elementi in Acido Nitrico - 1000ug/ml Cadmio (nitrato)	10325-94-7	H350	sol di rif/standard	Metodo interno U.RP.M848 "Determinazione dei metallinelle acque" rif: APHA 3120B - 2012	ICP Ottico	acque naturali
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	ICP Calibration Standard 23 elementi in Acido Nitrico - 1000ug/ml (Cobalto Nitrato)	10141-05-6	H350	sol di rif/standard	Metodo interno U.RP.M848 "Determinazione dei metallinelle acque" rif: APHA 3120B - 2012	ICP Ottico	acque naturali
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	Method DM471 Standard Mixtur 1 - 1000 ug/mL (benzene)	71-43-2	H350	sol di rif/standard	Determinazione composti organici volatili nelle acque (VOCs) mediante Purge & Trap e GC-MS - EPA 5030C:1996 + EPA 8260B:1996	GC-MS	Acqua
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	Method DM471 Standard Mixtur 1 - 1000 ug/mL (benzene)	71-43-2	H350	sol di rif/standard	UNI EN 13649:2002	GC-MS	Aria

Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	Standard - 2000ug/mL (benzene)	71-43-2	H350	sol di rif/standard	DETERMINAZIONE, TRAMITE LA TECNICA GC/MS, DI SOSTANZE ORGANICHE PERICOLOSE PRESENTI IN MISCELE DI SOLVENTI SOTTOFORMA DI IMPUREZZE - Metodo Interno U.rp.ma018	GC-MS	miscele di solventi
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 525 - 100 ug/mL (acenaftilene)	208-96-8	H351	sol di rif/standard	Determinazione di inquinanti semivolatili, antiparassitari ed IPA in GC/MS - EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli,Acqua
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 525 - 100 ug/mL (antracene)	120-12-7	H351	sol di rif/standard	Determinazione di inquinanti semivolatili, antiparassitari ed IPA in GC/MS - EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli,Acqua
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 525 - 100 ug/mL (benzo(b)fluorantene)	205-99-2	H350	sol di rif/standard	Determinazione di inquinanti semivolatili, antiparassitari ed IPA in GC/MS - EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli,Acqua
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 525 - 100 ug/mL (benzo(k)fluorantene)	207-08-9	H350	sol di rif/standard	Determinazione di inquinanti semivolatili, antiparassitari ed IPA in GC/MS - EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli,Acqua
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 525 - 100 ug/mL (benzo(ghi)perilene)	191-24-2	H351	sol di rif/standard	Determinazione di inquinanti semivolatili, antiparassitari ed IPA in GC/MS - EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli,Acqua
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 525 - 100 ug/mL (benzo(a)pirene)	50-32-8	H350	sol di rif/standard	Determinazione di inquinanti semivolatili, antiparassitari ed IPA in GC/MS - EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli,Acqua
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 525 - 100 ug/mL (benzo(e)pirene)	192-97-2	H350	sol di rif/standard	Determinazione di inquinanti semivolatili, antiparassitari ed IPA in GC/MS - EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli,Acqua
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 525 - 100 ug/mL (crisene)	218-01-9	H350	sol di rif/standard	Determinazione di inquinanti semivolatili, antiparassitari ed IPA in GC/MS - EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli,Acqua
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 525 - 100 ug/mL (dibenzo(a,h)antracene)	53-70-3	H350	sol di rif/standard	Determinazione di inquinanti semivolatili, antiparassitari ed IPA in GC/MS - EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli,Acqua
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 525 - 100 ug/mL (fluorene)	86-73-7	H351	sol di rif/standard	Determinazione di inquinanti semivolatili, antiparassitari ed IPA in GC/MS - EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli,Acqua
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 525 - 100 ug/mL (indeno(1,2,3-cd)pirene)	193-39-5	H351	sol di rif/standard	Determinazione di inquinanti semivolatili, antiparassitari ed IPA in GC/MS - EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli,Acqua
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 525 - 100 ug/mL (fenantrene)	85-01-8	H351	sol di rif/standard	Determinazione di inquinanti semivolatili, antiparassitari ed IPA in GC/MS - EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli,Acqua
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 525 - 100 ug/mL (pirene)	129-00-0	H351	sol di rif/standard	Determinazione di inquinanti semivolatili, antiparassitari ed IPA in GC/MS - EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli,Acqua
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 525 (diclorometano, solvente)	75-09-2	H351	sol di rif/standard	Determinazione di inquinanti semivolatili, antiparassitari ed IPA in GC/MS - EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli,Acqua
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 64 2000ug/mL in Benzene Diclorometano 1:1 (benzo(a)pirene)	71-43-2	H350	sol di rif/standard	DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC) - Metodo interno (U.RP.M716)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 64 2000ug/mL in Benzene Diclorometano 1:1 (acenaftilene)	208-96-8	H350	sol di rif/standard	DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC) - Metodo interno (U.RP.M716)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 64 2000ug/mL in Benzene Diclorometano 1:1 (antracene)	120-12-7	H350	sol di rif/standard	DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC) - Metodo interno (U.RP.M716)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 64 2000ug/mL in Benzene Diclorometano 1:1 (benzo(b)fluorantene)	205-99-2	H350	sol di rif/standard	DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC) - Metodo interno (U.RP.M716)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 64 2000ug/mL in Benzene Diclorometano 1:1 (benzo(k)fluorantene)	207-08-9	H350	sol di rif/standard	DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC) - Metodo interno (U.RP.M716)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 64 2000ug/mL in Benzene Diclorometano 1:1 (benzo(ghi)perilene)	191-24-2	H351	sol di rif/standard	DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC) - Metodo interno (U.RP.M716)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 64 2000ug/mL in Benzene Diclorometano 1:1 (benzo(a)pirene)	50-32-8	H350	sol di rif/standard	DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC) - Metodo interno (U.RP.M716)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 64 2000ug/mL in Benzene Diclorometano 1:1 (benzo(e)pirene)	192-97-2	H350	sol di rif/standard	DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC) - Metodo interno (U.RP.M716)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri

Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 64 2000ug/mL in Benzene Diclorometano 1:1 (crisene)	218-01-9	H350	sol di rif/standard	DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC) - Metodo interno (U.RP.M716)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 64 2000ug/mL in Benzene Diclorometano 1:1 (fluorene)	86-73-7	H350	sol di rif/standard	DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC) - Metodo interno (U.RP.M716)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 64 2000ug/mL in Benzene Diclorometano 1:1 (indeno(1,2,3-cd)pirene)	193-39-5	H351	sol di rif/standard	DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC) - Metodo interno (U.RP.M716)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 64 2000ug/mL in Benzene Diclorometano 1:1 (fenantrene)	85-01-8	H350	sol di rif/standard	DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC) - Metodo interno (U.RP.M716)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 64 2000ug/mL in Benzene Diclorometano 1:1 (pirene)	129-00-0	H350	sol di rif/standard	DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC) - Metodo interno (U.RP.M716)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 64 (diclorometano, solvente)	75-09-2	H351	sol di rif/standard	DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC) - Metodo interno (U.RP.M716)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	PAH Mix 64 (benzene, solvente)	71-43-2	H350	sol di rif/standard	DETERMINAZIONE DI IPA SU FIALE E FILTRI (HPLC) - Metodo interno (U.RP.M716)	HPLC	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	benzo(a)pirene (CUS-4067) 500 µg/mL in toluene	50-32-8	H350	sol di rif/standard	Ricerca IPA sui Filtri dell'aria Metodo interno (U.RP.M716)	GC-MS	aeriformi su fiale e filtri
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	formaldeide	50-00-0	H350	reagente	Manuale Ispra 111/2014 met. 2020		acque reflue
ARPA PIEMONTE	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	formaldeide (37% - in H2O stabilizzata con Metanolo)	50-00-0	H350	sol di rif/standard	formaldeide da utensili da cucina in melamina (JRC-IHCP EU RL-FCM Migration of formaldehyde annex 2 vers 1 2011) formaldeide in prodotti cosmetici (Journal of Food and Drug Analysis vol. 11, n. 1, 2003, pages. 8-15)	HPLC - Spettrofotometria UV/Vis	materiali a contatto con alimenti cosmetici
ARPA PIEMONTE	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	formaldeide (37% - in H2O stabilizzata con Metanolo)	50-00-0	H350	sol di rif/standard	Metodo interno "Determinazione dell'aldeide formica in oli minerali" - Bibliografia: "HPLC determination of formaldehyde in frozen crustaceans", Ital. J. Food Sci., 3(1), 59-62 (1991); "Determination of formaldehyde in squid by high-performance liquid chromatography", Clin. Nutr. 2007; 16(Suppl1):127-130;	HPLC	oli industriali
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT CNR-IRSA 5050 man 29/2003	Spettrometria UV-VIS	altro
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT CNR-IRSA 5050 man 29/2003	Spettrometria UV-VIS	acque reflue
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	kit Lange LCK 314-414-514, (dicromato di potassio)	7778-50-9	H350	reagente	ISO 15705:2002	Spettrometria UV-VIS	acque reflue
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	kit Lange LCK 331 (cloroformio)	67-66-3	H351	reagente	Metodo Interno U.RP.M605	Spettrometria UV-VIS	acque reflue
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	kit Lange LCK 332 (cloroformio)	67-66-3	H351	reagente	Metodo Interno U.RP.M606	Spettrometria UV-VIS	acque reflue
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	kit Lange LCK 333 (diclorometano)	75-09-2	H351	reagente	Metodo Interno U.RP.M607	Spettrometria UV-VIS	acque reflue
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	cloramfenicolo	56-75-7	H350	reagente	DETERMINAZIONE E CONTEGGIO DI FUNGHI E LIEVITI - RAPPORTI ISTISAN 13/15 - METODO ISS Co 003A REV00	Spatolamento	Cosmetici
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	Determinazione di inquinanti semivolatili, antiparassitari ed IPA in GC/MS -EPA 8270D:2007 (U.RP.280)	GC-MS	Rifiuti, Suoli,Acqua
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	Determinazione del contenuto di idrocarburi nel range C10-C40 in Gascromatografia - UNI EN 14039: 2005	GC	Rifiuti,
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	Determinazione della Domanda Chimica di Ossigeno (C.O.D) - ISO 6060:1989	Titrimetria	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	Determinazione della Domanda Chimica di Ossigeno (C.O.D) - ISO 6060:1989	Titrimetria	acque naturali
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	DETERMINAZIONE DELLA DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) APHA STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 22 nd ed. 2012,5220 AB	Titrimetria	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	DETERMINAZIONE DELLA DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) APHA STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 22 nd ed. 2012,5220 AB	Titrimetria	acque naturali

Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	Determinazione della domanda Chimica di Ossigeno (COD) con test in cuvetta - ISO 15705:2002	Spettrofotometria UV/Vis	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	Determinazione della domanda Chimica di Ossigeno (COD) con test in cuvetta - ISO 15705:2002	Spettrofotometria UV/Vis	acque naturali
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	tetracloroetilene	127-18-4	H351	reagente	Metodo interno APAT CNR-IRSA METODO 5160 B MAN 29/2003	FT IR	altro
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	tetracloroetilene	127-18-4	H351	solvente	Determinazione di sostanze oleose e idrocarburi totali in campioni acquosi - Estrazione con solvente e determinazione IR (APAT CNR-IRSA Metodo 5160 B Man 29/2003)	IR	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	tetracloroetilene	127-18-4	H351	solvente	Determinazione di sostanze oleose e idrocarburi totali in campioni acquosi - Estrazione con solvente e determinazione IR (APAT CNR-IRSA Metodo 5160 B Man 29/2003)	IR	acque naturali
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	1,2 Dicloroetano	107-06-2	H350	reagente	Metodo Interno U.RP.N110 rif: APAT CNR-IRSA Metodo 5180 Man 29/2003		acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	1,2 Dicloroetano	107-06-2	H350	reagente	Metodo Interno U.RP.N110 rif: APAT CNR-IRSA Metodo 5180 Man 29/2003		acque naturali
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	fucsina basica soluzione	632-99-5	H350	reagente	Metodo interno U.RP.T086 "Monitoraggio pollinico" rif:UNI 11108:2004		Aria
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	idrossilammina cloridrato	5470-11-1	H351	reagente	Determinazione Mercurio in rif:ET.06.012, ET.06.016, ET.06.018, Et.06.019	fluorescenza atomica	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	idrossilammina cloridrato	5470-11-1	H351	reagente	Determinazione Mercurio in rif:ET.06.012, ET.06.016, ET.06.018, Et.06.019	fluorescenza atomica	acque naturali
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	idrossilammina cloridrato	5470-11-1	H351	reagente	Determinazione Mercurio in rif:ET.06.012, ET.06.016, ET.06.018, Et.06.019	fluorescenza atomica	acque reflue
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	bromato di potassio	7758-01-2	H350	reagente	Determinazione Mercurio in rif:ET.06.012, ET.06.016, ET.06.018, Et.06.019	fluorescenza atomica	acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	bromato di potassio	7758-01-2	H350	reagente	Determinazione Mercurio in rif:ET.06.012, ET.06.016, ET.06.018, Et.06.019	fluorescenza atomica	acque naturali
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	bromato di potassio	7758-01-2	H350	reagente	Determinazione Mercurio in rif:ET.06.012, ET.06.016, ET.06.018, Et.06.019	fluorescenza atomica	acque reflue
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	cloruro di cobalto esaidrato	7791-13-1	H350	reagente	Indicatore umidità per il gel di silice utilizzato negli essiccatore		acque potabili
Arpa Piemonte	Marcello Morello- Torino - tel 011/19680383	miscela cromica (dicromato di potassio)	7778-50-9	H350	reagente	Lavaggio vetreria Radiochimica		
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	Soluzione 2000 mg/l - benzene	71-43-2	H350	sol di rif/standard	APAT IRSA 5140	spazio di testa GC MS	acque naturali
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	Soluzione 2000 mg/l - benzene	71-43-2	H350	sol di rif/standard	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.004.rev00	spazio di testa GC MS	acque potabili
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	Miscela di Idrocarburi Policiclici Aromatici - 200 mg/l in Toluene (benzo(a)pirene)	50-32-8	H350	sol di rif/standard	UNI EN 15549	HPLC- FLUORIMETRO	aria emissioni
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	Miscela di Idrocarburi Policiclici Aromatici - 200 mg/l in Toluene (dibenzo(a,h)antracene)	53-70-3	H350	sol di rif/standard	UNI EN 15549	HPLC- FLUORIMETRO	aria emissioni
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAB.039.rev00 (IPA)	GC-MS	acque potabili
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	MI N° 067/COAC(ricerca pesticidi Benzimidazolici)	GC-MS	alimenti
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	terra di diatomee (hydromatrix miscela: cristobalite + kieselguhr+ quarzo, cristobalite)	14464-46-1	H350	reagente			
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	terra di diatomee (hydromatrix miscela: cristobalite + kieselguhr+ quarzo, quarzo)	14808-60-7	H350	reagente	Estrazioni con ASE		altro
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	TOC (ANPA 3/2001)	titolazione	altro
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	dicromato di potassio	7778-50-9	H350	reagente	ACIDI UMICI FULVICI ANPA 3/2001	titolazione	altro
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	Soluzione 2000 mg/l - tricloroetilene	79-01-06	H350	sol di rif/standard	APAT IRSA 5150	spazio di testa GC MS	acque potabili
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	set diesel oil e mineral oil (DIESEL OIL)	68476-34-6	H350	sol di rif/standard	ISO 9377-2:2002	GC-FID	acque naturali
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	set diesel oil e mineral oil (DIESEL OIL)	68476-34-6	H350	sol di rif/standard	ISO 16703:2004	GC-FID	suolo
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	berillio Soluzione(nitrato) 1000 ppm	13597-99-4	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003,	ICP	acque naturali
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	cobalto Soluzione(nitrato) 1000 ppm	10141-05-6	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003,UNI EN 14902:2005	icp	acque naturali
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	cromo VI Soluzione 1000 ppm	7440-47-3	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	UV VIS	acque naturali
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	nichel Soluzione(nitrato) 1000 ppm	13138-45-9	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003, UNI EN 14902:2005	ICP	acque naturali

VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	cromato di potassio (soluzione 1000 PPM)	7789-00-6	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	ICP	acque naturali
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	STANDARD ICP MULTIELEMENTO SOLUZIONE XVI (21 elementi in acido nitrico diluito) 100 mg/l – Cadmio (nitrato)	10325-94-7	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003,	ICP	acque naturali
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	STANDARD ICP MULTIELEMENTO SOLUZIONE XVI (21 elementi in acido nitrico diluito) 100 mg/l – Cobalto (nitrato)	10141-05-6	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003,	ICP	acque naturali
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	ICP SOLUZIONE STANDARD DI ELEMENTI VARI IV (23 elementi in acido nitrico diluito) 1000 PPM – Nichel (nitrato)	13138-45-9	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003,	ICP	acque naturali
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	ICP SOLUZIONE STANDARD DI ELEMENTI VARI IV (23 elementi in acido nitrico diluito) 1000 PPM – Cobalto (nitrato)	10141-05-6	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003,	ICP	acque naturali
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	ICP SOLUZIONE STANDARD DI ELEMENTI VARI VI - 100 mg/l Cadmio (nitrato)	10325-94-7	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003,	ICP	acque naturali
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	ICP SOLUZIONE STANDARD DI ELEMENTI VARI VI - 100 mg/l Berillio (nitrato)	13597-99-4	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003,	ICP	acque naturali
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	ICP SOLUZIONE STANDARD DI ELEMENTI VARI VI - 100 mg/l Cobalto (nitrato)	10141-05-6	H350	sol di rif/standard	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003,	ICP	acque naturali
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	ICP SOLUZIONE STANDARD DI ELEMENTI VARI VI - 100 mg/l Cadmio (nitrato)	10325-94-7	H350	sol di rif/standard	UNI EN 14902:2005	ICP	aria emissioni
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	ICP SOLUZIONE STANDARD DI ELEMENTI VARI VI - 100 mg/l (Berillio, nitrato)	13597-99-4	H350	sol di rif/standard	UNI EN 14902:2005	ICP	aria emissioni
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	ICP SOLUZIONE STANDARD DI ELEMENTI VARI VI - 100 mg/l Cobalto (nitrato)	10141-05-6	H350	sol di rif/standard	UNI EN 14902:2005	ICP	aria emissioni
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	cloramfenicolo	56-75-7	H350	reagente	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833:2004	conta su piastra	altro
VALLE D'AOSTA	CRISTINA GIBELLINO 0165 278542	cloramfenicolo	56-75-7	H350	reagente	ISO 18593:2004 + Rapporti ISTISAN 07/5 Met ISS A 016B rev.00	conta su piastra	altro
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 525.2	SPE/GC MS	acque potabili
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	diclorometano	75-09-2	H351	solvente	EPA 8280	GC-MS- MS	rifiuti
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	1,2-dicloroetano	107-06-2	H350	solvente	UNI 10511-1	Volumetrica	acque reflue
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	cloroformio	67-66-3	H351	solvente	APAT IRSA CNR 5170	Colorimetrica	acque reflue
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	Custom PAH Solution 22-1 - 200 mg/L (benzo(a)pirene)	50-32-8	H350	sol di rif/standard	EPA 8270	GC-MS	acque naturali
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	Custom PAH Solution 22-1 - 200 mg/L (dibenzo(a,h)antracene)	53-70-3	H350	sol di rif/standard	EPA 8270	GC-MS	acque naturali
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	Custom PAH Solution 22-1 - (diclorometano, solvente)	75-09-2	H351	sol di rif/standard	EPA 8270	GC-MS	acque naturali
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	Method 8260 VOC 54 Compounds - 2000 mg/L (1,1,2-tricloroetano)	79-00-5	H420	sol di rif/standard	EPA 8260	PT & GC-MS	acque naturali
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	Method 8260 VOC 54 Compounds - 2000 mg/L - 2000 mg/L (1,1-dicloroetano)	75-34-3	H420	sol di rif/standard	EPA 8260	PT & GC-MS	acque naturali
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	Method 8260 VOC 54 Compounds - 2000 mg/L (1,2-dibromoetano)	106-93-4	H420	sol di rif/standard	EPA 8260	PT & GC-MS	acque naturali
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	Method 8260 VOC 54 Compounds - 2000 mg/L (benzene)	71-43-2	H350	sol di rif/standard	EPA 8260	PT & GC-MS	acque naturali
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	Method 8260 VOC 54 Compounds - 2000 mg/L (tetraclorometano)	56-23-5	H420	sol di rif/standard	EPA 8260	PT & GC-MS	acque naturali
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	Method 8260 VOC 54 Compounds - 2000 mg/L (tricloroetilene)	79-01-6	H350	sol di rif/standard	EPA 8260	PT & GC-MS	acque naturali
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	Method 8260 VOC 54 Compounds - 2000 mg/L (1,1,1-tricloroetano)	71-55-6	H420	sol di rif/standard	EPA 8260	PT & GC-MS	acque naturali
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	Method 8260 VOC 54 Compounds - 2000 mg/L (1,2,3-tricloropropano)	96-18-4	H350	sol di rif/standard	EPA 8260	PT & GC-MS	acque naturali
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	Method 8260 VOC 54 Compounds - 2000 mg/L (1,2-dibromo-3-cloropropano)	96-12-8	H350	sol di rif/standard	EPA 8260	PT & GC-MS	acque naturali
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	Method 8260 VOC 54 Compounds - 2000 mg/L (1,2-dicloroetano)	107-06-2	H350	sol di rif/standard	EPA 8260	PT & GC-MS	acque naturali
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	Method 8260 VOC 54 Compounds - 2000 mg/L (bromoclorometano)	74-97-5	H420	sol di rif/standard	EPA 8260	PT & GC-MS	acque naturali
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	Method 8260 VOC 54 Compounds - 2000 mg/L (diclorodifluorometano - 2000 mg/L)	75-71-8	H420	sol di rif/standard	EPA 8260	PT & GC-MS	acque naturali
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	Method 8260 VOC 54 Compounds - 2000 mg/L (tricoloroluoformetan)	75-69-4	H420	sol di rif/standard	EPA 8260	PT & GC-MS	acque naturali
ARPAM Dip. Ancona	Bruciati Marco 071/28732745	Method 8260 VOC 54 Compounds - 2000 mg/L (cloroetene)	75-01-4	H350	sol di rif/standard	EPA 8260	PT & GC-MS	acque naturali

matrice altro (descrizione)	Sostanza alternativa	n. CAS sostanza alternativa	Descrizione sostanza alternativa	NOTE	Parametro
acque naturali	NO				1,2-dibromoetano
acque naturali	NO				1,1,1-tricloroetano
acque naturali	NO				tricloroetilene
acque naturali	NO				benzene
acque naturali	NO				cloruro di vinile
condottate in atmosfera	NO				mercurio
sotterranee/superficiali	NO		Materiale di Riferimento <100 ppm	IPA Fornitore: o2si	dibenzo (a,h) antracene
sotterranee/superficiali	NO		Materiale di Riferimento <100 ppm	IPA Fornitore: o2si	benzo (a) pirene
sotterranee/superficiali	NO		Materiale di Riferimento <1000 ppm	IPA Fornitore: o2si	Benzene
	NO			Metodo alternativo APHA 3125 in ICP-MS	Mercurio
	NO			Metodo alternativo APHA 3125 in ICP-MS	Mercurio
	NO				
	NO				
	NO				4-cloroanilina
	NO				4-cloroanilina
	NO				4-cloroanilina
	NO			solido	pentaclorofenolo
	NO				esaclorobenzene
	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	
	NO				
	NO			4-(Benzoylamino)-2,5-diethoxybenzenediazonium tetrachlorozincate	solido 90%
acque naturali	NO			utilizzato per taratura spettrofotometri	COD
	NO			utilizzato alla concentrazione massima di 1 g/L	accettabilità di un effluente
acque naturali	NO			reazione in cuvetta con reagenti predosati, test in cuvetta a seconda %p/p (≥0.1 %) il preparato sarà H350	COD
	NO				
	NO				alchilfenoli
acque, suolo	NO				composti semivolatili (IPA PCB ammine pesticidi)
acque, suolo	NO				diossine
acque, suolo	NO				PCDDFs e PCBdl in emissioni da sorgente fissa
acque naturali	NO				tensioattivi anionici
fall out atmosferico	NO			I carrier di radionuclidi stabili servono a mantenere in soluzione (veicolare) i radionuclidi oggetto della misura eventualmente presenti nel campione	radionuclidi
matrici ambientali e alimenti	NO			Precipitando il Ba come Cromato, si elimina un interferente presente in abbondanza in diverse matrici ambientali	radionuclidi

	NO		Materiale di Riferimento	IPA Fornitore: o2si	IPA
	NO		Materiale di Riferimento	IPA Fornitore: o2si	IPA
	NO		Materiale di Riferimento	IPA Fornitore: o2si	IPA
	NO		Materiale di Riferimento	IPA Fornitore: o2si	IPA
	NO		Materiale di Riferimento	IPA Fornitore: o2si	IPA
	NO		Materiale di Riferimento	IPA Fornitore: o2si	IPA
	NO		Materiale di Riferimento	IPA Fornitore: o2si. Il diclorometano è il solvente della miscela insieme al benzene	IPA
	NO		Materiale di Riferimento	IPA Fornitore: o2si. Il benzene è il solvente della miscela insieme al diclorometano	IPA
	NO		Materiale di Riferimento	CVM Fornitore: Ultrascientific	Benzene, composti volatili
	NO		Materiale di Riferimento	AROMATICI E CLORURATI Fornitore: Ultrascientific	Benzene, composti volatili
	NO		Materiale di Riferimento	AROMATICI E CLORURATI Fornitore: Ultrascientific	Benzene, composti volatili
	NO		Materiale di Riferimento	AROMATICI E CLORURATI Fornitore: Ultrascientific	Benzene, composti volatili
	NO		Materiale di Riferimento	AROMATICI E CLORURATI Fornitore: Ultrascientific	Benzene, composti volatili
	NO		Materiale di Riferimento	AROMATICI E CLORURATI Fornitore: Ultrascientific	Benzene, composti volatili
	NO		Materiale di Riferimento	AROMATICI E CLORURATI Fornitore: Ultrascientific	Benzene, composti volatili
	NO		Materiale di Riferimento	AROMATICI E CLORURATI Fornitore: Ultrascientific	Benzene, composti volatili
	NO		Materiale di Riferimento	AROMATICI E CLORURATI Fornitore: Ultrascientific	Benzene, composti volatili
	NO		Materiale di Riferimento	AROMATICI E CLORURATI Fornitore: Ultrascientific	Benzene, composti volatili
	NO		Materiale di Riferimento	AROMATICI E CLORURATI Fornitore: Ultrascientific	Benzene, composti volatili
	NO		Materiale di Riferimento	AROMATICI E CLORURATI Fornitore: Ultrascientific	Benzene, composti volatili
	NO		Materiale di Riferimento	ARSENICO Fornitore: WWR	elementi
	NO		Metodo Ufficiale	COD Fornitore: HACH	COD
	NO		Metodo Ufficiale	TENSIOATTIVI ANIONICI Fornitore: Lange	Tensioattivi anionici
	NO		Metodo Ufficiale	TENSIOATTIVI NON IONICI Fornitore: Lange	Tensioattivi anionici
	NO		Metodo Ufficiale	CROMO ESAVALENTE	determinazione del Cr(VI)
	NO		Metodo Ufficiale	TENSIOATTIVI ANIONICI	tensioattivi anionici
	NO		Prodotto Commerciale	TENSIOATTIVI CATIONICI Fornitore: Lange	Tensioattivi cationici
	NO		Metodo Ufficiale	Conservante per l'analisi dei Tensioattivi Anionici	Tensioattivi Anionici
	NO		Materiale di Riferimento	C > 12 Fornitore: o2si	c10-c40 suolo
	NO		Materiale di Riferimento	C < 10 Fornitore: o2si	idrocarburi totali nelle acque
Ortofrutticoli e acque	NO				alachlor
Ortofrutticoli e acque	NO				aldrin
Ortofrutticoli e acque	NO				captano
Ortofrutticoli e acque	NO				carbaryl
Ortofrutticoli e acque	NO				chlorothalonil
Ortofrutticoli e acque	NO				chlortoluron
Ortofrutticoli e acque	NO				chlorpropham
Ortofrutticoli e acque	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	2,4'-DDD
Ortofrutticoli e acque	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	4,4'-DDD

Ortofrutticoli e acque	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	2,4'-DDE
Ortofrutticoli e acque	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	4,4'-DDE
Ortofrutticoli e acque	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	2,4'-DDT
Ortofrutticoli e acque	NO				4,4'-DDT
Ortofrutticoli e acque	NO				diuron
Ortofrutticoli e acque	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	α -HCH
Ortofrutticoli e acque	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	β -HCH
Ortofrutticoli e acque	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	δ -HCH
Ortofrutticoli e acque	NO				epoxiconazole
Ortofrutticoli e acque	NO				eptacloro
Ortofrutticoli e acque	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	eptacloro epossido isom. A
Ortofrutticoli e acque	NO				eptacloro epossido isom. B
Ortofrutticoli e acque	NO				esaclorobenzene
Ortofrutticoli e acque	NO			classificazione da ECHA, la sostanza non è inclusa nel CLP	esaclorobenzene (13C6)
Ortofrutticoli e acque	NO				fentin acetate
Ortofrutticoli e acque	NO				flusilazole
Ortofrutticoli e acque	NO				folpet
Ortofrutticoli e acque	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	γ - chlordane
Ortofrutticoli e acque	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	esacloroetano
Ortofrutticoli e acque	NO				iprodione
Ortofrutticoli e acque	NO				isoproturon
Ortofrutticoli e acque	NO				kresoxim-methyl
Ortofrutticoli e acque	NO				linuron
Ortofrutticoli e acque	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	mepanipyrim
Ortofrutticoli e acque	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	metossicloro
Ortofrutticoli e acque	NO				mirex
Ortofrutticoli e acque	NO				molinate
Ortofrutticoli e acque	NO				nitrofen
Ortofrutticoli e acque	NO				N-Nitrosodimetilammina
Ortofrutticoli e acque	NO				procimidone
Ortofrutticoli e acque	NO				propargite
Ortofrutticoli e acque	NO				propazine
Ortofrutticoli e acque	NO				propyzamite
Ortofrutticoli e acque	NO				pymetrozine
Ortofrutticoli e acque	NO				simazine
Ortofrutticoli e acque	NO				trifluralin
Ortofrutticoli e acque	NO				vinclozolin
	NO				

Acque dolci e salate	NO	/	TPBS n°1 e n°2; Sali di potassio di 2,4,5-T; 3,5-diclorofenolo; Sostanze non in uso in quanto non richieste dai circuiti	/	UNI EN ISO 6341:2013 - Qualità dell'acqua - Determinazione dell'inibizione della mobilità di Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Prova di tossicità acuta; UNI EN ISO 8692:2012 - Qualità dell'acqua - Prova di inibizione della crescita di alghe d'acqua dolce per mezzo di alghe verdi; UNI EN ISO 10253:2006 Water Quality - Marine Algal Growth Inhibition Test With Skeletonema Costatum And Phaedactylum Tricornutum
Acque dolci e salate	SI	151-21-3	Sodio laurilsolfato	Cloruro di cadmio: attualmente non in uso	
Acque dolci e salate	NO	/	La sperimentazione di sostanze alternative ha dato esito negativo	Sostanza attualmente non in uso	Test tossicità su embrioni di molluschi marini
					composti organici volatili
					composti organici volatili
	NO				composti organici volatili
	NO				composti organici volatili
acque naturali	NO				composti organici volatili
acque naturali	NO				composti organici volatili
acque naturali	NO				composti organici volatili
acque naturali	NO				pesticidi (composti semivolatili)
determ. Degli IPA in tutte le matrici acquose	NO				IPA
estrazione tensioattivi in tutte le matrici acquose ad elevata salinità	NO				tensioattivi
	NO				alcalinità
determinazione del COD su tutte le matrici acquose	NO			test in cuvetta a seconda %p/p (≥0.1 %) il preparato sarà H350	COD
REACH: cemento	NO				Cromo (IV) idrosolubile
determ. Carbonio organico in suoli/rifiuti	NO				Carbonio Organico
Det. Cloro in tutte le matrici acquose	NO				Cloro
Tutte	NO				PCDDFs e PCBdl, PBDE
Tutte	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	PCDDFs e PCBdl, PBDE
suolo, sedimenti	NO				composti semivolatili
	NO				Carbonio Organico
olio	NO				numero di perossidi
olio	NO				acidità
olio	NO				numero di perossidi
aria biomonitoraggio pollini aerodispersi	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	
aria biomonitoraggio pollini aerodispersi	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	pollini
aria biomonitoraggio pollini aerodispersi	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	pollini
tessuti animali	NO		Il BaP viene utilizzato come rappresentante degli IPA; le esposizioni al tale tossico vengono effettuate anche per poter confrontare i risultati ottenuti con quelli presenti in letteratura.		test di tossicità
tessuti animali	NO		Il BaP viene utilizzato come rappresentante degli IPA; le esposizioni al tale tossico vengono effettuate anche per poter confrontare i risultati ottenuti con quelli presenti in letteratura.		test di tossicità
Organismi animali	NO		Nessuna sostanza alternativa garantisce la stessa fissazione		riconoscimento ed identificazione organismi animali
acque marine					Macrobenthos
					torbidità
estratti proteici da organismi marini (microalghe, policheti, pesci ecc)	NO			Sono in prova dei gel precast che riducono molto il rischio di esposizione per gli operatori eliminando la fase preparativa dei gel	Saggio di inibizione della crescita di alghe marine
elutriati da sedimenti	NO			L'altra sostanza tossica di riferimento segnalata dal metodo è il 3-5 diclorofenolo che ha un'alta tossicità acuta (H302, H312, H315, H319, H332)	Saggio di inibizione della crescita di alghe marine
elutriati da sedimenti	NO			L'altra sostanza tossica di riferimento segnalata dal metodo è il 3-5 diclorofenolo che ha un'alta tossicità acuta (H302, H312, H315, H319, H332)	Saggio di inibizione della crescita di alghe marine

elutriati da sedimenti	NO			La sostanza è un oligoelemento necessario per la preparazione del mezzo nutritivo algale, la polvere viene utilizzata saltuariamente in quantità minima per la preparazione di soluzioni stock	Saggio di inibizione della crescita di alghe marine
	NO				composti organici semivolatili (PCDDF;PCBdl, PCB ndl; IPA)
	NO				IPA
	NO			usato per la preparazione di un Materiale di riferimento in metanolo per l'interconfronto: " Testing comparability of existing and innovative bioassays for water quality assessment: the 2012 Europe-wide exercise"	β-estradiolo
	NO			usato per la preparazione di un Materiale di riferimento in metanolo per l'interconfronto: " Testing comparability of existing and innovative bioassays for water quality assessment: the 2012 Europe-wide exercise"	benzo(a)pirene
	NO			usato per la preparazione di un Materiale di riferimento in metanolo per l'interconfronto: " Testing comparability of existing and innovative bioassays for water quality assessment: the 2012 Europe-wide exercise"	diuron
	NO			usato per la preparazione di un Materiale di riferimento in metanolo per l'interconfronto: " Testing comparability of existing and innovative bioassays for water quality assessment: the 2012 Europe-wide exercise"	benzo(a)pirene d12
aria biomonitoraggio pollini aerodispersi	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	pollini
Pollini	SI	60-29-7	Dietiletere		pollini
aria biomonitoraggio pollini aerodispersi	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	pollini
aria biomonitoraggio pollini aerodispersi	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	pollini
Pollini	SI	60-29-7	Dietiletere		pollini
aria biomonitoraggio pollini aerodispersi	NO			classificazione da sds, la sostanza non è inclusa nel CLP	pollini
Pollini	SI	60-29-7	Dietiletere	Ordinato Dietiletere in febbraio 2016	pollini
sotterranee	NO			a seconda %p/p (≥0,1 %) il preparato sarà H420	1,1-dicloro-1-fluoroetano
sotterranee	NO			a seconda %p/p (≥0,1 %) il preparato sarà H420	triclorofluorometano
sotterranee	NO			a seconda %p/p (≥0,1 %) il preparato sarà H420	1,1,1-tricloroetano
sotterranee/superficiali					
sotterranee	NO			a seconda %p/p (≥ 1 %) il preparato sarà H351	
sotterranee/superficiali	NO			a seconda %p/p (≥ 1 %) il preparato sarà H351	4,4'-DDT
sotterranee/superficiali	NO			a seconda %p/p (≥ 1 %) il preparato sarà H351	dieldrin
sotterranee/superficiali	NO			a seconda %p/p (≥ 1 %) il preparato sarà H351	2,4'-DDE
sotterranee/superficiali	NO			a seconda %p/p (≥ 1 %) il preparato sarà H351	2,4'-DDT
sotterranee/superficiali	NO				aldrin
sotterranee	NO				benzene
sotterranee/superficiali	NO				molinate
sotterranee/superficiali	NO				trifluralin
sotterranee/superficiali	NO				eptacloro
sotterranee/superficiali	NO				eptacloro epossido (Isomero A)
sotterranee/superficiali	NO				idrocarburi
superficiali	NO				Tensioattivi non ionici
superficiali	NO				Aldeidi
superficiali	NO				Tensioattivi MBAS
	NO				1,1,1-tricloroetano

	NO				1,1,1-tricloroetano
Soil Gas- Qualità Aria	NO				1,1,1-tricloroetano
Soil Gas- Qualità Aria	NO				1,1,1-tricloroetano
Soil Gas- Qualità Aria	NO			usato come ISTD	bromoclorometano
Soil Gas- Qualità Aria	NO			usato come ISTD	bromoclorometano
	NO			CAS 7697-37-2corrisponde a HNO3 ATTENZIONE: è impossibile che As in soluzione acquosa con HNO3 sia metallico – è As2O3 o H2AsO4 .	arsenico NO H350
	NO			CAS 67-56-1 corrisponde a metanolo	Benzene
	NO				cromo VI
	NO				diclorometano
	NO			100 ppm	semivolatili (IPA)
	NO			100 ppm	semivolatili (IPA)
	NO			Solvente	semivolatili (IPA)
	NO				cromato di potassio
acque naturali-potabili-reflue-minerali-suoli-rifiuti-sedimenti	NO				pesticidi
acque naturali-potabili-reflue-minerali-suoli-rifiuti-sedimenti	NO				dicromato di potassio SOLUZIONE (0,1 N)
	NO				epicloridrina
	NO				Macrofite
	NO				Formaldeide
suolo-sedimenti-rifiuti	NO			CAS 7697-37-2corrisponde a HNO3 ATTENZIONE: è impossibile che As in soluzione acquosa con HNO3 sia metallico – è As2O3 o H2AsO4 .	arsenico NO H350
acque naturali-potabili-minerali-reflue	NO			CAS 7697-37-2corrisponde a HNO3 ATTENZIONE: è impossibile che As in soluzione acquosa con HNO3 sia metallico – è As2O3 o H2AsO4 .	arsenico NO H350
acque naturali-potabili-reflue-minerali-suoli-rifiuti-sedimenti	NO				Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni
	NO				semivolatili (IPA)
	NO				semivolatili (IPA)
	NO				semivolatili (IPA)
	NO				semivolatili (IPA)
suolo, acque naturali	NO				idrocarburi
acque naturali	NO				tensioattivi anionici
acque naturali	NO				bicromato di potassio
rifiuti - suoli - sedimenti	NO			Il prodotto cas 75-09-2 risulta essere il diclorometano, mentre il cas dell'etere di petrolio risulta 8032-32-4 le cui schede di sicurezza per le varie frazioni di distillazione non riportano l'indicazione di pericolo H350 o H351	idrocarburi
	NO			solvente di estrazione per vari contaminanti e in diverse matrici	contaminanti organici
	NO			solvente di estrazione per vari contaminanti e in diverse matrici	contaminanti organici
	NO			solvente di estrazione liquido/liquido	IPA e PCB
filtri particolato	NO			in miscela con esano usato come solvente di estrazione (ASE) e di eluizione	IPA

acque sotterranee	NO			Il prodotto cas 127-18-4 risulta essere il tetracloroetilene, mentre il cas dell'etere di petrolio risulta 8032-32-4 le cui schede di sicurezza per le varie frazioni di distillazione non riportano l'indicazione di pericolo H350 o H351	idrocarburi
acque naturali	NO				dicromato di potassio
acque sotterranee	NO				alcalinità
acque naturali	NO				tensioattivi anionici
	NO				colore
	NO				dicromato di potassio
acque naturali	NO				dicromato di potassio
matrici ambientali su cui viene richiesto	NO				berillio
matrici ambientali su cui viene richiesto	NO			ATTENZIONE: è impossibile che As in soluzione acquosa acida sia metallico	arsenico
matrici ambientali su cui viene richiesto	NO				cadmio
suoli	NO				idrocarburi
tutte le matrici indicate (no alimenti)	NO			utilizzato per eluizione in miscele a diverse percentuali con altri solventi (esano) e come solvente per l'estrazione	diossine
tutte le matrici indicate (no alimenti e aria)	NO			utilizzato per eluizione in miscele a diverse percentuali con altri solventi (esano) e come solvente per l'estrazione	PCB
rifiuti - suoli - sedimenti	NO			utilizzato per riprendere l'estratto prima della iniezione in GC	idrocarburi
	NO			solvente della soluzione di riferimento (Diesel Range Organics)	diclorometano
	NO			solvente di estrazione per vari contaminanti e in diverse matrici	contaminanti organici
	NO			solvente di eluizione	IPA e PCB
filtri particolato	NO			in miscela con esano usato come solvente di estrazione (ASE) e di eluizione	IPA
matrici particolarmente sporche	NO			sostituita procedura di purificazione	diossine
acque sotterranee	NO			limitata applicazione. In genere sostituito da tetracloroetilene (se analisi in FT-IR) o altro metodo di estrazione e determinazione (se analisi in GC)	idrocarburi
acque sotterranee	NO				idrocarburi
acque naturali	NO				dicromato di potassio
acque sotterranee	NO				alcalinità
acque naturali	NO			Kit Merck EPA 425.1 - ridotti quantitativi cloroformio in uso	tensioattivi anionici
	NO				cobalto
	NO				dicromato di potassio
	NO				dicromato di potassio
matrici ambientali su cui viene richiesto	NO				
matrici ambientali su cui viene richiesto	NO				arsenico
matrici ambientali su cui viene richiesto	NO				cadmio
matrici ambientali su cui viene richiesto	NO				mercurio
matrici ambientali su cui viene richiesto	NO				standard pesticidi
matrici ambientali su cui viene richiesto	NO				standard pesticidi
matrici ambientali su cui viene richiesto	NO				standard pesticidi
matrici ambientali su cui viene richiesto	NO				standard pesticidi
aria	NO			soluzione10 e 100 ppm	Cd
rifiuti	NO			soluzione10 e 100 ppm	Cd
	NO			soluzione10 e 100 ppm	Cd
aria	NO			soluzione10 e 100 ppm	Cd
rifiuti	NO			soluzione10 e 100 ppm	Cd

acque naturali,potabili, reflue,rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi, aria emissioni ed imissioni, materiali, alimenti	NO				semivolatili (IPA)
acque naturali,potabili, reflue,rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi, aria emissioni ed imissioni, materiali, alimenti	NO				semivolatili (IPA)
acque naturali,potabili, reflue,rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi, aria emissioni ed imissioni, materiali, alimenti	NO				semivolatili (IPA)
acque naturali,potabili, reflue,rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi, aria emissioni ed imissioni, materiali, alimenti	NO				semivolatili (IPA)
acque naturali,potabili, reflue,rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi, aria emissioni ed imissioni, materiali, alimenti	NO				semivolatili (IPA)
acque naturali,potabili, reflue,rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi, aria emissioni ed imissioni, materiali, alimenti	NO				semivolatili (IPA)
acque naturali,potabili, reflue,rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi, aria emissioni ed imissioni, materiali, alimenti	NO				semivolatili (IPA)
acque naturali,potabili, reflue,rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi, aria emissioni ed imissioni, materiali, alimenti	NO				semivolatili (IPA)
acque naturali,potabili, reflue,rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi, aria emissioni ed imissioni, materiali, alimenti	NO				semivolatili (IPA)
acque naturali,potabili, reflue,rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi, aria emissioni ed imissioni, materiali, alimenti	NO				semivolatili (IPA)
acque naturali,potabili, reflue,rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi, aria emissioni ed imissioni, materiali, alimenti	SI	67-64-1, 110-54-3, 108-88-3	Acetone - esano - toluene	Sostanze alternative suggerite per estrazione in PFE. Non sono ancora state effettuate prove di recupero con questi solventi	contaminanti organici
rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi	NO				cianuri
	NO			a seconda %p/p (≥ 0,1 %) il preparato sarà H350	
	NO				Tensioattivi anionici e non ionici
acque,rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi	NO				Cromo VI
acque,rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi	NO				Cromo VI
acque/rifiuti liquidi	NO				cloruri
acque reflue,rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi	NO				Idrocarburi
acque/rifiuti liquidi	NO				Fenoli
acque/rifiuti liquidi	NO				Fosforo
sedimenti	NO				Lfe
acque reflue,rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi	NO			Contiene: 4-bromofluorobenzene; dibromofluorometano; 1,2-dicloroetano-d4; toluene-d8; metanolo	Volatili
acque reflue,rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi	NO				Volatili
acque reflue,rifiuti, suolo, sedimenti, fanghi	SI	7447-40-7 / 7446-20-0	Cloruro di potassio/zinco solfato eptaidrato		tossicità con Daphnia magna
macrobenthos	NO			UTILIZZATO PER LA CONSERVAZIONE DI CAMPIONI DI MACROBENTHOS	macrobenthos
controlli microbiologici qualità dell'aria	NO				
pollini aerodispersi	NO			utilizzato per facilitare l'adesione dei granuli pollinici al nastro di campionamento. Contiene cloroformio	
pollini aerodispersi	NO			utilizzato per facilitare l'adesione dei granuli pollinici al nastro di campionamento. Contiene cloroformio	
	NO		Metodo Ufficiale	test in cuvetta a seconda %p/p (≥0.1 %) il preparato sarà H350	COD

	NO		Metodo Ufficiale		Tensioattivi anionici
	NO		Metodo Ufficiale		Tensioattivi non ionici
	NO		Metodo Ufficiale		Tensioattivi anionici
	NO		Prodotto Commerciale		Tensioattivi cationici
	NO		Metodo Ufficiale	Conservante per l'analisi dei Tensioattivi Anionici	Tensioattivi Anionici
	NO				IPA
	NO				COD
acque, suoli	NO			a seconda %p/p (≥ 0,1 %) il preparato sarà H350	Volatili
acque, suoli	NO			a seconda %p/p (≥ 0,1 %) il preparato sarà H420	
	NO				
	NO				idrocarburi
acque	NO				semivolatili (IPA)
Alimenti vegetali	NO				
acque reflue	NO				Tensioattivi anionici
acque reflue	NO				Cromo VI
acque reflue	NO				COD
	NO				Tensioattivi non ionici
Suolo, sedimenti, rifiuti, acqua potabile	NO				Fitofarmaci
	NO				Tensioattivi anionici
Suolo, sedimenti, rifiuti, acqua potabile	NO				Metalli in matrice
Suolo, sedimenti, rifiuti, acqua potabile, aria	NO				semivolatili (IPA)
Suolo, sedimenti, rifiuti, acqua potabile, aria	NO				semivolatili (IPA)
	NO				Tensioattivi anionici
	NO				Tensioattivi anionici
	NO				Semivolatili(pesticidi)
	NO				Tensioattivi anionici
	NO			test in cuvetta a seconda %p/p (≥0.1 %) il preparato sarà H350	COD
PM10	NO			quantità utilizzata: 300mL*12volte all'anno	semivolatili(PCB e DIOX)
	NO			quantità utilizzata: tra 200 - 500mL* 1-2 volte all'anno	semivolatili(IPA)
	NO			quantità utilizzata: 10ml *2 volte all'anno	Aldeidi (aria)
prodotti alimentari di origine vegetale	no			a seconda %p/p (≥0,01 %) il preparato sarà H350	cadmio (metalli pesanti)
	NO				estrazione liquido/liquido per semivolatili (quali???)
Acque reflue	NO			Eliminare il parametro COD a favore della misura del TOC ambientalmente più compatibile, test in cuvetta a seconda %p/p test in cuvetta a seconda %p/p (≥0.1 %) il preparato sarà H350	COD
Acque reflue	NO			Eliminare il parametro COD a favore della misura del TOC ambientalmente più compatibile	COD
Acque reflue	NO				Tensioattivi anionici
Acque reflue	NO				Tensioattivi anionici
Acque reflue	NO				Tensioattivi non ionici
	NO				Sostanze estraibili in cloroformio
	NO				semivolatili
	NO				cloruro (titolazione)

Acque sotterranee	NO				Tensioattivi anionici
	NO			test in cuvetta a seconda %p/p (≥0.1 %) il preparato sarà H350	COD
	NO			i CAS riportati si riferiscono ai singoli principi attivi presenti: a seconda %p/p (≥1 %) il preparato sarà H351	semivolatili (PESTICIDI)
	NO				semivolatili (PESTICIDI)
	NO				semivolatili (PESTICIDI)
	NO				semivolatili (IPA)
	NO				semivolatili (IPA)
	NO				semivolatili (IPA)
	NO			a seconda %p/p (≥0.1 %) il preparato sarà H350	idrocarburi aromatici, clorurati....
	NO			a seconda %p/p (≥ 1 %) H351	volatili
	NO			a seconda %p/p (≥0,1 %) EUH 0549 (H420)	volatili
	NO			a seconda %p/p (≥0,1 %) EUH 0549 (H420)	volatili
	NO			a seconda %p/p (≥0,1 %) EUH 0549 (H420)	volatili
	NO			a seconda %p/p (≥ 1 %) H351	volatili
	NO			a seconda %p/p (≥ 1 %) H351	volatili
	NO			a seconda %p/p (≥0,1 %) EUH 0549 (H420)	volatili
Acque superficiali, terreni	NO				estrazione liquido/liquido per semi-volatili (quali???)
	NO				Oli e grassi; idrocarburi
	NO			test in cuvetta a seconda %p/p (≥0.1 %) il preparato sarà H350	COD
acque naturali,acque reflue	NO				semi-volatili
acque reflue, naturali	NO				
	NO	7681-11-0 7553-56-2	Ioduro di potassio Iodio	reagente di Lugol : sol ≥ 37%	
acque reflue, superficiali, sotterranee e suoli	NO			test in cuvetta a seconda %p/p (≥0.1 %) il preparato sarà H350	COD
acque reflue, naturali	NO				
Acque superficiali, terreni	NO				semi-volatili
	NO				oli e grassi ; idrocarburi
	NO			test in cuvetta a seconda %p/p (≥0.1 %) il preparato sarà H350	COD
Acque superficiali, terreni	NO				semi-volatili
acque reflue	NO				Tensioattivi non ionici
acque reflue	NO				Tensioattivi cationici
acque reflue, acque superficiali	NO				Tensioattivi anionici
acque reflue, superficiali, sotterranee e suoli	NO			test in cuvetta a seconda %p/p (≥0.1 %) il preparato sarà H350	COD
acque reflue, superficiali, sotterranee e suoli	NO				semi-volatili
acque reflue	NO				Tensioattivi non ionici
acque reflue	NO				Tensioattivi cationici
acque reflue, acque superficiali	NO				Tensioattivi anionici
Liquida(acque-elutriati)	NO				
Liquida(acque-elutriati)	NO				Ecotossicità

	NO			a seconda %p/p il preparato sarà H350	BTEX
	NO			OK	COD
	NO			a seconda %p/p il preparato sarà H350	AOX
	NO			a seconda %p/p il preparato sarà H350	AOX
	NO				n°PEROSSIDI
	NO				
droghe da strada	NO				sostanze psicoattive
	NO				semi-volatili
	NO			a seconda %p/p il preparato sarà H350	
	NO			a seconda %p/p (≥0,1 %) il preparato sarà H350	
	NO			a seconda %p/p (≥ 1 %) il preparato sarà H351	
	NO			a seconda %p/p (≥0,1 %) il preparato sarà H350	
	NO			a seconda %p/p (≥ 1 %) il preparato sarà H351	
	NO			a seconda %p/p (≥ 1 %) il preparato sarà H351	
Acque naturali, acque reflue, suolo, rifiuti, aria emissioni	NO				
Acque naturali, acque reflue, suolo, rifiuti, aria emissioni	NO				
Acque naturali, acque reflue, suolo, rifiuti, aria emissioni	NO				
Acque naturali, acque reflue, suolo, rifiuti, aria emissioni	NO				
Suoli, sedimenti	NO				
/	NO				
/	NO				
/	NO				
acque potabili	NO				tensioattivi non-ionici
acque naturali	NO				alcalinità
piscine	NO				
sedimenti, rifiuti	NO				TOC e Azoto totale
	NO			a seconda %p/p (≥0,1 %) il preparato sarà H420	
	NO			a seconda %p/p (≥0,1 %) il preparato sarà H420	
	NO			a seconda %p/p (≥0,1 %) il preparato sarà H420	
	NO			a seconda %p/p (≥0,1 %) il preparato sarà H420	
	NO			a seconda %p/p (≥0,1 %) il preparato sarà H420	
suolo + tutte le matrici acque	NO			a seconda %p/p (≥ 1 %) il preparato sarà H351	
suolo + tutte le matrici acque	NO			a seconda %p/p (≥0,1 %) il preparato sarà H420	
	NO				volatili (BTEX)
	NO				volatili (VOC)
	NO				volatili (VOC)
	NO				volatili (VOC)
	NO				volatili (VOC)

	NO				volatili (VOC)
	NO				volatili (VOC)
	NO				volatili (BTEX)
	NO				volatili (VOC)
	NO				volatili (VOC)
	NO				volatili (VOC)
	NO				volatili (VOC)
	NO				volatili (VOC)
	NO				volatili (BTEX)
	NO				volatili (BTEX)
	NO				volatili (VOC)
	NO				volatili (VOC)
	NO				volatili (VOC)
	NO				volatili (VOC)
	NO				volatili (BTEX)
	NO				volatili (BTEX)
	NO				volatili (VOC)
	NO				volatili (VOC)
	NO				volatili (VOC)

	NO				Metalli
	NO				Metalli
	NO				Metalli
	NO				Metalli
Particolato	NO				Metalli
Particolato	NO				Metalli
Particolato	NO				Metalli
Particolato	NO				Metalli
Vino	NO				Metalli
Vino	NO				Metalli
Vino	NO				Metalli
Vino	NO				Metalli
	NO				Metalli
	NO				Metalli
	NO				Metalli
	NO				Metalli
	NO				Metalli
	NO				Metalli
	NO				Metalli
	NO				Metalli
	NO				VOC
	NO				Aromatici

	NO				IPA
	NO				IPA
	NO				IPA
	NO				IPA
	NO				IPA
	NO				IPA
	NO				IPA
	NO				IPA
	NO				Diatomee bentoniche
	NO				FORMALDEIDE
	NO				FORMALDEIDE
acque/rifiuti liquidi	NO				diserbanti ureici
	NO				diserbanti ureici
	NO			COD Fornitore: Lange, test in cuvetta a seconda %p/p (≥0.1 %) il preparato sarà H350	COD
	NO				Tensioattivi cationici
	NO				Tensioattivi anionici
	NO				Tensioattivi non ionici
	NO				FUNGHI E LIEVITI
	NO				VOC, ANTIPARASSITARI E IPA
	NO				IDROCARBURI C10-C40
	NO				COD
	NO				COD
	NO				COD
	NO				COD

Sistema agenziale
Programma triennale 2014-2016

GdL n. 5 – Area 1 Formazione del dato

“Ricognizione dei metodi analitici che utilizzano reagenti ozono alteranti e/o cancerogeni”

.....

Nota di sintesi per approvazione in Consiglio del Sistema Nazionale del prodotto finale

Sommario. 1. Informazioni generali – 2. Sintetica descrizione del prodotto – 3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto – 4. Proposta delibera/raccomandazione/ rapporto tecnico e sperimentazione - 5. Diffusione del prodotto 6. Eventuale condivisione con soggetti esterni 7. Trasmissione amministrazioni centrali/territoriali 8. Parere del responsabile di area

1. Informazioni generali

Il secondo PT 2014-2016 del SNPA è stato articolato in macro aree definite in base alla tipologia e finalità attesa dei prodotti elaborati, ognuna di tali macroaree è stata poi suddivisa in aree tematiche, tecniche ed operative.

All'interno della Macroarea A “Regolamentazione ed uniformazione” e nello specifico, nell'Area 1 “Formazione del dato”, è stata individuata la necessità per il SNPA di approfondire la possibile sostituzione dei metodi analitici che utilizzano reagenti ozonolesivi e/o cancerogeni, valutando le alternative maggiormente compatibili dal punto di vista ambientale e della salute umana. Tale necessità ha portato alla istituzione del GdL 5 “Ricognizione dei metodi analitici che utilizzano reagenti ozono alteranti e/o cancerogeni”.

Agenzie partecipanti come componenti al GDL:

ARPA Emilia Romagna
ARPA Piemonte
ARPA Toscana
ARPA Umbria

Coordinamento del GDL:

ISPRA

Agenzie partecipanti come riferimenti del GDL:

ARPA Calabria
ARPA Lombardia
ARPA Basilicata
ARPA Veneto
ARPA Puglia
ARPA Sardegna
ARPA Marche
ARPA Friuli Venezia Giulia
ARPA Trento
ARPA Valle d'Aosta
ARPA Lazio
ARPA Campania
ARPA Sicilia
ARPA Liguria

2. Sintetica descrizione del prodotto

L'attività del Gruppo di Lavoro si è articolata nelle seguenti fasi:

- 1) individuazione dei reagenti ozono alteranti e/o cancerogeni utilizzati nei metodi di misura in uso presso i laboratori ARPA/APPA;
- 2) approfondimento del quadro normativo vigente sulle sostanze pericolose cancerogene ed ozonolesive;
- 3) verifica dello stato dell'arte, confronto a livello nazionale ed eventuale ricerca bibliografica;
- 4) individuazione e proposta di metodiche alternative non utilizzanti reagenti ozono alteranti e/o cancerogeni;
- 5) stesura del rapporto.

Il prodotto atteso è stato la stesura di un rapporto a resoconto delle attività svolte e degli obiettivi effettivamente raggiunti in termini anche di linee guida per gli operatori dei laboratori nell'acquisizione di sostanze pericolose e nella scelta di metodi dal punto di vista della protezione della salute umana e dell'ambiente più compatibili. I destinatari di tale prodotto sono il sistema SNPA, il MATTM e i laboratori privati.

3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto

Il lavoro è stato svolto prevalentemente tramite l'utilizzo della videoconferenza, data la difficoltà di tenere riunioni e visto il numero e la dislocazione geografica dei soggetti. Vi è stata una partecipazione molto buona ai lavori del GdL con grande disponibilità da parte di tutti al confronto ed alla ricerca di posizioni condivise.

Secondo quanto previsto dal POD è avvenuto il coinvolgimento anche dei riferimenti delle Agenzie non partecipanti al GdL.

Il documento allegato rappresenta pertanto la conclusione del lavoro assegnato; sullo stesso è stata riscontrata la piena convergenza di tutte le Agenzie partecipanti al GdL e di ISPRA.

Per quanto riguarda i riferimenti è pervenuto riscontro positivo da parte di ARPA Calabria, ARPA Lombardia, ARPA Lazio, ARPA Marche, APPA Trento, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Liguria, ARPA Sicilia, ARPA Sardegna, ARPA Puglia, Arpa Veneto e ARPA Basilicata.

Nel caso delle Agenzie che non hanno espresso una adesione al GdL, neanche come riferimenti (ARPA Abruzzo, ARPA Molise e APPA Bolzano), il documento è stato inviato per approvazione, prevedendo i termini del silenzio/assenso, alle rispettive Direzioni Tecniche. APPA Bolzano ha però esplicitamente condiviso il documento prodotto.

4. Proposta delibera/raccomandazione/rapporto tecnico e sperimentazione

In allegato viene riportata la proposta di Delibera con cui il Consiglio SNPA adotterà il prodotto

5. Diffusione del prodotto

Il Documento sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito dell'ISPRA e sarà rivolto ai Laboratori ARPA/APPA, al MATTM e ai Laboratori privati

6. Eventuale condivisione con soggetti esterni

-

7. Trasmissione amministrazioni centrali/territoriali

8. Parere del Responsabile di area

Il Documento è stato approvato dai Responsabili di Area nonché dal Comitato Tecnico Permanente per via telematica in data 23 ottobre 2017.

25 ottobre 2017

*Il Coordinatore del GDL 5
Dr.ssa Elisa Calabretta*